

D-4A Ark Takviyesi

Ayak longitudinal arkını desteklemek için 3 boy olarak kauçuktan üretilmiştir. Ayakkabı içine astar altına koyulabilir.



D-5 Topuk İç-Dış Kama

Topuk iç ve dış kenarını desteklemek için 4 boy olarak kauçuktan üretilmiştir. Ayakkabı içine astar altına koyulabilir.




D-6 Boydan İç-Dış Kama

Taban kavisini desteklemek için 6 boy olarak üretilmiş olup ayakkabı içine astar altına yapıştırılır. Pes planusta (düztabanlık) kullanılır.



D-7 Torq - Heel

Tek boy olarak sağ ve solu ayrı yapılan torq-heel her basışta ayağı dışa döndürür. Rotasyon yaptırır. Küçük çocuklarda içe dönük yürümede(Toe-in) kullanılır. Topuğun altı taşlanıp yapıştırıldıktan sonra küçük çivilerle topuğa çakılarak kullanılır.

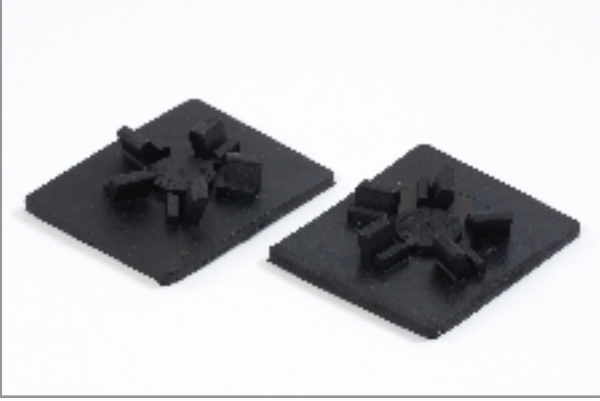

D-8 Vitraten PAFO Gece Ateli

Polipropilenden yapılır. Moldların içi 3 mm. plastizot ile kaplanmış üç noktadan welcro ile ayarlı kapama sağlanmıştır. Tüm modeller ısı tabancasıyla şekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

Endikasyon: Peroneal zayıflıkta, düşük ayak tedavisinde kullanılır.



D-8B Reflex AFO

Polipropilenden yapılan atel ayakkabı içerisine giyilebilecek şekilde üretilmiş, içi plastizot ile kaplanmamış ve üstten tek welcro ile sabitlenmesi sağlanmıştır. Tüm modeller ısı tabancasıyla şekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

Endikasyon: Peroneal zayıflıkta, düşük ayak tedavisinde kullanılır.



D-8C Eklemlı Polietilen Mold (PAFO)

Polipropilenden yapılan atelin içi 3 mm. plastizot ile kaplanmış üç noktadan welcro ile ayarlı kapama sağlanmıştır. Bilekte eklem mevcuttur. Tüm modeller ısı tabancasıyla şekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

Endikasyon: Peroneal zayıflıkta, düşük ayak tedavisinde kullanılır.

D-8D Polietilen Mold Dizüstü PKAFO

Hastaya özel alçı ölçüsüyle polipropilenden yapılan atel kasığa kadar uzanmaktadır. İçerisi 3 mm. Plastizot ile kaplanan atele diz eklemine sabitlemek için deriden yapılmış diz bandı da isteğe bağlı olarak takılmaktadır. Atelin sabitlenmesi welcro bantlarla yapılmaktadır.



D-8E Dorsifleksör Bandı

Bileğe sarılan hava geçirgen bilek bandajı, ayak tarağına sarılan band ve ayakkabı bağcıkları arasına takılabilen plastik destek olmak üzere toplam 3 parçadan oluşan atelin tüm parçaları toka ile birbirine monte edilebilmektedir. Bantlara tokalar çek-tirme sağlayabilecek sertlikte lastikle bağlanmıştır. Kolaylıkla takıp çıkartılabilen tokalar atelin ev içerisinde ve ev dışarısında kolayca kullanımını sağlar.





D-9 Vitraten Moldet

Bebeklerde kullanılmak üzere yapılan moldun 3 değişik boyu mevcuttur. İçi yumuşak plastizot ile kaplanmış, iki noktadan ayarlı welcro ile kapanması sağlanmıştır.

D-10 Helezon Yay Kısa Cihaz

5 boy olarak özel çelik telden üretilen cihaz ayakkabı altına açılacak üç deliğe vidaların takılmasıyla kolaylıkla uygulanabilir. Ayakkabıya monte edilen parçaya cihaz kolaylıkla takılıp çıkarılabildiğinden cihazın değişik ayakkabılarda kullanımı pratiktir. Çelik tellerin baldıra gelen kısmının welcroyla ayarı mümkün şekilde kapanması sağlanmıştır. Baldıra gelen kısmının yükseklik ayarının mümkün olması ayarı mümkün olmayan modellere göre cihaza kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Endikasyon: Felç sonrası peroneal zayıflıkta, düşük ayak tedavisinde kullanılır.



F-1 Alüminyum Tabanlık

Özel sert alüminyumun şekillendirilmesiyle yapılan tabanlığın üzeri hakiki deri ile kaplanmıştır. 20 ile 44 numara arasında geniş bir ölçü seçeneği mevcuttur.



F-2A Deri Kaplı Plastik Tabanlık

Özel esnek plastiğin şekillendirilmesiyle yapılan tabanlığın üzeri hakiki deri ile kaplanmıştır. 34 ile 44 numara arasında geniş bir ölçü seçeneği mevcuttur.



F-3 Epinli Alüminyum Tabanlık

Alüminyum tabanlığın topuk kısmına ortası delinmiş evazot yapıştırılmış ve üzeri hakiki deri ile kaplanmıştır. 30 ile 44 nolar arasında değişik boylarda üretilir.



F-4 Plexi Tabanlık

Özel esnek plexiden yapılan tabanlık 3/4 tabanlık şeklinde ve ince olup her tür ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. 34-44 numara arasında geniş bir ölçü seçeneği mevcuttur.



F-5 Mantar Tabanlık

Mantarın şekillendirilmesiyle yapılan tabanlıkta uzunluğuna ark ve metatars takviyelerinin universal ölçülerde olması sağlanmış, tabanlığın üstü iyi cins hakiki deri ile kaplanmıştır. 20 ile 44 numara arasında değişik boyları mevcut olup tam tabanlık olması ayakkabı içinde kaymayı engellemektedir.



F-5A Varus Tabanlığı

Mantarın şekillendirilmesiyle yapılan tabanlığın dış kısmında (lateralde) boydan dış kama mevcuttur. Tabanlığın üstü iyi cins hakiki deri ile kaplanmıştır. 20 ile 44 numara arasında değişik boyları mevcut olup tam tabanlık olması ayakkabı içinde kaymayı engellemektedir. Tibiadaki eğriliği düzeltmede ve pes ekino varusta kullanılmaktadır.



F-6 Plastrozat Kaplı Mantar Tabanlık

Mantar tabanlıktan farklı olarak tabanlığın üst kısmı deri yerine daha yumuşak olan ve antibakteriyel özelliği bulunan 3 mm.'lik plastizot ile kaplanmıştır. Yumuşak tabanı dolayısıyla düztabanlığın yanı sıra nasır vb. ayak rahatsızlıklarında da kullanılabilir. 20 ile 44 numara arasında değişik boyları mevcut olup tam tabanlık olması ayakkabı içinde kaymayı engellemektedir.



F-7 Çelik Tabanlık

Ark takviyesi paslanmaz çelikten presle şekillendirilen ve ilave köprü ile takviyenin deformitesi engellenmiş olan tabanlığın metatars takviyeleri yumuşak kauçuk pedlerle verilmiş, üzeri iyi cins kösele ile kaplanmıştır. 35 ile 44 nolar arasında değişik boylarda üretilmektedir.



G-2 Hallux Walgus Apareyi

Atel Hallux Walgus kemiği çıkıntısında kullanılır. Kemiğin üzerine basınç uygulayıp ittirirken baş parmağı ters basınç uygulayarak çeker. 39 no ya kadar tek boy olarak kullanılan atelin büyük ayaklar için battal boyu mevcuttur. Ayaktayken kullanılmayan atel gece yatarken kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



G-2A Hallux Walgus Makarası

Hallux Walgus kemiği çıkıntısının gündüz tedavisinde kullanılmak üzere üretilen makara kauçuk ve silikon olmak üzere iki çeşittir. İki boy olarak üretilen makara su ile yıkanabilir.





G-2B Bunion Yastığı

Plastizotun şekillendirilmesiyle yapılan yastık Bunion tedavisinde sürtünmeyi önler, tahriş olmuş bölgeyi baskıdan korur. Tek boy olup baş parmağa takılarak kullanılır.

G-2C Hallux Walgus Ateli Süngerli Kumaş

Cırt cırt yapışabilen süngerli özel kumaştan yapılan atel Hallux Walgus kemiği çıkıntısında kullanılır. Yan tarafa dikilmiş cep içerisindeki alüminyum destek kemiğin üzerine basınç uygulayıp ittirirken baş parmağı ters basınç uygulayarak çeker. Kolay ayar mekanizmasından dolayı tek boy olarak üretilmektedir. Sağ sol ayırımı vardır. Lacivert, gri ve ten rengi mevcuttur.



G-2D Elastic Hallux Walgus Ateli

Cırt cırt yapışabilen elastik özel velcrodan yapılan atel Hallux Walgus kemiği çıkıntısında kullanılır. Başparmağı ters basınç uygulayarak çeker. Kolay ayar mekanizmasından dolayı tek boy olarak üretilmektedir. Sağ sol ayırımı vardır. Siyah renktir.

G-3 Metatars Pedi

Metatars kavisinin bozulduğu durumlarda ayağın metatars kavisini oluşturmada kullanılan ped tek boy olarak yapılmıştır. Yumuşak kauçuktan pedin hakiki deri ile kaplanıp elastik bandın kaplama sırasını takılmasıyla üretilmiştir.



G-3A Metatars Pedi Parmak Geçmeli

Ayak ikinci parmağına takılarak kullanılan ped metatars kavisi oluşturmaya yardımcı olur. Tek boy olarak üretilir. Hakiki deri, ped ve yumuşak plastizotun preslenmesiyle üretilir.



I-1 Epin Yastığı

8 mm. evadan yapılan epin yastığının epin calcanien deliği mevcuttur. Üzeri ithal vinylex ile kaplanan yastığın tabanının tamamı çift tarafı yapışkanlı kağıtla kaplanmıştır. 3 boy olarak üretilir. Topuk dikeninde (epin calcanien) kullanılır



I-1A Epin Yastığı Ekonomik

12 mm. plasztizottan yapılan yastığın delik kısmı çıkartılarak topuk dikeninde, çıkartılmadan topuk düşmesinde kullanılabilir. Önde yer alan çift tarafı yapışkanlı kağıt vasıtasıyla ayakkabıya yapıştırılabilir. 3 değişik ölçüde üretilmektedir.



I-1B Topukluk

12 mm. plastizottan deliksiz olarak yapılan topukluk topuk yastığı olarak kullanılabilir. 3 değişik ölçüde üretilmektedir.



I-1C Kauçuk Epin Yastığı

Poliüretandan yapılan yastık delikli veya deliksiz olarak kullanılabilir. 2 boy olarak üretilmektedir.




G-4 Alçı Topuğu Tekli

Sert kauçuktan tekli ve çiftli olmak üzere iki ayrı modeli olan alçı topuğu alçı uygulaması sırasında kullanılır.



G-5 Alçı Topuğu Çiftli

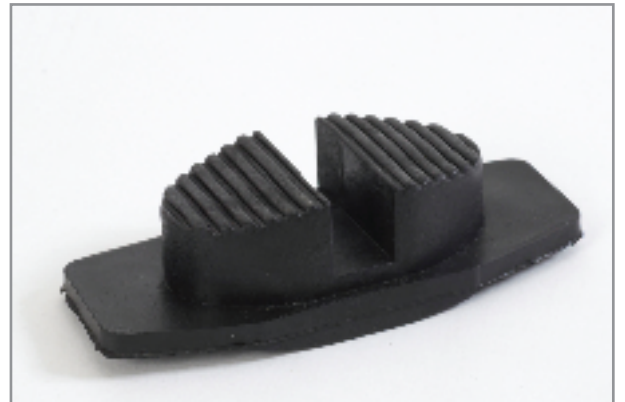

N-12 Posey Footguard (90° Yatak Ateli)

Polipropilenden yapılan atelin içi yıkanabilir, yumuşak peluşla kaplanmıştır. Tek boy olarak yapılan atel bantları ile ayarlanıp welcro ile sabitlenebilir. Sağ ve sol ayakta kullanılabilir. T desteği ile ayağın istenen açıda durmasını sağlar. Ameliyat sonrasında ayağı istenilen istirahat pozisyonunda tutmak için, eskar yaralarının ve felçli hastalarda kullanılabilir.



N-13 Alçı Terliği

Alçılı ayakla yürümeyi kolaylaştırmak, alçı tabanının kirlenmesini ve kaymasını önlemek için kullanılabilen terlik 3 katlı evadan yapılmıştır. Taban bölümünde kaymayı engelleyici şekilli eva kullanılmıştır. Welcro bantların takılı olduğu lastik bantlarla alçı üzerine kolaylıkla giyilebilir. 4 boy olarak üretilmektedir.

N-14 Alçı Botu

Alçı terliğine ilaveten üst kısımda süngerli kumaş kullanılarak alçılı ayağın soğuktan korunması sağlanmıştır. Üstte bulunan iki adet welcrobantla kolaylıkla alçı üzerine giyilip ayarlanabilir. Tek boy olarak arkası ve yanları kapalı bot şeklinde üretilmektedir.



O-29/30/31/32 Alçı Çorabı (Stokinet)

Çorap şeklinde, pamuktan dokunan stokinetin 8, 10, 12, 15 cm. şeklinde eni değişen modelleri mevcuttur.

Alçı uygulanacak bölgeye alçıdan önce giydirilerek vücudu korumada kullanılır. 4 m'lik paketlerde satılır.