



H-1 Ağaç Koltuk Değneği

Fırınlanmış gürgenden, verniklenerek yapılan değneğin yüksekliğinin ve el tutma yerinin ayarı mümkündür. Değnek altına kauçuk vakumlu lastik takılmış olup koltuk altına gelen kısma kılıf takılarak koruma sağlanmıştır. Çocuk ve büyük boyu olmak üzere iki çeşittir.

H-2 Alüminyum Koltuk Değneği

Beyaz renk elektrostatik toz boyalı veya eloksalı sert alüminyum profil ve borudan yapılan değneğin yüksekliğinin ve el tutma yerinin ayarı mümkündür. Koltuk altına gelen kısma sert plastik takoz ve üzerine yumuşak kauçuk kılıf takılmış olup el tutma yerine sert plastikten elçek monte edilmiştir. Değneğin altına kauçuk vakumlu lastik takılmış olup lastiğin içine çabuk yıpranmayı engellemek için rondela koyulmuştur. Üç ayrı boyda üretilmektedir.



H-2A Alüminyum Koltuk Değneği - Ekonomik

Metal veya eloksalsız alüminyum profil ve borudan yapılmıştır. Kısa süreli değnek kullanacak hastaların daha ekonomik değnek talebi üzerine tasarlanmıştır. Gri renk olan değnek üç ayrı boyda üretilmektedir. Fırın boyalı metaller özellikle uzun süreli kullanım ve kilolu hastalar için uygundur.




H-2B Neopren Değnek Kılıfı

Koltuk altı kullanılan değneklerin koltukaltında yaptığı tahrişi ve acıyı azaltmak için neoprenden tasarlanan kılıf değneğin üst kısmına takılıp welcro ile sabitlenebilmektedir.

H-2C Alüminyum Koltuk Değneği Klipsli

Eloksallı, sert alüminyum borudan yapılan değneğin yüksekliğinin ve el tutma yerinin ayarı mümkündür. Boy ayarı sustalı sistemle kolaylıkla yapılabilmektedir. Koltuk altına gelen kısma sert plastik takoz ve üzerine yumuşak kauçuk kılıf takılmış olup el tutma yerine sert plastikten elçek monte edilmiştir. Değneğin altına kauçuk vakumlu lastik takılmış olup lastiğin içine çabuk yıpranmayı engellemek için rondela koyulmuştur.

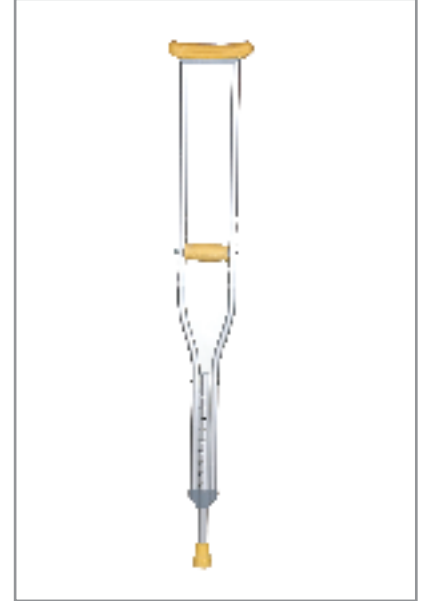

H-4 Değnek Lastiği Kauçuk

Değnek ölçülerine uygun şekilde kauçuktan dökülmüş olup lastiğin çabuk yıpranmasını engellemek için içerisinde rondela bulunmaktadır. Değneklerin kaymasını engellemek için değnek uçlarına takılmaktadır.



H-4A Değnek Lastiği PVC

Değnek ölçülerine uygun şekilde PVC den yapılmış olup lastiğin çabuk yıpranmasını engellemek için içerisinde rondela bulunmaktadır.



H-5 Asa Tipi Baston

Eloksallı alüminyum borudan yapılan bastonun el tutma yeri sert kaliteli plastikten yapılmış olup bastonun ucuna kauçuk vakumlu lastik takılmaktadır. Tek boy olarak üretilen değnek tüm boylara ayarlanabilmektedir.



H-6 Canadiyen Kol Değneği (Bütün Saplı)

İç içe geçen beyaz renk elektrostatik toz boyalı veya eloksallı alüminyum borudan yapılan bastonun boyu ayarlanabilir olup altına vakumlu kauçuk lastik takılmıştır. Anatomik yapıya uygun olarak değişik renklerde yapılan el tutma ve kol destek kısmı tek parça olup kaliteli sert plastikten yapılmıştır.





H-6A Ekonomik Canadiyen Kol Değneği

Kısa süreli kullanacak, değneğin ekonomik olmasını düşünen kişiler için geliştirilen değnek H-6'ya göre daha ince ve hafiftir. Gri renk olan değnek tek boy olarak üretilmektedir. Kılolu ve uzun zaman kullanacak kişiler için boyalı metal değnek alternatifi bulunmaktadır.

H-6B Neopren Canadiyen Kılıfı

Uzun süreli kullanımlarda dirsekte oluşan tahrişi ve acıyı azaltmak için neoprenden yapılmıştır. Değneğin dirsek kısmına takılan neopren destek arkada bulunan welcrosu ile sabitlenebilmektedir. Kolay kullanımının, rahatlığının ve yumuşaklığının yanı sıra estetik görünümde vermektedir.



Değnek ve Yürüme Gereçleri



H-7 Wolker Cihazı Sabit

Metal borudan kromajlı ve elektrostatik toz boyalı olarak iki modelde üretilen yürütecın bağlantıları vida ve kelebek somunla yapılmış, dört ayağa da vakumlu kauçuk lastik takılmıştır. Tek boy olarak üretilmektedir.



H-8 Wolker Cihazı Hareketli

Alüminyum borudan ve elektrostatik toz boyalı metal borudan yapılan yürütecın dört ayağının yükseklięi ayarlıdır. Eklemlı baęlantısından dolayı yürürken ileri geri hareket ettirilebilir. Kullanılmadıęı zamanda katlanarak fazla yer kaplamadan saklanabilir. Çocuk ve büyük boyu olan yürütecın dört ayağına da vakumlu kauçuk lastik takılmıştır. El tutma yerleri avuç içinin tahriş olmasını engellemek için özel süngerden yapılmıştır.

HA-8 Alüminyum Wolker Cihazı

Alüminyum borudan ve elektrostatik toz boyalı metal borudan yapılan yürütecın dört ayağının yükseklięi sustalı sistemle kolaylıkla ayarlanabilir. Hafiftir. El tutma yerleri özel süngerle kaplıdır. Eklemlı baęlantısından dolayı yürürken ileri geri hareket ettirilebilir. Kullanılmadıęı zamanda katlanarak fazla yer kaplamadan saklanabilir.



H-9A Wolker Cihazı Bükümlü

Alüminyum borudan ve elektrostatik toz boyalı metal borudan yapılan yürütecın dört ayağının yükseklięi sustalı sistemle kolaylıkla ayarlanabilir. Yürütece verilen özel bükümle hastanın oturduęu yerden kolaylıkla kalkması sağlanmıştır. Üst ve alt tutma yerleri özel süngerle kaplıdır. Eklemlı baęlantısından dolayı yürürken ileri geri hareket ettirilebilir. Kullanılmadıęı zamanda katlanarak fazla yer kaplamadan saklanabilir.



H-10 Tekerlekli Wolker Cihazı

Hareketli wolker cihazından farklı olarak ön iki ayağında tekerlek bulunmaktadır.

H-11 Klozet Yükseltici

Elektrostatik toz boyalı metal borudan yapılmıştır. Oturma yerinde klozet kapağı ve lazımlık sürgü yeri ve plastik lazımlığı bulunduğu tuvalette klozet üzerine yerleştirilebileceği gibi lazımlığı takılarak tuvalet dışında hastanın tuvalet ihtiyacını gidermesi de sağlanabilir. Dört ayağa da vakumlu kauçuk lastik takılmıştır. Katlanarak yer kaplaması engellenebilir. Yükseklik ayarı yoktur.



H-12 Klozet Yükseltici Tekerlekli

Dört ayağa takılan tekerlekle taşınması daha kolay hale getirilmiştir. Tekerleklerin takılı olduğu 4 ayakta da yükseklik ayarı mümkündür. Sırta destek olması için sırt desteği takılmıştır. Katlanarak kullanılabilir.



H-13 Klozet Yükseltici - Katlanır

Normal klozet yükselticiler gibi söküp takma derdi olmayan model; kullanılmadığı zaman birbiri üzerine katlanarak yer kaplamayacak şekilde tasarlanmıştır. Açılması çok basit, kullanımı çok kolay olduğundan hastalar ve hasta yakınları tarafından tercih edilmektedir. Hastanın tercihinine göre yükseklik ayarı yapılabilmektedir. Sırt desteği ekstra konfor sağlar.

H-14 Plastik Klozet Yükseltici

Yaşlı ve yürüme, oturma güçlüğü çeken kişilerin tuvalet ihtiyacını daha rahat gidermeleri için sert plastikten yapılan klozet yükseltici aparat klozetin üzerine yerleştirilerek kullanılır. Aparatın altında bulunan yuvalarına yerleştirilen 4 adet plastik mekanizma aparat klozete yerleştirildikten sonra kilitlenerek tam oturmasını sağlar. 185 kg.'a kadar taşıma kapasitesi bulunan aparat klozeti 11 cm. yükseltmektedir.



H-15 Plastik Klozet Yükseltici - Kapaklı

Plastik yükselticiden farklı olarak aparatta açılıp kapanır klozet kapağı bulunmaktadır. Kullanılmadığı zaman kapağın kapatılarak görüntü ve koku kirliliğinin engellenmesi sağlanmıştır.





G-7 Tripot Üçlü Denge bastonu

Metal borudan kromajlı ve elektrostatik toz boyalı modellerde üretilen bastonun üç ayağı ekstra yürüme desteği vermektedir. Üç ayağa da kauçuk vakumlu lastik takılmıştır. Tek boy olarak üretilen değnek tüm boylara ayarlanabilmektedir.

G-7A Canadiyen Saplı Üçlü Denge Bastonu

Canadiyen değneğe üç ayaklı parçanın takılmasıyla üretilen değnek G-7'den farklı olarak hem el hem de dirsek desteği vermektedir. Tek boy olarak üretilen değnek tüm boylara ayarlanabilmektedir.



G-8 Quadripot Dörtlü Denge Bastonu

Metal borudan kromajlı ve elektrostatik toz boyalı modellerde üretilen bastonun dört ayağı ekstra yürüme desteği vermektedir. Dört ayağa da kauçuk vakumlu lastik takılmıştır. Tek boy olarak üretilen değnek tüm boylara ayarlanabilmektedir.