

İNDEKS

1- Tıbbi Korseler	02-25	
2- Ortopedik Botlar	26-27	
3- Ayak Sağlığı Malzemeleri	28-38	
4- Ayak Bileği Ortez ve Bandajları	40-43	
5- Kol Ortezleri ve Tespit Bandajları	44-54	
6- Kalça - Diz Ortezleri ve Dizlikler.....	56-62	
7- El Bilek Ortez ve Atelleri	64-70	
8- Boyunluklar - Yastıklar	72-83	
9- Değnek ve Yürüme Gereçleri	84-91	
10- Kalça Çıkığı Atel ve Korseleri	92-94	
11- Yardımcı Sağlık (Rehabilitasyon) Malzemeleri	96-108	
12- Neopren Ürünler	110-127	
13- Varis Çorapları	128-133	
14- İlk Yardım Bakım Ürünleri	134-138	
15- Silikon Ürünler	140-148	
16- Anatomik Yastıklar	150-154	
17- Yatak Koruyucuları.....	156-157	
18- ORSA Kids.....	158-161	
19- ORSA Sports Neopren Tek Boy Ürünler.....	162-166	
20- Ölçü Tablosu.....	167-168	

KALİTE POLİTİKAMIZ

ORSA Ortopedi Sanayi “Sağlık için sağlıklı seçim” sloganıyla yola çıkarak kendini; sürekli yenilemeye, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmeye yüksek endüstri ve kalite yönetim standartlarının şartlarını oluşturmaya, yılda 1 kez kalite politikasını gözden geçirerek sürekli geliştirmeye adanmıştır.

Sağlık konusunda üretim yapmanın bilinciyle temel ilkelerimiz:

- Hastaları ve hastalıkları tanımak ve anlamak.
- Üretimlerimizin rahatsızlığı olan kişiler tarafından kullanılacağından hareketle ürünlerimizi en kaliteli ve kullanım kolaylığı olacak şekilde üreterek müşteri şikayetlerini en aza indirmek.
- Üretimin her aşamasında zaman ve malzeme kaybını en aza indirerek üretim ve satış miktarını arttırmak.
- Satış noktalarımızın müşterilere problemsiz ürünler sunmasını sağlamak, problemleri gidermek.
- Satış ağını genişletmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak.
- En son yenilikleri ve en son teknolojiyi müşterilerimize sunmak.
- Çalışanların yeteneklerini kullanarak en iyiye ve en güzele ulaşmaktır.



A-1 Lumbosacral Korse

Korse arkada sternumu içine alacak, üst kısmı dorsal 10'a kadar uzayacak önde ise 5 adet agrafla birleştirilecek şekilde imal edilir. Sağ ve solda yer alan 3'er adet ısırgan toka ile ayarlanan korsenin vücudu tam kavraması sağlanır. Korsenin değişik bölgelerinde 13 adet kıvrılmayı önleyen balenler bulunur. Arka kısımda omurganın her iki yanında 2 veya 4 adet paslanmaz, kenarları radiuslu, Avrupa çelik mevcuttur. Çelik uzunlukları kadın boyunda 28 cm erkek boyunda 32 cm dir. (Bu çeliklere çelik bükücü ile sırtın anatomik yapısına uygun olarak şekil verilir) Korsenin yukarıya doğru kaymaması için ayarı mümkün iki adet vücudu tahriş etmeyen kolon bulunur. Lumbosacral korse kadın ve erkek boyu ayrı olarak bütün vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondilozda, Spondilolistheside, Operasyon sonrasında kullanılır ve diğer cerrahi operasyonlar sonrasında bel ve karın desteği olarak kullanılır.

A-1G Lumbosacral Korse Pedli

Klasik Lumbosacral korseye ilave olarak omurga üzerine ekstra destek uygulayan bir adet ped bulunmaktadır. Ped kolaylıkla yıkanabilen kılıf içerisinde yer almakta korse iç yüzeyinde bulunan welcroya (cırt cırt) yapıştırılarak istenilen yükseklikte ayarlanabilmektedir. Korsenin vücut anatomisine uygun olarak kesilen kalıplarından dolayı korse vücudu tam olarak sardığından yukarıya doğru kayma yapmaz. Korse hastanın hareketleri sırasında en az rahatsızlığı verecek, en iyi stabilizeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Lumbosacral korse kadın ve erkek boyu ayrı olarak bütün vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir. Çelik uzunlukları kadın boyunda 28 cm, erkek boyunda 32 cm dir.

Endikasyon: Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondilozda, Spondilolistheside, Operasyon sonrasında kullanılır.



A-1W Lumbosacral Korse Welcrolu

Arka kısmı klasik Lumbosacral korse ile aynı olan korsenin ön kısmında pratik ve kolay giyimi sağlamak için agraflar yerine welcro (cırt cırt) bulunmaktadır. Enine ve boyuna 3 sıra olarak dikilen 5 cm.lik welcrolarla geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Arkada 4 yanlarda 1'er ve önde 1 adet olmak üzere toplam 7 adet balenle korsenin mukavemeti artırılmakta, ön kapak üzerinde yer alan 2 adet kemerle (ısırgan tokalı) korsenin açılması engellenmektedir. Korsenin yukarıya doğru kaymaması için ayarı mümkün iki adet vücudu tahriş etmeyen kolon bulunur. Welcrolu Lumbosacral Korse geniş ayar mekanizması bulunduğundan 3 boy olarak imal edilir. Çelik uzunluğu 26 cm'dir

Endikasyon: Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondilozda, Spondilolistheside, Operasyon sonrasında kullanılır. Kolay kullanımından dolayı çelikleri çıkartılarak bel ve karın desteği gerektiren tüm durumlarda kullanılabilir.





A-1L Lumbosacral Welcro Ayarlı


Klasik Lumbosacral korse den farklı olarak sağ ve solda yer alan 3'er adet ayar mekanizması ısırgan toka ile değil welcro ile dizayn edilmiştir. Ön kapamada agraf ile değil welcro ile yapılmıştır. Diğer özellikleri Klasik Lumbosacral korse ile aynıdır.

Endikasyon: Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondilozda, Spondilolisthesiste, Operasyon sonrasında kullanılır.

A-1A Lumbostat Korse

Klasik Lumbosacral korseye göre önden ve arkadan daha kısa olan lumbostat korsesinin Sağ ve sol yanlarında bulunan 2'şer adet ısırgan toka ile vücudu tam kavraması sağlanır. Korsenin değişik bölgelerinde 11 adet kıvrılmayı önleyen balenler bulunur. Korsenin yukarıya doğru kaymaması için ayarı mümkün iki adet vücudu tahriş etmeyen kolon bulunur. Lumbostat korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Lumbosacral travmalarda, akut ve kronik lumbagoda, siyatikte, bel fıtıklarında, Operasyon sonrasında kullanılır.

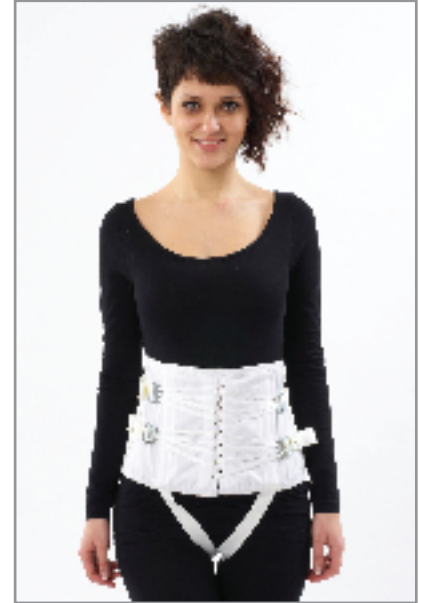

A-1B Üniversal Korse Pedli

Arka kısmı özel dokunmuş elastik korse kumaşından yapılan korsenin ön iki ucunda 20 cm'lik esnemez korse kumaşı dikilmiştir. Esnemez kumaş üzerine enine ve boyuna 3 sıra olarak dikilen 5 cm'lik welcrolarla geniş ve kolay ayar mekanizması sağlanmıştır. Arkada 4 önde 1 adet flexible balenle korsenin rijitliği sağlanır. Sacral bölgeyi destekleyen kemerli, hareketli ped ile ekstra destek sağlanıp ped isteğe göre önde, arkada, yanlarda destek olarak kullanılabilir. Bu da korseye çok amaçlı kullanım sağlar. 7 değişik ölçüde üretilir.

Endikasyon: Lumbosacral travmalarda, akut ve kronik lumbagoda, siyatikte, bel fıtıklarında, Bel Operasyonları ve diğer cerrahi operasyonlar sonrasında bel ve karın desteği olarak kullanılır. Ağır yük taşıyanlarda koruyucu olarakta önerilir.





A-1C Üniversal Korse Pedsiz


Arkada 2 adet flexible baleni bulunan korsenin tamamı özel dokunmuş elastik korse kumaşından yapılmıştır. Her iki uca enine ve boyuna dikilen 2'şer adet 5 cm'lik welcrolarla kolay kapama ve ayar yapma imkanı sağlanmıştır. Pedli modele göre önde ve arkada daha kısa olarak üretilmiştir. Korse vücut ölçülerine göre 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Akut ve kronik lumbagoda, siyatikte, bel fıtıklarında, doğum sonrasında, bel operasyonları ve diğer cerrahi operasyonlar sonrasında bel ve karın desteği olarak kullanılır.

A-2 Dorso Lumbar Korse

Korse arkada sternumu içine alacak, üst kısmı dorsal 4'e kadar uzayacak önde ise 5 adet agrafla birleştirilecek şekilde imal edilir. Sağ ve solda yer alan 3'er adet ısırgan toka ile ayarlanan korsenin vücudu tam kavraması sağlanır. Korsenin değişik bölgelerinde 13 adet kıvrılmayı önleyen balenler bulunur. Arka kısımda omurganın her iki yanında 2 veya 4 adet paslanmaz, kenarları radiuslu, avrupa çelik mevcuttur. Çelik uzunlukları kadın boyunda 38 cm, erkek boyunda 48 cm'dir. (Bu çeliklere çelik bükücü ile sırtın anatomik yapısına uygun olarak şekil verilir.) Omuz bantları omuzdan, arkada çapraz kesişerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sağlar. Korsenin yukarıya doğru kaymaması için ayarı mümkün iki adet vücudu tahriş etmeyen kolon bulunur. Dorso lumbar korse kadın ve erkek boyu ayrı olarak bütün vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Kompresyon kırıklarında, osteoporosis, arthritis, lordosis ve scoliosis gibi maximum spinal kavrama gerektiren durumlarda ve operasyon sonrasında doktor tavsiyesine göre kullanılır.

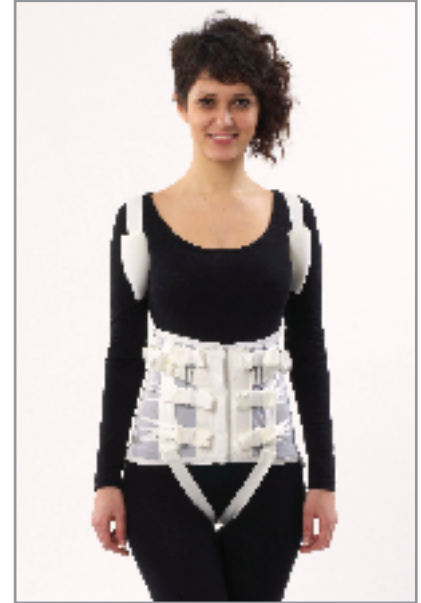

A-2W Dorsolumbar Korse Welcrolu

Arka kısmı klasik Dorsolumbar korse ile aynı olan korsenin ön kısmında pratik ve kolay giyimi sağlamak için agraflar yerine welcro (cırt cırt) bulunmaktadır. Ayrıca bu tasarım yaşlı ve engelli hastaların daha kolay kullanımını sağlar. Enine ve boyuna 3 sıra olarak dikilen 5 cm'lik welcrolarla geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Arkada 4 yanlarda 1'er ve önde 1 adet olmak üzere toplam 7 adet balenle korsenin mukavemeti arttırılmakta, ön kapak üzerinde yer alan 2 adet kemerle (ısırgan tokalı) korsenin açılması engellenmektedir. Omuz bantları omuzdan, arkada çapraz kesişerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sağlar. Korsenin yukarıya doğru kaymaması için ayarı mümkün iki adet vücudu tahriş etmeyen kolon bulunur. Welcrolu Dorso Lumbar Korse geniş ayar mekanizması bulunduğu için 3 boy olarak imal edilir. Çelik uzunluğu 36 cm'dir

Endikasyon: Kompresyon kırıklarında, bel fıtığı ve kaymalarda, omurga şekil bozuklukları ve rahatsızlıklarında doktor tavsiyesine göre kullanılır.





A-3 Mide ve Organ Düşük Korsesi


Abdominal desteği sağlayacak şekilde pamuklu kumaş ve lycradan üretilmiştir. Mide düşüklüğünü giderecek şekilde dizayn edilmiş özel yastığı vardır. Sağ ve solda 2'şerden 4 adet ısırgan tokayla ve kolonlarla ayar mekanizması sağlanmaktadır. Ayar mekanizması için yanlarda 8'erden toplam 32 adet kuşgözü ve bu kuşgözlerinden geçen korse ipleri bulunur. 3'er delikli ısırgan tokaların tüm deliklerine kuşgözü takılarak korse iplerinin sıkıştırma sırasında çabuk yıpranması önlenmiştir. Önde 5 arkada 4 adet flexible balen ayrıca önde 3 adet paslanmaz çelik bulunur. Korsenin yukarıya doğru kaymaması için uç kısmı elastik iki adet vücudu tahriş etmeyen kolon vardır. Mide korsesi vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Mide ve Bağırsak düşüklüğünde kullanılır.

A-4 Karın Korsesi Cerrahi

Mide korsesinden farklı olarak önde 5 yanlarda 1'er arkada 2 adet flexible balen bulunur. Abdominal desteği sağlayacak şekilde pamuklu kumaş ve lycradan üretilmiştir. Sağ ve solda 2'şerden 4 adet ısırgan tokayla ve kolonlarla ayar mekanizması sağlanmaktadır. Ayar mekanizması için yanlarda 8'erden toplam 32 adet kuşgözü ve bu kuşgözlerinden geçen korse ipleri bulunur. 3'er delikli ısırgan tokaların tüm deliklerine kuşgözü takılarak korse iplerinin sıkıştırma sırasında çabuk yıpranması önlenmiştir. Korsenin yukarıya doğru kaymaması için uç kısmı elastik iki adet vücudu tahriş etmeyen kolon vardır. Karın korsesi vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Ameliyat sonrasında, göbek fıtığında kullanılır.

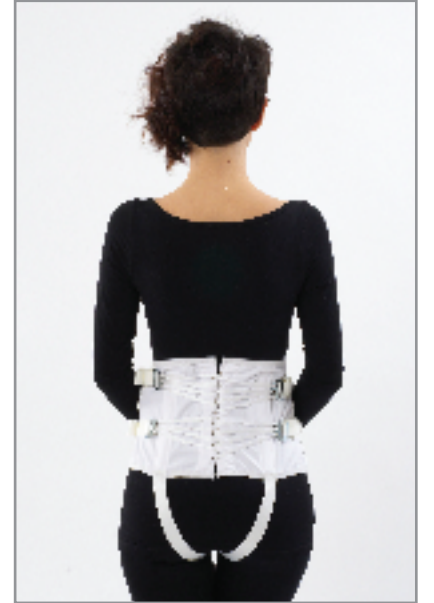

A-5 Böbrek ve Mide Düşük Korsesi

Mide korsesinde bulunan mide yastığına ilaveten sağ ve solda 1'er adet böbrek desteği bulunur. Mide yastığının korseye yerleştirileceği bölgeye cep dikilmiş, böbrek yastıklarının korseye takılacağı bölgelere dişi welcro, yastıklara da erkek welcro dikilerek yastıkları sabitleme kolaylığı sağlanmıştır. Korse vücut ölçülerine göre 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Viscera ptosis'de ve böbrek düşüklüğünde kullanılır.



A-4A Karın Korsesi “Skandal”

Çift kat Lycra'dan üretilmiştir. Ön yüzeyine saten kumaş ve havalanmaya engel olmayacak sağlam dantel kumaş dikilerek korsenin karnı toplaması sağlanmıştır. Ayrıca göbek hizasında içten çapraz dikilen bantlarla ekstra destek sağlanmıştır. Skandal korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal edilir. Lycra ürünlerimizin tamamı giyip çıkartılırken esneme sırasında dikiş patlaması yapmaması için özel makine ve aparatlarla dikilmiştir.

Endikasyon: Doğum sonrasında, karın sarkmasında, ameliyat sonrasında ve estetik görünüm vermek için güzellik korsesi olarak kullanılır.

A-4B Karın Korsesi Külotlu

Skandal korsenin bütün özelliklerine sahiptir. İlave olarak çift kat saten kumaştan ağ kısmı mevcuttur. Külot korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal edilir.

Endikasyon: Doğum sonrasında, karın sarkmasında, ameliyat sonrasında ve estetik görünüm vermek için güzellik korsesi olarak kullanılır.



A-4C Karın Korsesi Paçalı

Çift kat Lycra'dan paçalı olarak üretilen korse Karın, kalça ve üst baldır bölgesini uygun bir şekilde sarıp, toplar. Paçalı korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal edilir.

Endikasyon: Doğum sonrasında, karın sarkmasında, ameliyat sonrasında ve estetik görünüm vermek için güzellik korsesi olarak kullanılır.





A-6 Gebelik Korsesi Doğum Öncesi

Tek kat Lycra'dan paçalı olarak üretilmiştir. Ön kısmında gebelik ilerledikçe genişlemesine yardımcı olacak şekilde bağcıklarla ayarlanabilen yumuşak dantelden bölüm vardır. Bu ayar mekanizmasıyla gebeliğin son dönemine kadar korsenin giyilebilmesi sağlanmaktadır. 7 boy ve beyaz renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Doğum öncesinde kullanılır. Sarkma ve çatlamaları önler. Sarkan batının sebep olduğu bağlardaki gerilmeyi ve zorlanmayı azaltır.



A-7 Gebelik Korsesi Doğum Sonu

Cerrahi karın korsesinden farklı olarak tamamı pamuklu korselik kumaştan yapılmış, doğum sonrasında karını toplayabilmek için ön kısmı özel olarak tasarlanmıştır. Önde iki adet çapraz flexible balen, yanlarda 2'şer adet flexible balen bulunur. Ayar mekanizması ve sıkılık yanlarda bulunan 2'şer adet ısırgan toka ve kolonlarla sağlanır. Ayar mekanizması için yanlarda 8'erden toplam 32 adet kuşgözü ve bu kuşgözlerinden geçen korse ipleri bulunur. 3'er delikli ısırgan tokaların tüm deliklerine kuşgözü takılarak korse iplerinin sıkıştırma sırasında çabuk yıpranması önlenmiştir. 7 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Doğum sonrasında kullanılır.



N-7 Hamile Kemer

5 mm. Süngerin laminasyon tekniğiyle kaplanmasıyla elde edilen süngerli yumuşak kumaştan üretilmektedir. Kumaşın her noktadan cırt cırt yapışabilme özelliğinden dolayı tek boy olarak yapılan kemer her bedene uyabilmekte hamilelik süresince kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Gebelikte sırtın alt bölgesine ve kalça bölgesine destek ve sıkıştırma sağlar. Sarkan batının sebep olduğu bağlardaki gerilmeyi ve zorlanmayı azaltır. Çoğul gebelikte, karının fazla büyümesinde karına alttan destek verir, batını hafifçe kaldırarak acının azalmasına yardımcı olur. Uygun vücut pozisyonu ve hareketine cesaretlendirmeye stresi azaltır.



N-8 Hamile Kemer Bel Destekli

Sırta gelen kısmı elastik kumaştan ön kısmı ise süngerli kumaştan yapılan korsede bele destek olması için 2 adet flexible balen bulunmaktadır. Korsenin arka kısmından gelen iki adet elastik bant önde süngerli kumaş üzerine yapıştırılarak sırta ekstra destek sağlamaktadır. 4 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Hamilelik esnasında belin alt kısmında görülen ağrıyı ve yorulmayı azaltmaya yardım eder. Batını hafifçe kaldırarak acının azalmasına yardımcı olur. Kalçalara ve sırtın aşağı kısmına baskı ve destek sağlar.



A-8 Sıhhi Paçalı Korse (Tek Kat Lycra)

Tek kat Lycra'dan estetik amaçlı olarak üretilmiştir. Bayanların pantolon ve etek içinde giyerken potluk yapmasını önlemek için paçalı korsenin uçlarında ince dantel kullanılmıştır. Ön kısımlarında kullanılan esnemeyen kumaşla karnın toplanması amaçlanmıştır. Tek kat Lycra'nın sağladığı basınç çift kat Lycra'ya göre oldukça az olduğundan daha çok estetik amaçlı kullanılması önerilmektedir. Sıhhi korseler vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal edilir.

Endikasyon: Ameliyat sonrasında, karın sarkmasında, doğum sonrasında kullanılır. Özellikle bayanlarda elbise içerisine giyilerek sarkmış karın ve kalçaları toplayıp güzellik korsesi olarak tercih edilir.

A-9 Sıhhi Külotlu Korse (Tek Kat Lycra)

Tek kat Lycra'dan estetik amaçlı olarak üretilmiştir. Bayanların pantolon ve etek içinde giyerken potluk yapmasını önlemek için korsenin uçlarında ince dantel kullanılmıştır. Ön kısımlarında kullanılan esnemeyen kumaşla karnın toplanması amaçlanmıştır. Tek kat Lycra'nın sağladığı basınç çift kat Lycra'ya göre oldukça az olduğundan daha çok estetik amaçlı kullanılması önerilmektedir. Sıhhi korseler vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal edilir.

Endikasyon: Ameliyat sonrasında, karın sarkmasında, doğum sonrasında kullanılır. Özellikle bayanlarda elbise içerisine giyilerek sarkmış karın ve kalçaları toplayıp güzellik korsesi olarak tercih edilir.



A-10 Sıhhi Skandal Korse (Tek Kat Lycra)

Tek kat Lycra'dan estetik amaçlı olarak üretilmiştir. Bayanların pantolon ve etek içinde giyerken potluk yapmasını önlemek için korsenin uçlarında ince dantel kullanılmıştır. Ön kısımlarında kullanılan esnemeyen kumaşla karnın toplanması amaçlanmıştır. Tek kat Lycra'nın sağladığı basınç çift kat Lycra'ya göre oldukça az olduğundan daha çok estetik amaçlı kullanılması önerilmektedir. Sıhhi korseler vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal edilir.

Endikasyon: Ameliyat sonrasında, karın sarkmasında, doğum sonrasında kullanılır. Özellikle bayanlarda elbise içerisine giyilerek sarkmış karın ve kalçaları toplayıp güzellik korsesi olarak tercih edilir.





A-12 Sirt Korsesi “2 Parçalı”

Postural bozuklukları düzeltmek için yapılan korse pamuklu kumaştan yapılmıştır. Her kola ayrı olarak takılan korsenin her parçasında 7'şer adet flexible balen bulunur. Koltuk altlarına gelen kısımları özel yumuşak süngerle kaplanan korse kollara geçirildikten sonra sırtta çapraz gelip uçları önde birleştirilir. Ayar mekanizması ısırgan tokalarla istenilen sıkılıkta yapılabilir.

Endikasyon: Hafif kamburlukta, duruş bozukluklarında ve vücudun dik durmasında kullanılır. Gençlerde ve masa başında-bilgisayar başında çok oturanlarda görülen postural bozukluklarda yararlıdır.

A-12A Sirt Korsesi “Posturex”

Yumuşak kolonlardan yapılan korsenin ayar mekanizması ısırgan tokalarla sağlanmıştır. Sırtta 3 adet flexible balen kolonlardan yapılmış ceplerin içerisine yerleştirilmiştir. Tokaların bulunduğu yerlere ve koltukaltından geçecek kısımlara süngerli kumaştan destekler koyularak vücuda rahatsızlık vermesi azaltılmıştır. 3 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Duruş bozukluklarında ve vücudun dik durmasında kullanılır. Gençlerde ve masa başında-bilgisayar başında çok oturanlarda görülen postural bozukluklarda yararlıdır.



A-13 Batın Korsesi

Cerrahi karın korsesinden farklı olarak ön kısmı daha yüksektir. Diğer özellikleri aynıdır. Abdominal desteği sağlayacak şekilde pamuklu kumaş ve lycradan üretilmiştir. Sağ ve solda 2'şerden 4 adet ısırgan tokayla ve kolonlarla ayar mekanizması sağlanmaktadır. Ayar mekanizması için yanlarda 8'erden toplam 32 adet kuşgözü ve bu kuşgözlerinden geçen korse ipleri bulunur. 3'er delikli ısırgan tokaların tüm deliklerine kuşgözü takılarak korse iplerinin sıkıştırma sırasında çabuk yıpranması önlenmiştir. Korsenin yukarıya doğru kaymaması için uç kısmı elastik iki adet vücudu tahriş etmeyen kolon vardır. Karın korsesi vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Ameliyat sonrasında, göbek fıtığında, batın duvarının desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır





B-1 Yün Elastik Korse 27 cm

Elastik kumaştan yapılan korsenin takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. Korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Romatizma, siyatik ve bel rahatsızlıklarında, bel ve karın kaslarının sıcak tutulması gerektiği hallerde kullanılır.

B-2 Yün Elastik Kıvrık Kemer 32 cm

32 cm.'lik elastik kumaştan üretilen korsenin bir tarafının ucu kıvrılarak dikilmiştir. Böylece kıvrık taraf göğüs altına veya etek kısmına getirilerek korsenin tam oturması sağlanır. Vücut ölçülerine göre 5 değişik ölçüde üretilmiştir.

Endikasyon: Romatizma, siyatik ve bel rahatsızlıklarında, bel ve karın kaslarının sıcak tutulması gerektiği hallerde kullanılır.



B-3 Yün Elastik Paçalı Korse

Yün korseye ağ kısmı ilave edilerek paçalı hale getirilmiş, bayanlarda özellikle genital bölgenin korunması ve sıcak tutulması sağlanmıştır. 5 boy olarak üretilmiştir.

Endikasyon: Genital rahatsızlıklarda, idrar yolu ve yumurtalık rahatsızlıklarında, romatizma, siyatik ve bel rahatsızlıklarında, bel ve karın kaslarının sıcak tutulması gerektiği hallerde kullanılır.



B-4 Yün Elastik Cot Fraktür

Omuz altına gelen kısımları oyularak elastik kumaştan yapılan korsenin aşağıya kaymasını önlemek için omuzdan gelen kolonlar ve ısırgan tokalar ilave edilmiştir. 5 boyu vardır.

Endikasyon: Cot fraktürlerinde ve ameliyat sonrasında kullanılır.

B-8 Yün Elastik Omuzluk - Göğüslük

Elastik kumaştan omuz ve göğüs bölgesini kaplayacak şekilde (kısa kollu fanila gibi) üretilmiş, kolların omuzlarla birleştiği yerler özel mauser lock makine ile birleştirilerek hastanın rahatsız olması önlenmiştir. 3 boy olarak üretilir.

Endikasyon: Omuz, göğüs ve boyun üşütmelerinde ve de zatürrede sıcak tutmak amacıyla kullanılır.



B-12 Welcrolu Kemer

25 cm eninde elastik kumaştan yapılan korsenin bir ucuna 5 cm'lik sert welcro diğer ucuna 25 cm'lik welcronun her noktadan yapışabildiği süngerli kumaş dikilmiştir. Geniş ayar mekanizmasıyla istenilen sıkılık ayarı yapılabilir. 7 boy olarak üretilmiştir.


Endikasyon: Cerrahi operasyon sonrasında, göbek fıtığında, romatizma, siyatik ve bel rahatsızlıklarında, bel ve karın kaslarının sıcak tutulması gerektiği hallerde kullanılır.



E-2 Külot Fıtık Korsesi Cepli

Özel elastik kumaştan yapılan korse welcro ile kademeli olarak kapatılabilmektedir. Sağ ve sol tarafta bulunan ceplerin açılıp kapanması ve ara bağının takılıp ayarlanması welcro (cırt cırt) ile yapıldığından kolay ve pratik kullanımı vardır. Özellikle yaşlılarda ve fiziksel engelli kişilerde kolay kullanımdan dolayı tavsiye edilir. Ceplerine istenilen sertlikte pamuk veya yumuşak malzeme doldurularak istenilen sertlik elde edilebilir. Bu sayede hasta fıtığı üzerine rahat ettiği şekilde istediği baskıncı uygulayabilir. 5 boy ve beyaz renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kasık fıtıklarında (Inguinal Hernia) ve fıtık ameliyatı sonrasında kullanılır.

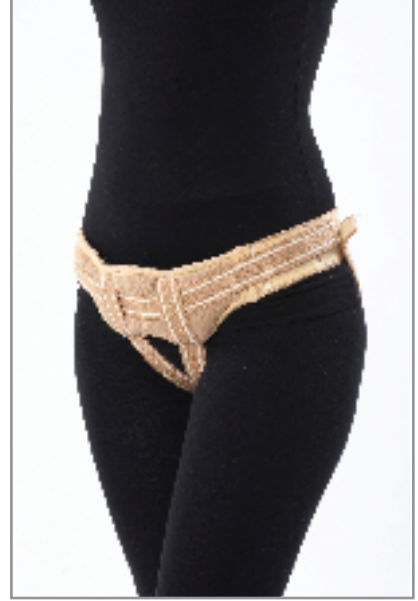

E-3 Külot Fıtık Korsesi Tamponlu

Bel ve ara bağı bağlantılarının tamamı welcro (cırt cırt) ile kolaylıkla yapılan korse-nin kasıklara gelen kısımlarına süngerden tamponlar dikilmiştir. Tamponun baskısını ayarlayabilmek için de öne iki adet welcro ayarlı, kademeli çekirme bant yerleştirilmiştir. 5 boy ve ten rengi olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kasık fıtıklarında (Inguinal Hernia) ve fıtık ameliyatı sonrasında kullanılır.



E-4 Kasık Fıtık BağıTakoğlu

Tamponu yumuşak kauçuktan olup tamponun çevresi stokinet pamuklu kumaşla kaplanıp kauçuğun vücuda doğrudan teması engellenmiştir. Bele ve bacak arasına takılan bantlar özel dokunmuş olup dayanıklılığı artırılmıştır. Tek boy ve ten rengi olarak üretilen sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: Kasık fıtıklarında (Inguinal Hernia) ve fıtık ameliyatı sonrasında kullanılır.



E-5 Kasık Fıtık Bağı Takoğlu Çift Taraflı

Tamponu yumuşak kauçuktan olup tamponun çevresi stokinet pamuklu kumaşla kaplanıp kauçuğun vücuda doğrudan teması engellenmiştir. Bele ve bacak arasına takılan bantlar özel dokunmuş olup dayanıklılığı artırılmıştır. Tek boy ve ten rengi olarak üretilen korse-nin sağ ve sol çift tarafta da takozu bulunmaktadır.

Endikasyon: Kasık fıtıklarında (Inguinal Hernia) ve fıtık ameliyatı sonrasında kullanılır.



E-7 Göbek Bağı Welcrolu Çocuk

Yeni doğmuş bebeklerde göbeğe baskı yapmak amacıyla elastik kumaştan üretilmiştir. Tamponu plastizottan daire şeklinde yapılmıştır. Açıp kapamasının cırt cırt ile yapılması kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 7 değişik boyda üretilmektedir. Göbek fıtığında kullanılır.



E-7A Kasık Bağı Welcrolu Çocuk

Elastik kumaştan sağ, sol ve çift taraflı olmak üzere 3 model ve 5 boy olarak üretilmektedir. Fıtık tamponları şekillendirilmiş plastizottan yapılmaktadır. Bel ve bacak arası ayarlarının cırt cırt ile yapılması kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Çocuklarda kasık fıtığında kullanılır.



E-8 Göbek Bağı Welcrolu Büyük

12 cm. eninde elastik kumaştan yapılan kemerin her iki ucuna welcro dikilerek kapanması sağlanmıştır. 10x10 cm ebadında 12 mm kalınlığında plastizottan yapılan tamponun uçlarına rampa şeklinde eğim verilmiştir. 7 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Göbek fıtığında kullanılır.



D-2A Suspansuar

Ön kısmı tek kat Lycra'dan bel ve bacak arası kısmı bükülmeyen iyi cins pamuklu banttan yapılmıştır. 7 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Spor faaliyetlerinde destekleyici olarak, sarkık torbaları toplamak için ve testislerin yaralanması ile iltihaplanmasında kullanılır.



N-2 Çektirme Bantlı Lumbosacral Korse

Arka kısmı tamamıyla elastik kumaştan yapılan korsenin ön kısmında pratik kullanımı, kolay sıkılık ayarını ve rahatlığı sağlamak amacıyla süngerli özel kumaş kullanılmıştır. Sert welcro yapışabilecek şekilde özel dokunmuş kumaşın sünger üzerine laminasyon tekniği ile kaplanmasıyla oluşan süngerli kumaş uzun süre welcroya yapışabilme özelliğine sahiptir. Arkadan gelip önde özel süngerli kumaşın herhangi bir yerine yapışabilen bantlar lumbal bölgeye ekstra destek sağlar. Arkada 4 adet plastik balen sırta ek destek vermektedir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve Röntgen çekimlerinde korsenin vücuttan çıkarılmadan kullanılabilmesini sağlamaktadır. 5 boyu vardır.

Endikasyon: Bel fıtığında, lumbagoda, vertebranın yükünün azaltılmasının gerektiği durumlarda, sacrum ve sacro iliac bölgelerine destek ve değişen derecelerde baskı yapılması gerektiğinde, bel ve karın desteği gerektiren tüm durumlarda kullanılır.

N-4 Lumbosacral Ortezi

Laminasyon yöntemi ile kaplanmış 0.5 mm kalınlığındaki süngerden imal edilmiş olan LSO Lumbal ve sacral bölgeyi zırh gibi kuşatır. Kaplamada kullanılan kumaş deriyi tahriş etmeyecek şekilde işlenmiş olup welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliği ayar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Vücut anatomisine uygun olarak 7 ayrı boyda üretilen korse giysi içinden görünmemesi için ten rengi olarak imal edilmiştir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır. Önde ve arkada bulunan ceplere yerleştirilen materyalin ısıyla şekil alabilmesi vücuda tam uyumu sağlamaktadır. Sıkılık ayarının tam olarak yapılması için 6 değişik noktadan welcro ayarı bulunmaktadır.

Endikasyon: Omurga bozukluklarında, vertebra kırıklarında, vertebra ameliyatları ve bel fıtığı ameliyatları sonrasında, belin desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.



N-4A Lumbosacral Ortezi Ekonomik

Laminasyon yöntemi ile kaplanmış 0.5mm kalınlığındaki süngerden imal edilmiş olan LSO Lumbal ve sacral bölgeyi zırh gibi kuşatır. Kaplamada kullanılan kumaş deriyi tahriş etmeyecek şekilde işlenmiş olup welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliği ayar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Vücut anatomisine uygun olarak 3 ayrı boyda üretilen korse giysi içinden görünmemesi için ten rengi olarak imal edilmiştir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır. Arkada bulunan cebe yerleştirilen materyalin ısıyla şekil alabilmesi vücuda tam uyumu sağlamaktadır.

Endikasyon: Omurga bozukluklarında, vertebra kırıklarında, vertebra ameliyatları ve bel fıtığı ameliyatları sonrasında, belin desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.





N-5 Torako Lumbosacral Ortezi

Laminasyon yöntemi ile kaplanmış 0.5 mm kalınlığındaki süngerden imal edilmiş olan TLSO Lumbal, sacral ve Torakal bölgeyi zırh gibi kuşatır. Kaplamada kullanılan kumaş deriyi tahriş etmeyecek şekilde işlenmiş olup welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliği ayar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Vücut anatomisine uygun olarak 7 ayrı boyda üretilen korse giysi içinden görünmemesi için ten rengi olarak imal edilmiştir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır. Önde ve arkada bulunan ceplere yerleştirilen materyalin ısıyla şekil alabilmesi vücuda tam uyumu sağlamaktadır. Yumuşak bir şekilde bükülebilen malzeme önceden şekillendirilmiş olsa da ısı tabancasıyla kolayca modifiye edilebilir. Sıkılık ayarının tam olarak yapılması için 3'ü sağ 3'ü sol tarafta olmak üzere 6 değişik noktadan welcro ayarı bulunmaktadır. Omuz bantları omuzdan, arkada çapraz kesişerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sağlar.

Endikasyon: Omurga bozukluklarında, vertebra kırıklarında, vertebra ameliyatları ve bel fıtığı ameliyatları sonrasında, belin desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

N-5A Torako Lumbosacral Ortezi - Uzun

Laminasyon yöntemi ile kaplanmış 0.5 mm kalınlığındaki süngerden imal edilmiş olan TLSO Lumbal, sacral ve Torakal bölgeyi zırh gibi kuşatır. N-5 kodlu ürüne göre daha uzun üretilmiştir. Kaplamada kullanılan kumaş deriyi tahriş etmeyecek şekilde işlenmiş olup welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliği ayar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Vücut anatomisine uygun olarak 7 ayrı boyda üretilen korse giysi içinden görünmemesi için ten rengi olarak imal edilmiştir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır. Önde ve arkada bulunan ceplere yerleştirilen materyalin ısıyla şekil alabilmesi vücuda tam uyumu sağlamaktadır. Yumuşak bir şekilde bükülebilen malzeme önceden şekillendirilmiş olsa da ısı tabancasıyla kolayca modifiye edilebilir. Sıkılık ayarının tam olarak yapılması için 3'ü sağ 3'ü sol tarafta olmak üzere 6 değişik noktadan welcro ayarı bulunmaktadır. Omuz bantları omuzdan, arkada çapraz kesişerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sağlar.

Endikasyon: Omurga bozukluklarında, vertebra kırıklarında, vertebra ameliyatları ve bel fıtığı ameliyatları sonrasında, belin desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.



N-5B Torako Lumbosacral Ortezi - Lüks

Laminasyon yöntemi ile kaplanmış 0.5 mm kalınlığındaki süngerden imal edilmiş olan TLSO Lumbal, sacral ve Torakal bölgeyi zırh gibi kuşatır. Yanlarda kullanılan misinalı elastik kumaş ile cildin havalanması sağlanmıştır. Kaplamada kullanılan kumaş deriyi tahriş etmeyecek şekilde işlenmiş olup welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliği ayar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. adet kullanılan ara bağı ile korsenin yukarıya kayması engellenmiştir. Vücut anatomisine uygun olarak 7 ayrı boyda üretilen korse giysi içinden görünmemesi için ten rengi olarak imal edilmiştir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır. Önde ve arkada bulunan ceplere yerleştirilen materyalin ısıyla şekil alabilmesi vücuda tam uyumu sağlamaktadır. Yumuşak bir şekilde bükülebilen malzeme önceden şekillendirilmiş olsa da ısı tabancasıyla kolayca modifiye edilebilir. Sıkılık ayarının tam olarak yapılması için 3'ü sağ 3'ü sol tarafta olmak üzere 6 değişik noktadan welcro ayarı bulunmaktadır. Omuz bantları omuzdan, arkada çapraz kesişerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sağlar.

Endikasyon: Omurga bozukluklarında, vertebra kırıklarında, vertebra ameliyatları ve bel fıtığı ameliyatları sonrasında, belin desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.



N-9 Göğüs Korsesi - Erkek

Sırta gelen kısmı elastik kumaştan ön kısmı ise hava geçirir, esnek ve yumuşak süngerli kumaştan yapılan korsede birleşme önde erkek welcronun süngerli kumaşın her hangi bir noktasına yapışmasıyla sağlanır. Bay ve bayan modeli olarak yapılan korse-
senin beyaz ve ten rengi mevcuttur.
3 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cot kırıklarında, kalp ameliyatları sonrasında kullanılır.



N-9A Göğüs Korsesi - Bayan

Sırta gelen kısmı elastik kumaştan ön kısmı ise hava geçirir, esnek ve yumuşak süngerli kumaştan yapılan korsede birleşme önde erkek welcronun süngerli kumaşın her hangi bir noktasına yapışmasıyla sağlanır. Bay ve bayan modeli olarak yapılan korse-
nin bayan modelinde ön kısım göğüslerin altından geçecek şekilde daraltılarak yapılmıştır. 3 değişik boyda üretilen korse-
nin beyaz ve ten rengi mevcuttur.

Endikasyon: Cot kırıklarında, kalp ameliyatları sonrasında kullanılır.



N-10 Sacrum Kemer

Sırta gelen kısmı elastik kumaştan ön kısmı ise hava geçirir, esnek ve yumuşak süngerli kumaştan yapılan korsede birleşme önde erkek welcronun süngerli kumaşın her hangi bir noktasına yapışmasıyla sağlanır. Tek boy olarak yapılan korse welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliğinden dolayı tüm bedenlere kolaylıkla uygulanabilmektedir. Önde daralarak gelen dizayn kullanım kolaylığı sağlamaktadır.


Endikasyon: Bel kemiğinin sacrum ve sacro iliac bölgelerine destek ve değişen derecelerde baskı sağlar. Ağır yük taşıyan veya ağır işlerde çalışanlarda tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır.



R-7 Örgü Lumbosacral Korse Silikonlu, Fleksible Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen korse-
nin arka yüksekliği 23 cm'dir. Lumbar ve sacral bölgede bulunan Silikon destek üçgen şeklinde olup hareketlidir. Yanlarda ve arkada bulunan ceplere fleksible balenler yerleştirilmiş olup korse bel ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilmiştir. Önde hastanın kendi kendine korse-
yi takabilmesi için parmak geçme yerleri dikilen korse, Gri renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Akut ve kronik lumbagoda, Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondilozda, Spondilolisthesisde, Operasyon sonrasında kullanılır.

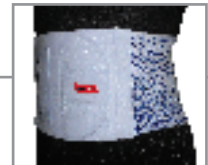



X-17 BW Kemer

27 cm. eninde elastik kumaşın her iki tarafının mavi renk penye kumaşla kaplanmasıyla yapılan korse önde welcro ile kademeli olarak ayarlanmaktadır. 7 değişik boyda üretilmektedir

Endikasyon: Göbek fıtığında ve ameliyat sonrasında kullanılır.

N-17 Stoma Korsesi (Colostomi)

Sırtta gelen kısmı elastik kumaştan olan korsenin ön bölümünde 5 mm'lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaş kullanılır. Süngerli kumaşın welcroya her noktadan yapışabilme özelliği vardır. Süngerli kumaşın üstüne ortasında 1 cm. Çapında delik bulunan plastik dikilmiştir. Hasta kullandığı colostomi torbasının çapına uygun deliği plastik üzerinde kolaylıkla açabilir. Yıkama esnasında yedeğin kullanılabilmesi için ön parçası 2 adet verilen korsenin 4 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Stoma ameliyatlarından sonra kullanılır.



N-23 ALPEREN - LSO

Isıyla şekil alabilen özel malzemeden yapılan korse metal desteklerden %40 daha hafif olup %30 daha incedir. Böylece giysi altında daha rahat kullanılırlar. Kumaş korselere göre daha fazla metal korselere göre ise daha az rijitlik sağlar. Yumuşak bir şekilde bükülebilen malzeme önceden şekillendirilmiş olsa da ısı tabancasıyla kolayca modifiye edilebilirler. Alperen-LSO suya sokulabilir ve hidroterapi sırasında giyilebilir. Metal içermediği için MR ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilir. İçerisinde yer alan ve tespitite kullanılan cırt cırt yapışma özellikli süngerli kumaştan yapılmış parçalar yıkanmak için kolayca yerinden çıkartılabilir.

Endikasyon: Omurga bozukluklarında, vertebra kırıklarında, vertebra ameliyatları ve bel fıtığı ameliyatları sonrasında, belin desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır



N-24 ALPEREN - TLSO (TORAKOLUMBOSACRAL ORTEZİ)

Omurgayı desteklemek için şekil alabilen özel malzemeden yapılan korse metal desteklerden %40 daha hafif olup %30 daha incedir. Böylece giysi altında daha rahat kullanılır. Bantlar omuzları, omuzların ve kolların hareketlerini kısıtlamadan, nefes alıp vermelerde tıkanmaya engel olmadan arkaya doğru çeker. Yumuşak bir şekilde bükülebilen malzeme önceden şekillendirilmiş olsa da kolayca modifiye edilebilir. Destek en uygun şekilde uygulandığında hastanın ağrısını azaltır ve hareketliliğini artırır. Alperen-TLSO suya sokulabilir ve hidroterapi sırasında giyilebilir. İçerisinde yeralan ve tespitite kullanılan cırt cırt yapışma özellikli süngerli kumaştan yapılmış parçaların tamamı yıkanma için kolayca yerinden çıkartılabilir.

Endikasyon: Thoracic ve Lumbar omurgada osteoporotik kemik çöküntülerinde kullanılır

N-26 Sternum Korsesi

Sırtta gelen kısmı elastik kumaştan ön kısmı ise süngerli kumaştan yapılan korsenin koltuk altlarına gelen kısımları oyularak göğüze tam oturması sağlanmıştır. Kullanılan süngerli kumaşa cırt cırt her noktadan yapışabildiğinden geniş bir ayar mekanizması ve kullanım kolaylığı bulunmaktadır. 3 değişik boyda üretilen korsenin beyaz ve ten rengi mevcuttur.

Endikasyon: Sternum ameliyatları ve sternum fraktürleri sonrasında kullanılır.



N-26A Ürostomi Korsesi

Sırtta gelen kısmı elastik kumaştan ön kısmı ise hava geçirir, esnek ve yumuşak süngerli kumaştan yapılan korsede birleşme önde erkek welcronun süngerli kumaşın her hangi bir noktasına yapışmasıyla sağlanır. Stoma Korsesine göre daha küçük çapta 2 adet 1 cm.lik delik açılmış plastik dikilmiştir. 3 değişik boyda üretilen korsenin beyaz ve ten rengi mevcuttur.

Endikasyon: Ürostomi ameliyatları sonrasında kullanılır.





N-27 Abdominal Sargı (Destekli)


Sırta gelen kısmı elastik kumaştan ön kısmı ise hava geçirir, esnek ve yumuşak süngerli kumaştan yapılan korsede birleşme önde erkek welcronun süngerli kumaşın her hangi bir noktasına yapışmasıyla sağlanır. Korsenin üzerinde 5x25 cm. ebadında plastiğin girebileceği süngerli cep bulunur. Ameliyat sonrasında hastanın ameliyat bölgesini koruması için cebe plastik destek yerleştirilir. İstenirse plastik destek çıkartılarak kullanılabilir.

Endikasyon: Cerrahi operasyonlar sonrasında kullanılır.

N-28 Jeweet Hyperextansiyon Korse

Alüminyumdan üretilen korsenin vücuda temas eden kısımlarına cırt cırt yapışabilen süngerli kumaş takılmıştır. Ayar delikleri sayesinde kolaylıkla yükseklik ve genişlik ayarları yapılabilir. Üç nokta prensibine göre tasarlanan korsenin vücuda tam oturması için eğme anahtarlarıyla alüminyumlara istenilen eğim verilebilir.

Endikasyon: Omurga bozukluklarında, vertebra kırıklarında, vertebra ameliyatları ve bel fıtığı ameliyatları sonrasında, belin desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

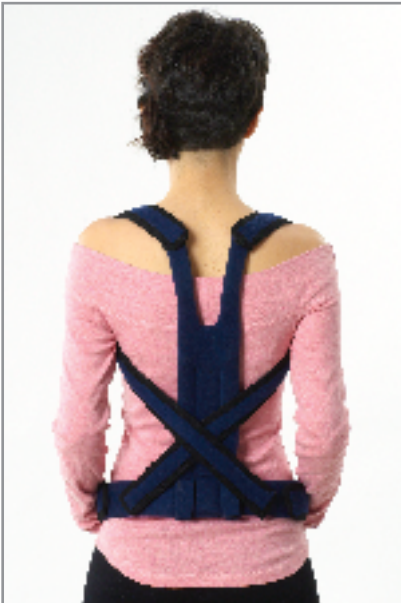

N-28A Taylor Korse

Metalden üretilmiş olup metalin çevresi özel süngerli kumaşla kaplanarak hastanın kolay kullanımı sağlanmıştır. Her noktadan cırt yapışabilen kumaş kademeli ayar imkanı sağlamaktadır. Gövdenin fleksiyon ve ekstansiyon kontrolünü sağlayarak vertebra travmalarında ve post-op dönemde kullanılır.

Endikasyon: Vertebra kırıklarında, Thoraxis vertebra ların AP düzlemindeki kas parazilerinde, beyin felci ve muskuler distrofilerde



N-28B Vitraten Ceket (TLSO)


Vitratenden üretilen korse Lumbal vertebra travmalarında ve post-op dönemde gövdenin fleksiyon, ekstansiyon, lateral tam kontrolünü ve immobilizasyonunu sağlar. Korse dışta welcro bantlarla sabitlenir. Korsenin içi 3 mm. Plastizotla kaplıdır.

Endikasyon: Vertebra kırıklarında kullanılır.

M-1 Elastik Dorsolumbar Korse

Hava geçirgen,terlemeyi önleyici elastik kumaştan yapılan korsenin elastik omuz bantları ekstansiyonun yanı sıra postural destekte sağlar. Arkadan çapraz gelip önde birleştirilen bantlar lumbal bölgeye ekstra destek verir. Önde 2 arkada 4 adet bulunan plastik balenlere istenirse arkada 2 adet ithal çelik yay balen ilave edilerek mükemmel bir stabilite sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak 1071 kodlu ısıtıcı neopren pedle birleştirilerek kullanılabilir. Korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir. Çelik uzunluğu 46 cm'dir.

Endikasyon: Kompresyon kırıklarında,osteoporosis,arthritis,lordosis ve scoliosis gibi maximum spinal kavrama gerektiren durumlarda ve operasyon sonrasında doktor tavsiyesine göre kullanılır.

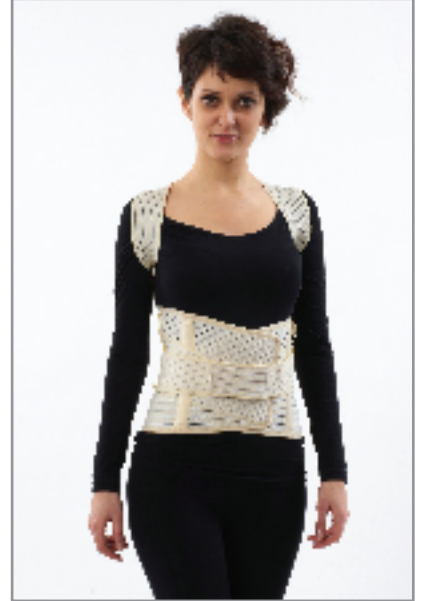

M-1A Elastik Çektirme Bantlı Dorsolumbar Korse

Arka kısmı tamamıyla hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumaştan yapılan korsenin ön kısmında pratik kullanımı, kolay sıkılık ayarını ve rahatlığı sağlamak amacıyla süngerli özel kumaş kullanılmıştır. Sert welcro yapışabilecek şekilde özel dokunmuş kumaşın sünger üzerine laminasyon tekniği ile kaplanmasıyla oluşan süngerli kumaş uzun süre welcroya yapışabilme özelliğine sahiptir. Arkadan gelip önde özel süngerli kumaşın herhangi bir yerine yapışabilen elastik bantlar lumbal bölgeye ekstra destek sağlar. Korsenin elastik omuz bantları ekstansiyonun yanı sıra postural destekte verir. Arkadan çapraz gelip önde birleştirilen bantlar lumbal bölgeye ekstra destek verir. Arkada 4 adet plastik balen sırta ek destek vermektedir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullanılması MR, Tomografi ve Röntgen çekimlerinde korsenin vücuttan çıkarılmadan kullanılabilmesini sağlamaktadır. 5 boyu vardır.

Endikasyon: Kompresyon kırıklarında, osteoporosis, arthritis, lordosis ve scoliosis gibi maximum spinal kavrama gerektiren durumlarda ve operasyon sonrasında doktor tavsiyesine göre kullanılır.





M-2 Elastik Lumbosacral Korse

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumaştan yapılan korsenin sırt yüksekliği 26 cm. ve 32 cm. olan iki ayrı modeli mevcuttur. Arkadan çapraz gelip önde birleştirilen bantlar lumbal bölgeye ekstra destek sağlar. Önde 2 arkada 4 adet bulunan plastik balenlere istenirse arkada 2 adet ithal çelik yay balen ilave edilerek mükemmel bir stabilite sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak 1071 kodlu ısıtıcı Neopren pedle birleştirilerek kullanılabilir. Korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Akut ve kronik lumbagoda, Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondilozda, Spondilolisthesiste, Operasyon sonrasında kullanılır.

M-2A Elastik Çektirme Bantlı LS.

Arka kısmı tamamıyla hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumaştan yapılan korsenin ön kısmında pratik kullanımı, kolay sıkılık ayarını ve rahatlığı sağlamak amacıyla süngerli özel kumaş kullanılmıştır. Sert welcro yapışabilecek şekilde özel dokunmuş kumaşın sünger üzerine laminasyon tekniği ile kaplanmasıyla oluşan süngerli kumaş uzun süre welcroya yapışabilme özelliğine sahiptir. Arkadan gelip önde özel süngerli kumaşın herhangi bir yerine yapışabilen elastik bantlar lumbal bölgeye ekstra destek sağlar. Arkada 4 adet plastik balen sırtta ek destek vermektedir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve Röntgen çekimlerinde korsenin vücuttan çıkarılmadan kullanılabilmesini sağlamaktadır. 5 boyu vardır.

Endikasyon: Bel fıtığında, lumbagoda, vertebranın yükünün azaltılmasının gerektiği durumlarda, sacrum ve sacro iliac bölgelerine destek ve değişen derecelerde baskı yapılması gerektiğinde, bel ve karın desteği gerektiren tüm durumlarda kullanılır.



M-3 Elastik Lumbostat Korse

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumaştan yapılan korsenin sırt yüksekliği 26 cm. olup arkada ve her iki yanda bulunan çapraz bantlarla ekstra destek ve korsenin vücudu tam sarması sağlanmıştır. Omurganın iki yanında bulunan 4 adet balenle omurga desteklenir. İsteğe bağlı olarak 1071 kodlu ısıtıcı neopren pedle birleştirilerek kullanılabilir. Korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Akut ve kronik lumbagoda, siyatikte, bel fıtıklarında, doğum sonrasında, bel operasyonları ve diğer cerrahi operasyonlar sonrasında bel ve karın desteği olarak kullanılır.



M-4 Elastik Abdominal Korse

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici gözenekli elastik kumaştan yapılan korsenin yüksekliği 25 cm.'dir. Welcro bantlarla(cırt cırt) sıkılığı kolaylıkla ayarlanır. Korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Ameliyat sonrasında ve doğum sonrasında kullanılır.



M-5 Elastik Göğüs Korsesi

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici gözenekli elastik kumaştan yapılan korsenin koltuk altlarına gelen kısımları oyularak göğüse tam oturması sağlanmıştır. Welcro bantlarla(cırt cırt) sıkılığı kolaylıkla ayarlanır. Omuzdan gelen kolonlarla korsenin aşağıya kayması engellenir. Korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Cot fraktürlerinde ve ameliyat sonrasında kullanılır.



M-6 Elastik Posturex

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici gözenekli elastik kumaştan yapılan korsenin sırt kısmında iki adet balen bulunur. Koltuk altlarından geçen bantlar arkada çapraz destek olup önde welcro ile birleşir. Korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Duruş bozukluklarında ve vücudun dik durmasında kullanılır. Gençlerde ve masa başında-bilgisayar başında çok oturanlarda görülen postural bozukluklarda yararlıdır.



M-10 Yük Taşıma Korsesi (Siyah)

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumaştan yapılan korsenin yüksekliği 15 cm.dir. Arkada çapraz bulunan bantlar Lumbar bölgeye ekstra destek sağlar. Arkada 4 adet bulunan ceplere plastik balenler yerleştirilmiş olup isteğe bağlı olarak sert desteklerle stabilite artırılabilir. Ayarlı omuz askılarıyla yük taşımının yapılmadığı zamanlarda önden cırt cırt açılarak korsenin vücutta asılı kalması sağlanmaktadır. Korse vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir. Çalışma ortamında kirlenmeden etkilenmemesi için siyah renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Lumbar semptomlarda, iş ilişkili bel rahatsızlıklarından korunmada, bel sakatlıklarını önlemede kullanılır



W-1 Lipo Saction Korset

Karın, kalça, üst bacak ve dizde yapılan liposuction ve kalça kaldırma ameliyatlarından sonraki dönemde kullanılan korset lycra kumaştan üretilmiştir. Bu korsetlerde ameliyattan hemen sonra hastaya kolayca giydirilebilmesi için ayarlı welcro kullanılmıştır. Ameliyattan sonra oluşabilecek ödemli bölgeler iyileştikten sonra korset welcrolar sayesinde küçültülebilir. Korset kasık arası açık olarak üretilir.

ES-01 Estetik Paçalı Korset

Toparlayıcı özellikli ve rahat kullanımlıdır. Giyildiği anda en az bir beden küçültür. %85 Polyamide %15 Elastane kumaştan yapılmıştır. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vardır. 9 boy olarak üretilmektedir.



ES-02 Estetik Takviyeli Paçalı Korset

Özel olarak güçlendirilmiş panelleri ile bel, kalça, karın ve yanlarda tam kontrol sağlar. Ağ kısmında bulunan takviye sayesinde daha rahat kullanılır. Giyildiği anda en az bir beden küçültür. %85 Polyamide %15 Elastane kumaştan yapılmıştır. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vardır. 9 boy olarak üretilmektedir.





ES-03 Estetik Uzun Paçalı (Pantolon) Korse

Göğüs, bel, basen ve kalça kısımlarını form altına alan bir modeldir. İçeriğinde % 85 Polyamide, % 15 Elastane bulunmaktadır. Bel ve karın bölgesinde tam kontrol sağlar. Dikişsiz özelliğinden dolayı kıyafet altında iz belli etmez. Mide, göbek, kalça ve basenlerden diz üzerine kadar vücuttaki her türlü deformasyonu toparlar. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vardır. 9 boy olarak üretilmektedir.



ES-04 Estetik Kısa Paçalı Korse

Güçlendirilmiş panelleri ile kalçalara kalkık ve sıkı bir görünüm sağlar, karın altı bölgelerini toparlar vücudu düz ve pürüzsüz bir görünüme sokar. Giyildiği anda en az bir beden küçültür. %85 Polyamide %15 Elastane kumaştan yapılmıştır. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vardır. 9 boy olarak üretilmektedir.



ES-05 Estetik Külot Korse

Cilde ve vücuda uyumlu, hassas kumaş dokusu ile iz ve kayma yapmayan yüksek kesim külot şeklindedir. %85 Polyamide %15 Elastane kumaştan yapılmıştır. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vardır. 9 boy olarak üretilmektedir.




ES-06 Estetik Skandal (Etek) Korse

Likra'lı kumaş ile vücudu tam saran, özellikle dar giysilerin altında iz yapmayan görünüm için kullanılabilecek bir üründür. %85 Polyamide %15 Elastane kumaştan yapılmıştır.

Basenleri ve kalçayı toparlama özelliğine sahiptir. Özellikle etek ve elbise içinde rahatlıkla kullanılabilir. Bir bedenden fazla küçülterek kıyafetin içinde pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vardır. 9 boy olarak üretilmektedir.

ES-07 Estetik Boy (Gövde) Korse

Göğüs dahil kalça altına kadar olan bölgede toparlama sağlar. Mide, karın ve alt karın bölgesinde, bel kısmında ekstra bir toparlanma sağlar. Kalçayı alt kısmından destekler. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vardır. 9 boy olarak üretilmektedir.

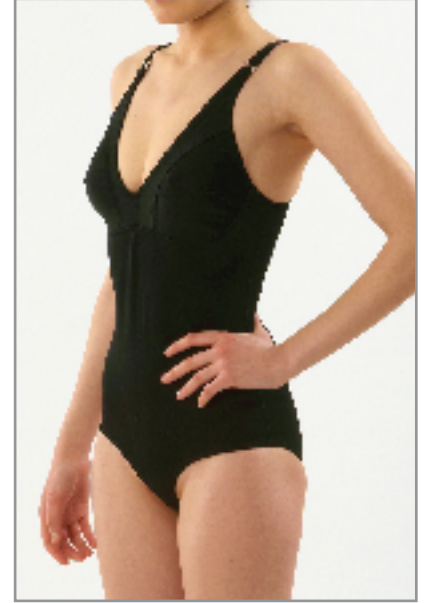

ES-08 Estetik Vücut Korsesi

Göğüs dahil diz kapağına kadar olan bölgede toparlama sağlar. Mide, karın ve alt karın bölgesinde, bel kısmında ekstra bir toparlanma sağlar. Kalçayı alt kısmından destekler. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vardır. 9 boy olarak üretilmektedir.

D-3 Ortopedik Bot ve Ayakkabılar

Hakiki deri ve hakiki kösele kullanılarak cırtlı ve bağcıklı olarak aşağıdaki modellerde yapılan botlarımızın ve ayakkabılarımızın tamamı el işçiliği ile üretilmektedir.



BA-01



BA-05



BA-06



BA-07



BA-08



BA-09

Ters ve kısalık takviyeli botlarımız, hastanın ölçüsüne göre özel olarak üretilmektedir.
Ters botlarımızda çektirme bant bulunmaktadır.



BA-10



BA-11



BA-12



BA-13



BA-14



BA-15

D-4A Ark Takviyesi

Ayak longitudinal arkını desteklemek için 3 boy olarak kauçuktan üretilmiştir. Ayakkabı içine astar altına koyulabilir.



D-5 Topuk İç-Dış Kama

Topuk iç ve dış kenarını desteklemek için 4 boy olarak kauçuktan üretilmiştir. Ayakkabı içine astar altına koyulabilir.




D-6 Boydan İç-Dış Kama

Taban kavisini desteklemek için 6 boy olarak üretilmiş olup ayakkabı içine astar altına yapıştırılır. Pes planusta (düztabanlık) kullanılır.



D-7 Torq - Heel

Tek boy olarak sağ ve solu ayrı yapılan torq-heel her basışta ayağı dışa döndürür. Rotasyon yaptırır. Küçük çocuklarda içe dönük yürümede(Toe-in) kullanılır. Topuğun altı taşlanıp yapıştırıldıktan sonra küçük çivilerle topuğa çakılarak kullanılır.

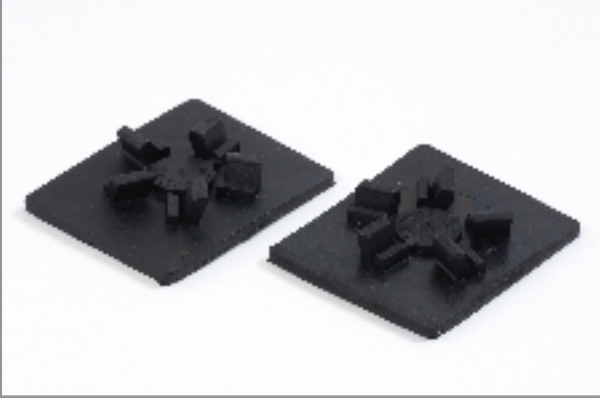

D-8 Vitraten PAFO Gece Ateli

Polipropilenden yapılır. Moldların içi 3 mm. plastizot ile kaplanmış üç noktadan welcro ile ayarlı kapama sağlanmıştır. Tüm modeller ısı tabancasıyla şekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

Endikasyon: Peroneal zayıflıkta, düşük ayak tedavisinde kullanılır.



D-8B Reflex AFO

Polipropilenden yapılan atel ayakkabı içerisine giyilebilecek şekilde üretilmiş, içi plastizot ile kaplanmamış ve üstten tek welcro ile sabitlenmesi sağlanmıştır. Tüm modeller ısı tabancasıyla şekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

Endikasyon: Peroneal zayıflıkta, düşük ayak tedavisinde kullanılır.



D-8C Eklemlı Polietilen Mold (PAFO)

Polipropilenden yapılan atelin içi 3 mm. plastizot ile kaplanmış üç noktadan welcro ile ayarlı kapama sağlanmıştır. Bilekte eklem mevcuttur. Tüm modeller ısı tabancasıyla şekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

Endikasyon: Peroneal zayıflıkta, düşük ayak tedavisinde kullanılır.

D-8D Polietilen Mold Dizüstü PKAFO

Hastaya özel alçı ölçüsüyle polipropilenden yapılan atel kasığa kadar uzanmaktadır. İçerisi 3 mm. Plastizot ile kaplanan atelet diz eklemini sabitlemek için deriden yapılmış diz bandı da isteğe bağlı olarak takılmaktadır. Atelin sabitlenmesi welcro bantlarla yapılmaktadır.



D-8E Dorsifleksör Bandı

Bileğe sarılan hava geçirgen bilek bandajı, ayak tarağına sarılan band ve ayakkabı bağcıkları arasına takılabilen plastik destek olmak üzere toplam 3 parçadan oluşan atelin tüm parçaları toka ile birbirine monte edilebilmektedir. Bantlara tokalar çek-tirme sağlayabilecek sertlikte lastikle bağlanmıştır. Kolaylıkla takıp çıkartılabilen tokalar atelin ev içerisinde ve ev dışarısında kolayca kullanımını sağlar.





D-9 Vitraten Moldet

Bebeklerde kullanılmak üzere yapılan moldun 3 değişik boyu mevcuttur. İçi yumuşak plastizot ile kaplanmış, iki noktadan ayarlı welcro ile kapanması sağlanmıştır.

D-10 Helezon Yay Kısa Cihaz

5 boy olarak özel çelik telden üretilen cihaz ayakkabı altına açılacak üç deliğe vidaların takılmasıyla kolaylıkla uygulanabilir. Ayakkabıya monte edilen parçaya cihaz kolaylıkla takılıp çıkarılabildiğinden cihazın değişik ayakkabılarda kullanımı pratiktir. Çelik tellerin baldıra gelen kısmının welcroyla ayarı mümkün şekilde kapanması sağlanmıştır. Baldıra gelen kısmının yükseklik ayarının mümkün olması ayarı mümkün olmayan modellere göre cihaza kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Endikasyon: Felç sonrası peroneal zayıflıkta, düşük ayak tedavisinde kullanılır.



F-1 Alüminyum Tabanlık

Özel sert alüminyumun şekillendirilmesiyle yapılan tabanlığın üzeri hakiki deri ile kaplanmıştır. 20 ile 44 numara arasında geniş bir ölçü seçeneği mevcuttur.



F-2A Deri Kaplı Plastik Tabanlık

Özel esnek plastiğin şekillendirilmesiyle yapılan tabanlığın üzeri hakiki deri ile kaplanmıştır. 34 ile 44 numara arasında geniş bir ölçü seçeneği mevcuttur.



F-3 Epinli Alüminyum Tabanlık

Alüminyum tabanlığın topuk kısmına ortası delinmiş evazot yapıştırılmış ve üzeri hakiki deri ile kaplanmıştır. 30 ile 44 nolar arasında değişik boylarda üretilir.



F-4 Plexi Tabanlık

Özel esnek plexiden yapılan tabanlık 3/4 tabanlık şeklinde ve ince olup her tür ayakkabı içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. 34-44 numara arasında geniş bir ölçü seçeneği mevcuttur.



F-5 Mantar Tabanlık

Mantarın şekillendirilmesiyle yapılan tabanlıkta uzunluğuna ark ve metatars takviyelerinin universal ölçülerde olması sağlanmış, tabanlığın üstü iyi cins hakiki deri ile kaplanmıştır. 20 ile 44 numara arasında değişik boyları mevcut olup tam tabanlık olması ayakkabı içinde kaymayı engellemektedir.



F-5A Varus Tabanlığı

Mantarın şekillendirilmesiyle yapılan tabanlığın dış kısmında (lateralde) boydan dış kama mevcuttur. Tabanlığın üstü iyi cins hakiki deri ile kaplanmıştır. 20 ile 44 numara arasında değişik boyları mevcut olup tam tabanlık olması ayakkabı içinde kaymayı engellemektedir. Tibiadaki eğriliği düzeltmede ve pes ekino varusta kullanılmaktadır.



F-6 Plastrozat Kaplı Mantar Tabanlık

Mantar tabanlıktan farklı olarak tabanlığın üst kısmı deri yerine daha yumuşak olan ve antibakteriyel özelliği bulunan 3 mm.'lik plastizot ile kaplanmıştır. Yumuşak tabanı dolayısıyla düz tabanlığın yanı sıra nasır vb. ayak rahatsızlıklarında da kullanılabilir. 20 ile 44 numara arasında değişik boyları mevcut olup tam tabanlık olması ayakkabı içinde kaymayı engellemektedir.



F-7 Çelik Tabanlık

Ark takviyesi paslanmaz çelikten presle şekillendirilen ve ilave köprü ile takviyenin deformitesi engellenmiş olan tabanlığın metatars takviyeleri yumuşak kauçuk pedlerle verilmiş, üzeri iyi cins kösele ile kaplanmıştır. 35 ile 44 nolar arasında değişik boylarda üretilmektedir.



G-2 Hallux Walgus Apareyi

Atel Hallux Walgus kemiği çıkıntısında kullanılır. Kemiğin üzerine basınç uygulayıp ittirirken baş parmağı ters basınç uygulayarak çeker. 39 no ya kadar tek boy olarak kullanılan atelin büyük ayaklar için battal boyu mevcuttur. Ayaktayken kullanılmayan atel gece yatarken kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



G-2A Hallux Walgus Makarası

Hallux Walgus kemiği çıkıntısının gündüz tedavisinde kullanılmak üzere üretilen makara kauçuk ve silikon olmak üzere iki çeşittir. İki boy olarak üretilen makara su ile yıkanabilir.





G-2B Bunion Yastığı

Plastizotun şekillendirilmesiyle yapılan yastık Bunion tedavisinde sürtünmeyi önler, tahriş olmuş bölgeyi baskıdan korur. Tek boy olup baş parmağa takılarak kullanılır.

G-2C Hallux Walgus Ateli Süngerli Kumaş

Cırt cırt yapışabilen süngerli özel kumaştan yapılan atel Hallux Walgus kemiği çıkıntısında kullanılır. Yan tarafa dikilmiş cep içerisindeki alüminyum destek kemiğin üzerine basınç uygulayıp ittirirken baş parmağı ters basınç uygulayarak çeker. Kolay ayar mekanizmasından dolayı tek boy olarak üretilmektedir. Sağ sol ayırımı vardır. Lacivert, gri ve ten rengi mevcuttur.



G-2D Elastic Hallux Walgus Ateli

Cırt cırt yapışabilen elastik özel velcrodan yapılan atel Hallux Walgus kemiği çıkıntısında kullanılır. Başparmağı ters basınç uygulayarak çeker. Kolay ayar mekanizmasından dolayı tek boy olarak üretilmektedir. Sağ sol ayırımı vardır. Siyah renktir.

G-3 Metatars Pedi

Metatars kavisinin bozulduğu durumlarda ayağın metatars kavisini oluşturmada kullanılan ped tek boy olarak yapılmıştır. Yumuşak kauçuktan pedin hakiki deri ile kaplanıp elastik bandın kaplama sırasınca takılmasıyla üretilmiştir.



G-3A Metatars Pedi Parmak Geçmeli

Ayak ikinci parmağına takılarak kullanılan ped metatars kavisi oluşturmaya yardımcı olur. Tek boy olarak üretilir. Hakiki deri, ped ve yumuşak plastizotun preslenmesiyle üretilir.



I-1 Epin Yastığı

8 mm. evadan yapılan epin yastığının epin calcanien deliği mevcuttur. Üzeri ithal vinylex ile kaplanan yastığın tabanının tamamı çift tarafı yapışkanlı kağıtla kaplanmıştır. 3 boy olarak üretilir. Topuk dikeninde (epin calcanien) kullanılır



I-1A Epin Yastığı Ekonomik

12 mm. plasztizottan yapılan yastığın delik kısmı çıkartılarak topuk dikeninde, çıkartılmadan topuk düşmesinde kullanılabilir. Önde yer alan çift tarafı yapışkanlı kağıt vasıtasıyla ayakkabıya yapıştırılabilir. 3 değişik ölçüde üretilmektedir.



I-1B Topukluk

12 mm. plastizottan deliksiz olarak yapılan topukluk topuk yastığı olarak kullanılabilir. 3 değişik ölçüde üretilmektedir.



I-1C Kauçuk Epin Yastığı

Poliüretandan yapılan yastık delikli veya deliksiz olarak kullanılabilir. 2 boy olarak üretilmektedir.




G-4 Alçı Topuğu Tekli

Sert kauçuktan tekli ve çiftli olmak üzere iki ayrı modeli olan alçı topuğu alçı uygulaması sırasında kullanılır.



G-5 Alçı Topuğu Çiftli

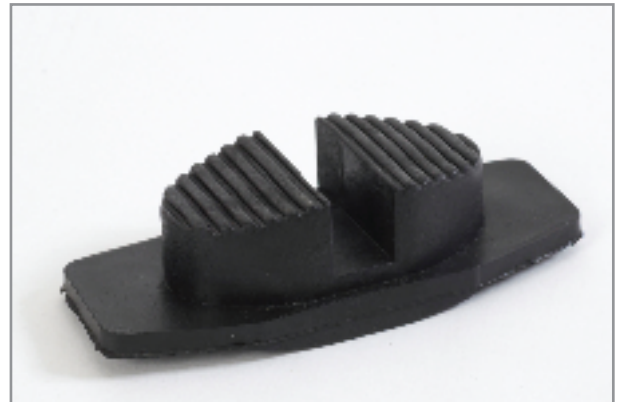

N-12 Posey Footguard (90° Yatak Ateli)

Polipropilenden yapılan atelin içi yıkanabilir, yumuşak peluşla kaplanmıştır. Tek boy olarak yapılan atel bantları ile ayarlanıp welcro ile sabitlenebilir. Sağ ve sol ayakta kullanılabilir. T desteği ile ayağın istenen açıda durmasını sağlar. Ameliyat sonrasında ayağı istenilen istirahat pozisyonunda tutmak için, eskar yaralarının ve felçli hastalarda kullanılabilir.



N-13 Alçı Terliği

Alçılı ayakla yürümeyi kolaylaştırmak, alçı tabanının kirlenmesini ve kaymasını önlemek için kullanılabilen terlik 3 katlı evadan yapılmıştır. Taban bölümünde kaymayı engelleyici şekilli eva kullanılmıştır. Welcro bantların takılı olduğu lastik bantlarla alçı üzerine kolaylıkla giyilebilir. 4 boy olarak üretilmektedir.

N-14 Alçı Botu

Alçı terliğine ilaveten üst kısımda süngerli kumaş kullanılarak alçılı ayağın soğuktan korunması sağlanmıştır. Üstte bulunan iki adet welcrobantla kolaylıkla alçı üzerine giyilip ayarlanabilir. Tek boy olarak arkası ve yanları kapalı bot şeklinde üretilmektedir.



O-29/30/31/32 Alçı Çorabı (Stokinet)

Çorap şeklinde, pamuktan dokunan stokinetin 8, 10, 12, 15 cm. şeklinde eni değişen modelleri mevcuttur.

Alçı uygulanacak bölgeye alçıdan önce giydirilerek vücudu korumada kullanılır. 4 m'lik paketlerde satılır.





B-10 Yün Elastik Ayak Bilekliği

Elastik kumaştan yapılan bilekliğin takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. Önden welcrolarla ayarlanır. Bileklik ayak ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilir.

DD-005 Havalı Ayak Bilekliği

Ayak bileğini desteklemek amacıyla bileğin sağ ve sol tarafına gelen destekler sert plastikten yapılmıştır. Plastiklerin iç kısımları hava tutabilen malzemeyle kaplanmıştır. Tek boy olarak imal edilen bileklik welcrolu ayar mekanizmasıyla sağ sol ayrımı olmadan tüm ayaklara uygulanabilmektedir. Bilekliğin içerisine standart hava takviyesi yapılmış olup isteğe bağlı olarak pompayla üstte bulunan sibobundan hava takviyesi yapılabilir.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında, ayak bileğinin tekrarlayan burkulmalarında ve ameliyat sonrasında koruyucu olarak kullanılır



N-16 Sporcu Ayak Bilekliği

Dış yüzeyleri bileğin anatomik şekline göre şekillendirilmiş forexten yapılan bilekliğin iç kısımları 3 mm. plastizot ile kaplanmıştır. Ayar mekanizması 4 ayrı noktadan destek alan 2 adet welcrobando ile bağlanmış olup tek boy olarak üretilmektedir. Taban kısmında ayak tabanına göre şekillendirilmiş yarım tabanlık bulunduğu için sağ ve sol ayrı modelleri bulunmaktadır.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında, ayak bileğinin tekrarlayan burkulmalarında, spor müsabakalarında ve ameliyat sonrasında koruyucu olarak kullanılır.



N-16B Black Sporcu Ayak Bilekliği

Dış yüzeyleri bileğin anatomik şekline göre şekillendirilmiş sert plastikten yapılan bilekliğin iç kısımları latex ped ile kaplanmıştır. Ürünün sert dış yapısı iyi stabilizasyon yumuşak iç yapısı etkili kompresyon sağlar.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında, ayak bileğinin tekrarlayan burkulmalarında, spor müsabakalarında ve ameliyat sonrasında koruyucu olarak kullanılır.

N-53T Aşıl Botu

Özel tabanı sayesinde fizyolojik yürüyüş sağlayan bot sabit eklemlidir. İçerisinde üç adet topuk yükselticisi bulunmaktadır. Her yükseltici 12,5° açı ayarında immobilizasyon sağlar. Her ayağa uyarlanabilen 3 ölçüsü mevcuttur. Bot içerisinde kullanılan süngerli kumaş ekstra konfor sağlar.

Endikasyon: Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisinde, bağ, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrasında, Ön ve orta ayak Tarsus yaralanmalarında, talus, kalkaneus ve medial malleol kırıklarında, aşıl tendon rüptürünün konservatif veya cerrahi tedavisinden sonra erken fonksiyonel terapide kullanılır.



N-53W Açı Ayarlı Ayak Bilekliği - Rom Walker

Özel tabanı sayesinde fizyolojik yürüyüş sağlayan bot her 10° açı ayarında immobilizasyon sağlar.

Plantar fleksiyon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Dorsifleksiyon: 20°, 10°, 0°

Her ayağa uyarlanabilen 3 ölçüsü mevcuttur. Bot içerisinde kullanılan süngerli kumaş ekstra konfor sağlar.

Endikasyon: Fibula kırıklarının konservatif ve postoperatif tedavisinde, bağ, yumuşak doku ve tendon cerrahisi sonrasında, Ön ve orta ayak Tarsus yaralanmalarında, talus, kalkaneus ve medial malleol kırıklarında kullanılır.



O-10 8 Tipi Ayak Bilekliği

8 cm. eninde elastik banttan yapılan bileklik ayak bileğine sarılıp uçlarında bulunan 5 cm'lik welcronun birbirine yapıştırılmasıyla kullanılır. Ayakkabı içinde rahatlıkla giyilebilir. 5 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Ayak bileği burkulmalarında ve bağ gevşekliğinde kullanılır.

R-5 Örgü Ayak Bilekliği

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen bileklik medial ve lateralde bulunan özel anatomik silikon pedlerle ayak bileğine destek sağlar, ödemi çözer, dolaşımı hızlandırır, ayak bileğine koruma sağlar. Gri renk ve 4 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Akut ve kronik ayak bileği burkulmalarında, ligament instabilitesinde, yumuşak doku travmalarında, spor aktiviteleri sırasında kullanılır.



V-5A Anatomik Elastik Ayak Bilekliği

Bileklikler gipe lastik muz naylondan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Bilekliklere dokuma esnasında bileğin anatomik şekli verilmiş olup topuğa gelen bölge açık bırakılarak topuğun tam oturması sağlanmıştır. Bilek yan bağlarına gelen bölgeye şerit şeklinde sıkı dokuma yapılarak ekstra destek verilmiştir. 4 değişik boyu mevcut olup ten rengidir.

Endikasyon: Bilek burkulmalarında ve lif kopmalarında kullanılır.



V-5B Bağcıklı Ayak Bilekliği

Özel korselik kumaştan yapılan bilekliğin sağ ve sol yanlarına koyulan plastik balenlerle bileği tam kavraması tasarlanmıştır. Önde açılan deliklere kapsül takılmış, kapsüllerden geçirilen bağcıkla geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Beyaz renk olarak 5 değişik boyda üretilmiştir.

Endikasyon: Ayak bileği burkulmalarında, ameliyat ve alçı sonrasında kullanılır.

V-5C Elastik Ayak Bilekliği Yan Destekli

Elastik kumaştan yapılan bilekliğin iki yanına dikilen kolonlar içerisine plastik balen yerleştirilmiştir. Kapama ve ayar mekanizması önde 4 adet welcro ile sağlanmaktadır. 5 değişik boyu olan bilekliğin beyaz ve ten rengi mevcuttur.

Endikasyon: Ayak bileği burkulmalarında, ameliyat ve alçı sonrasında kullanılır.



V-5D Elastik Ayak Bilekliği yan Destekli + 8 Bantlı

Balenli ayak bilekliğine ilaveten 8 şeklinde bileğe sarılan ekstra desteği bulunmaktadır.

Endikasyon: Ayak bileği burkulmalarında, ameliyat ve alçı sonrasında kullanılır.





B-6 Yün Elastik Dirseklik

Elastik kumaştan yapılan dirsekliğin takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Travma ve ameliyat sonrasında ağrıyı azaltmak için kullanılır.

V-5E Elastik Dirseklik

Dirseklik gipe lastik muz naylondan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Dirsekliğe dokuma esnasında dirseğin anatomik şekli verilmiş olup dirseğe gelen bölge açık bırakılarak tam stabilite sağlanmıştır. Dirsek bağlarına gelen bölgeye şerit şeklinde sıkı dokuma yapılarak ekstra destek verilmiştir. 4 değişik boyu mevcut olup ten rengidir.

Endikasyon: Travma ve ameliyat sonrası tahrişlerde kullanılır.



R-6 Örgü Dirseklik Silikonlu

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dirseklik özel anatomik silikon pedle dirseğe destek sağlar. Ödemi çözer, dolaşımı hızlandırır, dirseğe koruma sağlar. 5 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Dirsek travmalarında, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonrası iyileşme sürecinde ve spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.



W-3 Humerus Ateli

Polietilenin iç ve dış yüzeyinin pamuklu kumaşla kaplanmasıyla yapılan atele humerus bölgesine takılmaya uygun şekil verilmiştir. Plastik üzerine açılmış deliklerle cildin hava alması sağlanmış olup 3 noktadan welcro ile kolaylıkla takılabilmektedir. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Humerus kemiği kırıkları ve ameliyatları sonrasında kemiği korumak için kullanılır.

W-3A Polietilen Humerus Ateli

3 mm. kalınlığında Polietilenin ısıyla şekillendirilip iç yüzeyinin 3 mm. kalınlığındaki plastizotla kaplanmasıyla yapılmıştır. 2 noktadan 5 cm.lik welcro ile kolaylıkla takılabilmektedir.

Endikasyon: Humerus kemiği kırıkları ve ameliyatları sonrasında kemiği korumak için kullanılır.



O-16 /O-16W Kol Askısı

Korselik beyaz veya lacivert kumaştan yapılan askı üçgen şeklinde olup kolun tamamını içine alacak şekilde dizayn edilmiştir. Askının tamamını kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sağlamaktadır. Askının tüm çevresi yıpranmayı engellemek için pamuklu dokuma ile kaplanmıştır. Isırgan tokalarla kolaylıkla ayarlanan O-16 modeli ve welcro ile ayarlanabilen O-16W modeli olan askının enseye gelen kısmına hareketli süngerli kumaştan kılıf takılmıştır. 3 boy olarak üretilmektedir.



O-16A Kol Askısı Ekonomik

Beyaz veya lacivert kumaştan yapılan askı; kısa süreli kullanacak hastalar ve düşük fiyat isteyen kişiler göz önüne alınarak tasarlanmıştır. 3 boy olarak üretilmektedir. İsrigen tokalı ve welcrolu modelleri vardır.

O-17 Kol Askısı - Bel Kemerli

Kol askısına ilaveten bel kemeriyle askının sabitlemesi sağlanmıştır. Her iki tarafa takılan ısırgan tokalardan dolayı askı sağ sol ayrımı olmadan her iki kolda da kullanılabilir. 3 boy olarak üretilmektedir.



O-17A Kol Askısı Bel Kemerli - Ekonomik

Ekonomik kol askısına ilaveten bel kemeriyle askının sabitlemesi sağlanmıştır. Her iki tarafa takılan ısırgan tokalardan dolayı askı sağ sol ayrımı olmadan her iki kolda da kullanılabilir. 3 boy olarak üretilmektedir.



X-32 Blue-White Kol Askısı

Korselik kumaşın pamuklu lacivert renk kumaşla kaplanmasıyla üretilmektedir. Beyaz renk askının çabuk kirlendiği durumlarda kullanılması için kir göstermeyen renkte tasarlanmıştır. Askının tamamını kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sağlamaktadır. Askının tüm çevresi yıpranmayı engellemek için pamuklu dokuma ile kaplanmıştır. Isırğan tokalarla veya welcro ile kolaylıkla ayarlanan askının enseye gelen kısmına hareketli süngerli kumaştan kılıf takılmıştır. 3 boy olarak üretilmektedir.

X-32A Blue-White Kol Askısı - Ekonomik

Lacivert renk pamuklu kumaştan üretilmektedir. Beyaz renk askının çabuk kirlendiği durumlarda kullanılması için kir göstermeyen renkte tasarlanmıştır. Askının tamamını kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sağlamaktadır. Askının tüm çevresi yıpranmayı engellemek için pamuklu dokuma ile kaplanmıştır. Isırğan tokalarla veya welcro ile kolaylıkla ayarlanan askı 3 boy olarak üretilmektedir.



X-33 Blue-White Kol Askısı Bel Kemerli

B.W. kol askısına ilaveten bel kemeriyle askının sabitlemesi sağlanmıştır. Her iki tarafa takılan ısırğan tokalardan dolayı askı sağ sol ayrımı olmadan her iki kolda da kullanılabilir. 3 boy olarak üretilmektedir.



X-33A Blue - White Kol Askısı Bel Kemerli - Ekonomik

Lacivert renk pamuklu kumaştan üretilmektedir. Beyaz renk askının çabuk kirlendiği durumlarda kullanılması için kir göstermeyen renkte tasarlanmıştır. Askının tamamını kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sağlamaktadır. Bel kemeriyle askının sabitlemesi sağlanmıştır. Her iki tarafa takılan ısırgan tokalardan dolayı askı sağ sol ayrımı olmadan her iki kolda da kullanılabilir. 3 boy olarak üretilmektedir.



O-7 Tenisci dirsekliği

Dış kısmı polietilenden yapılan atelin iç kısmı 5 mm'lik evazot ile kaplanmıştır. Plastik kısma geçirilen welcrolu kolonla kolay ayar mekanizması sağlanmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Lateral veya medial epikondilitiste kullanılır.



O-25 Clavícula Bandajı

3 cm. kalınlığında süngerin pamuklu kumaşla kaplanmasıyla yapılan bandaja boydan boya kullanılan kolonlarla gerekli sağlamlık verilmiştir. Bandajın uçları çabuk yıpranmayı önlemek için vinylex ile kaplanmış olup uçlarına dikilen ısırgan tokalarla güçlü bir çekirme yapabilme imkanı verilmiştir. Bandaj takılıp ısırgan tokalarla çekirme yapıldıktan sonra üstte yer alan welcrolu ayar mekanizmasıyla ekstra çekirme sağlanabilmektedir. 6 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Clavícula kırıklarında ve duruş bozukluklarında kullanılır.



O-25W Clavícula Bandajı Welcrolu

Süngerin bir yüzünün cırt yapışabilir kumaşla diğer yüzünün havlu kumaşla kaplanmasıyla yapılan bandaja boydan boya kullanılan kolonlarla gerekli sağlamlık verilmiştir. Welcrolarla bandaj güçlü bir çekirme yapabilmektedir. Koltuk altına gelen kısımla

ra süngerli koruyucu kılıf takılarak ekstra konfor sağlanmıştır. Bandaj 5 boy olarak ve siyah renk üretilmektedir.

Endikasyon: Clavícula kırıklarında ve duruş bozukluklarında kullanılır.



O-26 Clavicula Bandajı Ekonomik

0,5 cm. kalınlığında süngerin laminasyon yöntemiyle kumaşla kaplanmasıyla yapılan bandaja boydan boya kullanılan kolonlarla gerekli sağlamlık verilmiştir. Bandajın uçlarına dikilen ısırgan tokalarla güçlü bir çektilme yapabilme imkanı verilmiştir. Ten rengidir. 7 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Clavicula kırıklarında ve duruş bozukluklarında kullanılır.

N-1 Omuz Sabitleyici

Özel Süngerli kumaştı yapılan korsenin kol kısmında bulunan welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilmektedir. Ayrıca arkadan iki noktadan gelen welcrolu kemerlerin öndeki plastik tokalardan dönüp sıkılığı ayarlanarak omuzu tam stabil hale getirmesi sağlanmaktadır. Ten rengi olarak 3 ayrı boyda üretilen korsenin sağ ve sol ayrı modelleri bulunmaktadır.

Endikasyon: Omuz stabilizasyonunda, travma, ameliyat ve fizik tedavi sonrasında kullanılabilir.



O-28 Balkı omuz Tespit Bandajı

Süngerli kumaştı yapılan bandajın önde welcrolarla birleşerek göğüs üzerinde istenilen sıkılıkta kapanması sağlanmaktadır. Humerusa ve el bileğine gelen kısımlarda bulunan bantlarla da kolun vücuda sabitlenmesi yapılmaktadır.

Endikasyon: Kolun ve omuzun tespitinin gerektiği durumlarda, humerus kırıklarında, ameliyat sonrasında kullanılır.



O-33 Süngerli Kol Askısı

0,5 cm süngerin laminasyon yöntemiyle kumaşla kaplanmasıyla oluşan özel süngerli kumaştan yapılan askının iç yüzeyi havlu kumaş ile kaplıdır. Askının tamamını kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sağlamaktadır. Askının tüm çevresi yıpranmayı engellemek için pamuklu dokuma ile kaplanmıştır. Isırgan tokalarla kolaylıkla ayarlanan askının enseye gelen kısmına hareketli süngerli kumaştan kılıf takılmıştır. 3 boy olarak üretilmektedir. Lacivert, gri, siyah ve ten rengi olmak üzere 4 değişik renk alternatifi bulunmaktadır.

O-34 Süngerli Welpo Kol Askısı

Süngerli kol askısına ilaveten bel kemeriyle askının sabitlemesi sağlanmıştır. Her iki tarafa takılan ısırgan tokalardan dolayı askı sağ sol ayrımı olmadan her iki kolda da kullanılabilir. 3 boy olarak üretilmektedir. Lacivert, gri, siyah ve ten rengi olmak üzere 4 değişik renk alternatifi bulunmaktadır.

Endikasyon: Kolun askıya alınması gereken durumlarda ve kırıklarda kolu desteklemek, sabitlemek için kullanılır.



O-35 Welpo Omuz Bandajı

Laminasyon yöntemi ile kaplanmış 0.5 mm kalınlığındaki süngerden imal edilmiş olan bandaj omuzun ve humerusun tam stabilizasyonunu sağlar. Kaplamada kullanılan kumaş deriyi tahriş etmeyecek şekilde işlenmiş olup welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliği ayar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Göğse sarılan bantla ekstra stabilizasyon sağlar. Tek boy olarak üretilen bandajın Lacivert, Gri ve Ten rengi bulunmaktadır. Madeni materyal içermediğinden MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilir.

Endikasyon: Omuz immobilizasyonunda, ameliyat sonrasında, kolun ve omuzun tespitinin gerektiği durumlarda kullanılır.





O-36 Süngerli ve Welcrolu Kol Askısı

Özel süngerli kumaştan yapılan askının dış yüzeyi welcroya her noktadan yapışabilen kumaşla, iç yüzeyi ise havlu kumaşla kaplanmıştır. Askının tüm parçaları çıkarılabildiğinden ve welcro kumaşın her noktasına yapışabildiğinden çocuk-büyük herkese tek boy rahatlıkla ayarlanabilmektedir. Madeni materyal içermediğinden MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilir. Lacivert, gri ve ten rengi bulunmaktadır.

Endikasyon: Omuzun ve Kolun askıya alınması gereken durumlarda, kırıklarda kolu desteklemek, sabitlemek için kullanılır.

O-37 Clavicula Bandajı

1 cm kalınlığında süngerin laminasyon yöntemiyle kumaşla kaplanmasıyla yapılan bandaja boydan boya kullanılan kolonlarla gerekli sağlamlık verilmiştir. 4 noktadan plastik tokalara bağlanan welcrolu kolonlarla gerekli çekme ayarı yapılabilir. Ten rengidir. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Clavicula kırıklarında ve duruş bozukluklarında kullanılır.



O-38 Pratik Clavicula Bandajı

Özel olarak dokunmuş 6 cm enindeki ten rengi elastik banttan yapılan bandaj iki parçadan oluşmaktadır. Sağ ve sol kola takılan parçalar sırtta çapraz gelip önde welcrolar ile birleştirilmektedir.

Endikasyon: Clavicula kırıklarında omuzun geriye çektilmesi ve stabil kalması için kullanılır. Oturuş ve duruş bozukluklarından dolayı özellikle gençlerde görülen postural bozukluklarda yararlıdır. Bilgisayar karşısında ve masa başında çalışan kişilerde sıkça görülen duruş bozukluklarında ve vücudun dik durmasında da kullanılır.



O-39 Pratik Kol Askısı

Özel olarak dokunmuş sağlam mavi renk kolondan yapılan askının enseye gelen kısmına tahrişi önlemek için süngerli kumaş kılıf olarak geçirilmiştir. Kolonun bir ucuna koyulan metal toka ile tek boy olarak imal edilen kol askısının çocuk-büyük herkese uygun olması sağlanmıştır.

Endikasyon: Kolun askıya alınması gereken durumlarda ve özellikle alçıya alınmış kolu desteklemek için kullanılır.

O-40 Akromia Clavicular Bandaj

0,5 cm. kalınlığında süngerin laminasyon yöntemiyle kumaşla kaplanmasıyla yapılan bandajın her noktadan welcroya yapışabilme özelliği vardır. Welcrolar ve tokalar vasıtasıyla gerekli pozisyon kolaylıkla sağlanabilir. Sağ ve solu ayrı olan bandaj tek boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Akromia clavicular eklem rahatsızlıklarında kullanılır.



O-42 Yastıklı Kol Askısı 30°

Süngerli ve welcrolu kol askısına ilaveten bele oturan ve kolu 30 derecede tutan sünger yastık ilavesi vardır. Bele welcrolu bantlar sayesinde sabitlenen yastık üzerine çift taraflı dikilmiş welcro ile askının takılması sağlanmaktadır. Tek boy olarak üretilen askının Lacivert, gri ve ten rengi bulunmaktadır.

Endikasyon: Ameliyat sonrası Omuzun immobilizasyonunda kullanılır.



O-43 Yastıklı Kol Askısı 45-60°

Süngerli ve welcrolu kol askısına ilaveten bele oturan ve kolu bir yüzü 45 derecede, diğer yüzü 60 derecede tutan sünger yastık ilavesi vardır. Bele welcrolu bantlar sayesinde sabitlenen yastık üzerine çift taraflı dikilmiş welcro ile askının takılması sağlanmaktadır. Tek boy olarak üretilen askının Lacivert, Gri ve Ten rengi bulunmaktadır.

Endikasyon: Ameliyat sonrası Omuzun immobilizasyonunda kullanılır.

O-44 Fileli Kol Askısı

Sıcak bölgelerde kullanılmak üzere delikli fileli kumaştan tasarlanan askı kolun hava almasını sağlamaktadır. 3 boy olarak üretilen askının beyaz ve siyah rengi bulunmaktadır.



O-51 Kot Kol Askısı

Denim kumaştan yapılan askı üçgen şeklinde olup kolun tamamını içine alacak şekilde dizayn edilmiştir. Askının tamamını kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sağlamaktadır. Askının tüm çevresi yıpranmayı engellemek için pamuklu dokuma ile kaplanmıştır. Isırgan tokalarla kolaylıkla ayarlanan askının enseye gelen kısmına hareketli süngerli kumaştan kılıf takılmıştır. 3 boy olarak üretilmektedir.



K-12 Airy Kol Askısı

Delikli özel süngerli kumaştan yapılan askının tüm çevresi yıpranmayı engellemek için pamuklu dokuma ile kaplanmıştır. Plastik tokalarla kolaylıkla ayarlanan askının enseye gelen kısmına hareketli süngerli kumaştan kılıf takılmıştır. 3 boy olarak siyah renk üretilmektedir.

Endikasyon: Kolun askıya alınması gereken durumlarda ve kırıklarda kolu desteklemek, sabitlemek için kullanılır.

K-13 Airy Welpo Kol Askısı

Delikli özel süngerli kumaştan yapılan askının tüm çevresi yıpranmayı engellemek için pamuklu dokuma ile kaplanmıştır. Plastik tokalarla kolaylıkla ayarlanan askının enseye gelen kısmına hareketli süngerli kumaştan kılıf takılmıştır. Kolu sabitlemek için bele sarılan kolon plastik tokalara girmektedir. Toka çift taraflı dikildiğinden sağ sol ayırımı yoktur. 3 boy olarak siyah renk üretilmektedir.

Endikasyon: Kolun askıya alınması gereken durumlarda ve kırıklarda kolu desteklemek, sabitlemek için kullanılır.



O-53 Kol Elavasyon Ortezi

Yetişkinlerde kolu 90° de sabitlemek için kullanılan ortez plastik ve metal desteklerden oluşmaktadır. Yükseklik ayarı yapılabilen ortezin Welcro ile geniş bir ayar mekanizması bulunmaktadır.







N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

Laminasyon tekniği ile kaplanmış 1 cm'lik özel süngerli kumaştan yapılan dizliğin sağ ve sol yanlarında 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerleştirilmiş sert alüminyum balenler bulunmaktadır. Balenlere dizin anatomik şekli verilmiş olup isteğe göre ayar yapılması mümkündür.

Dizliğin iç kısmı pamuklu havlu kumaşla kaplanmıştır. Patella altından iki patella üstünden iki olmak üzere toplam dört noktadan welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilir. Geniş ayar mekanizması sebebiyle her kalınlıktaki bacağı uyum sağlayabilen dizliğin 45-50-55-60 cm. olmak üzere yüksekliği farklı 4 modeli mevcuttur. Gri, lacivert ve ten rengi olmak üzere 3 ayrı renk alternatifi bulunmaktadır.

Endikasyon: Bacak ve diz için değişebilen derecelerde destek ve düzeltme imkanı sağlar. Bacağı ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullanılır.

N-3A Diz Sabitleyici 3 Panelli

Laminasyon tekniği ile kaplanmış 1 cm'lik özel süngerli kumaştan yapılan dizlik 3 ayrı parçadan oluşmaktadır. Diz arkasına gelen parçaya sağ ve sol yanlara takılan parçalar welcro ile monte edilmektedir. Dış yüzeyi her noktadan welcroya yapışan kumaşla kaplandığından parçalar istenilen noktadan kolaylıkla birleştirilebilmektedir. İç yüzey ise terlemeyi önleyici pamuklu havlu kumaşla kaplanmıştır. Dizliğin sağ, sol ve arka yanlarında 1'er adet cep içine yerleştirilmiş sert alüminyum balenler bulunmaktadır. Balenlere dizin anatomik şekli verilmiş olup isteğe göre ayar yapılması mümkündür. Patella altından iki patella üstünden iki olmak üzere toplam dört noktadan welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilir. Geniş ayar mekanizması sebebiyle her kalınlıktaki bacağı uyum sağlayabilen dizliğin 45-50-55-60 cm. olmak üzere yüksekliği farklı 4 modeli mevcuttur. Gri, lacivert ve ten rengi olmak üzere 3 ayrı renk alternatifi bulunmaktadır.

Endikasyon: Bacak ve diz için değişebilen derecelerde destek ve düzeltme imkanı sağlar. Bacağı ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullanılır.



N-6 Kalça Sabitleyici

Özel süngerli kumaştan yapılan sabitleyicinin baldır ve bel kısmında welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilir. Ten rengi yapılan sabitleyicinin 5 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Operasyon sonrasında kullanılır.





N-6B Kalça Sabitleyici - balenli

Özel süngerli kumaştan yapılan sabitleyicinin baldır ve bel kısmında welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilir. Kalça sabitleyicinin üzerine dikilen ceplere yerleştirilmiş balenler ekstra destek sağlamaktadır. Ten rengi yapılan sabitleyicinin 5 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Operasyon sonrasında kullanılır.

N-6C Kalça Sabitleyici Açı Ayarlı

Bele ve baldıra kolaylıkla bağlanabilen ortez 0-110° ayarlabilen fleksiyon ve 0-90° ayarlanabilen Ekstansiyon ayarlarına sahiptir. Pratik, pimsiz kademeli açı ayarı mekanizması ve kısayıp uzama imkanı kolay kullanım sağlar. Tek boy olarak üretilen ortezin sağ ve sol modelleri mevcuttur.

Endikasyon: Kalça ve Femur operasyonları sonrasında kullanılır.



N-58 Atroskopi Dizliği - Açı Ayarlı

Sağ ve sol iki ayrı parçadan oluşan dizliğin kademeli yükseklik ayarı sayesinde 50-60 cm arasında yüksekliği ayarlanabilmektedir. Geniş ayar mekanizması bulunduğu genişliği her bedene olabilmektedir. Üst baldırda 2 alt baldırda 3 olmak üzere toplam 5 noktadan welcroyla sabitleme yapılmaktadır. Dizliğin alt ve üst baldır sabitlenen plastik kısımlarına süngerli özel kumaşla ekstra konfor sağlanmıştır. Kolaylıkla ayarlanabilen açı ayar mekanizmasında 0-15-30-45-60-75-90-105 derece Fleksiyon, -15-0-15-30-45-60-75-90 derece Ekstansiyon ayarı mümkündür.

Endikasyon: Atroskopi ameliyatı sonrasında, içten dışa ve dıştan içe çekirme gerektiğinde, iç, dış ve çapraz bağ lezyonlarında, patella ve femur travmalarında, diz ekleminin yükünün azaltılması gerektiği durumlarda kullanılır.



N-58A Açı Ayarlı Dizlik - Uzun

Sağ ve sol iki ayrı parçadan oluşan dizlik 65 cm boyunda olup genişliği her bedene olabilmektedir. Dizliğin yüksekliğinin üst ve alt parçalar çıkarılarak 47 cm' e kadar indirilmesi mümkündür. Üst baldırda 2 alt baldırda 2 olmak üzere toplam 4 noktadan welcroyla sabitleme yapılmaktadır. İç kısımları 1cm'lik süngerli kumaşla kaplanmıştır. Metalden yapılan açı ayar mekanizması dize 15'er derecelik açılarla ayar imkânı vermektedir. Dizin istenilen açılarda fleksiyonunu ve ekstansiyonunu sağlar. Dizlik istenilen açıda sabitlenebilmektedir.

Ekstansiyon açıları: -15-0-15-30-45-60-75-90 derece

Fleksiyon açıları: 0-15-30-45-60-75-90-105-120 derece

Endikasyon: Dizin istenilen açıda ekstansiyonunu ve fleksiyonunu sağlamada, Atrosvopi ameliyatı sonrasında, iç, dış ve çapraz bağ lezyonlarında, patella ve femur travmalarında, diz ekleminin yükünün azaltılması gerektiği durumlarda kullanılır.

B-5 Yün Elastik Dizlik

Elastik kumaştan yapılan dizliğin takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. Dizlik, diz anatomisine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Tüm diz ağrılarında,romatizma ve siyatikte, dizin sıcak tutulması gerektiği durumlarda kullanılır.





B-7 Yün Elastik Baldırlık

Elastik kumaştan yapılan baldırlığın takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. Baldırlık vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 6 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Romatizma ve siyatikte, baldırın sıcak tutulması gerektiği durumlarda kullanılır.

V-4A Anatomik Elastik Dizlik

Dizlikler gipe lastik muz naylondan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Dizliklere dokuma esnasında dizin anatomik şekli verilmiştir. Dizin arka kısmına gelen bölge gevşek dokuma yapılarak dizin rahat hareket etmesi ve rahatsız olmaması sağlanmıştır. Diz yan bağlarına gelen bölgeye şerit şeklinde sıkı dokuma yapılarak ekstra destek sağlanmıştır. 4 değişik boyu mevcut olup ten rengidir.

Endikasyon: Diz burkulmalarında ve lif kopmalarında, travma ve operasyon sonrasında, spor aktivitelerinde kullanılır



X-22 BW. Dizlik

Elastik pamuklu kumaşın içinin ve dışının pamuklu penye ile kaplanmasıyla yapılan dizliğin tüm kenarları kıvrıma lastik ile kaplanmıştır. Bağlantı ve sıkılık ayarı arkaya sıralanmış welcrolarla yapılmaktadır. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Diz burkulmalarında ve lif kopmalarında, travma ve operasyon sonrasında, spor aktivitelerinde kullanılır.



X-23 BW. Dizlik - Patella Açık Balenli

Elastik pamuklu kumaşın içinin ve dışının pamuklu penye ile kaplanmasıyla yapılan dizliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Dizliğin patellaya gelen kısmına yuvarlak olarak delik açılmış, deliğin kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Dizliğin sağ ve sol yanlarında kolon içerisine yerleştirilmiş plastik balenler bulunmaktadır. Patella altından iki patella üstünden iki olmak üzere toplam dört noktadan welcrolu kolonlarla ayarlanabilmektedir. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Diz iç ve dış bağ lezyonlarında, Lateral ve medial bağların ve de patellanın desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

X-24 BW. Dizlik - Patella Açık Mafsallı

Balenli dizlikten farklı olarak yanlarda plastik balen yerine metalden presle şekillendirilmiş menteşeler bulunmaktadır. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Diz iç ve dış bağ lezyonlarında, diz travmalarında, diz ekleminin yükünü azaltmak ve desteklemek için kullanılır.



X-25 BW. Dizlik - Patella Açık

Elastik pamuklu kumaşın içinin ve dışının pamuklu penye ile kaplanmasıyla yapılan dizliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Dizliğin patellaya gelen kısmına yuvarlak olarak delik açılmış, deliğin kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Bağlantı ve sıklık ayarı arkaya sıralanmış welcrolarla yapılmaktadır. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Diz kapağı rahatsızlıklarında ve diz kapağı tendinitisinde kullanılır.



X-45 BW. Dizlik Açı Ayarlı

Elastik pamuklu kumaşın içinin ve dışının pamuklu penye ile kaplanmasıyla yapılan dizliğin tüm kenarları ve patella kısmı kıvrırma lastikle kaplanmıştır. Üst baldırda 2 alt baldırda 2 olmak üzere toplam 4 noktadan welcroyla sabitleme yapılmaktadır. Kırılmaz sert plastikten yapılan açı ayar mekanizması dize 10'ar derecelik açılarla ayar imkanı vermektedir. Dizin istenilen açılarda fleksiyonunu ve ekstansiyonunu sağlar. Dizlik istenilen açıda sabitlenebilmektedir. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Dizin istenilen açıda ekstansiyonunu ve fleksiyonunu sağlamada, Artroskopi ameliyatı sonrasında, iç, dış ve çapraz bağ lezyonlarında, patella ve femur travmalarında, diz ekleminin yükünün azaltılması gerektiği durumlarda kullanılır.

R-1 Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizlik dikişsiz ve eksizdir. Dizliğin yüksekliği 28 cm dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sağlar. Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerleştirilmiş olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizlik diz ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır.



R-2 Welcrolu Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizlik dikişsiz ve eksizdir. Dizliğin üst ve alt uçlarında yer alan welcrobantlar dizin çevresinde dönerek sabitlendiğinden dizliğin stabilitesini arttırmaktadır. Dizliğin yüksekliği 28 cm dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sağlar. Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerleştirilmiş olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizlik diz ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır





R-3 Kalın Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizliğin yüksekliği 28 cm dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sağlar. Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerleştirilmiş olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizliğin iç kısımlarına yerleştirilmiş silikon bantlar dizliğin kaymasını engeller. Dizlik diz ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 4 değişik ölçüde imal edilir. Gri renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuvar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır.

R-4 Welcrolu Kalın Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen Dizliğin yüksekliği 28 cm.dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sağlar. Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerleştirilmiş olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizliğin üst ve alt taraflarında bulunan elastik bantlar dizi çepeçevre sararak ekstra destek sağlar. Dizliğin iç kısımlarına yerleştirilmiş silikon bantlar dizliğin kaymasını engeller. Dizlik diz ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 4 değişik ölçüde imal edilir. Gri renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuvar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır.



O-1 /2/3/4/5/5A Elastik Bandaj

Uzunluğu gevşekken 2 mt. esnediğinde 5 mt. civarında olup hareket kabiliyetini tamamen kısıtlamadan burkulmalar ve travmalarda etkili destek sağlar. El ve ayak bileğinde, dizde, dirsekte ve diğer organların tespitinde sarılarak kullanılır. Metal klipsleriyle sabitlenir. 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm ebatlarında bulunur.



Endikasyon: Ortopedik ve Cerrahi tedavilerde, kırık-çıkık ve burkulmaların sargılanmasında, adale yırtılmalarında, lif kopmalarında, varis ve varis ülserlerinin tedavisinde, sportif travmalarda kullanılır.





O-6 El Bilekliği

8 cm. eninde özel dokunmuş elastik banttan yapılan bilekliği bir ucu üçgen şeklinde kıvrılarak dikilmiş ve ucuna welcro monte edilerek geniş bir ayar mekanizmasıyla istenilen kompresin verilmesi sağlanmıştır. 5 ayrı boyu mevcuttur.

Endikasyon: Bilek travmalarında, burkulma ve bilek ağrılarında, spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.

O-11 El Bilek Ateli

Elastik kumaştan üretilen atelin 4 değişik noktadan welcro ile ayarlanması mümkündür. Eli istirahat pozisyonunda tutabilmek için kalıplarla gerekli şekil verilmiş alüminyum destekler atelin alt kısmındaki cebe yerleştirilmiştir. Desteklere Uzmanın isteğine bağlı olarak kolaylıkla şekil verilebilir. 5 ayrı boyu olan atelin sağ ve solu vardır.

Endikasyon: El-bilek travmalarında, burkulma, incinme ve ameliyat sonrasında eli istirahat pozisyonunda tutmak için kullanılır.



O-11A El Bilek Ateli Anatolik

Parmak geçmeli olan atel, el bilek atelinden farklı olarak bileğe atelin tam olarak oturması için anatomik yapıya uygun olarak tasarlanmıştır. 5 ayrı boyu olan atelin sağ ve solu vardır.

Endikasyon: El-bilek travmalarında, burkulma, incinme ve ameliyat sonrasında eli istirahat pozisyonunda tutmak için kullanılır.



O-11B El Bilek Ateli Baş Parmak Tespitli

Eli istirahat pozisyonunda tutan atele ilave olarak baş parmağında sabitlemek için baş parmak desteği koyulmuştur. Baş parmağın yanında bulunan alüminyum balene şekil verilerek tam stabilizasyon sağlanır. 5 ayrı boyu olan atelin sağ ve solu vardır.

Endikasyon: Bileğin ve baş parmağın istirahata alınması gerekli durumlarda kullanılır.

O-11C El Bilek Ateli + Bileklikli

Özel olarak dokunmuş ten rengi elastik kumaştan yapılan atele, bilek çevresinden dolanan elastik bantla ekstra destek sağlanmıştır. Atelin 5 ayrı boyu, sağ ve sol modeli mevcuttur.

Endikasyon: El-bilek travmalarında, burkulma, incinme ve ameliyat sonrasında eli istirahat pozisyonunda tutmak için kullanılır.



Parmak - El Bilek Ortez ve Atelleri



O-11R Rijid El Bilek Ateli

El bilek anatomisine uygun olarak özel süngerli kumaştan kesilen atelin kapanması üç noktadan welcro ile yapılmaktadır. Welcrolar plastik tokalardan dönerek çekirtme yaparak atelin bileğe tam oturmasını sağlamaktadır. Elin üstüne gelen kısma 2 adet plastik balen koyularak ekstra destek sağlanmıştır. Kalıplarla standart şekil verilmiş alüminyum destek cep içerisine yerleştirilmiştir. El bileğini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Lacivert ve ten rengi olarak 4 ayrı boyda üretilmiştir. Sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği burkulma ve ağrılarında, kas ve bağ zorlanmalarında, Carpal Tünel Sendromunda, Operasyon sonrasında kullanılır.



K-11 Airy El Bilek Ateli

El bilek anatomisine uygun olarak delikli özel süngerli kumaştan kesilen atelin kapanması iki noktadan welcro ile yapılmaktadır. Atele bilek kısmından boydan boya saran welcro bantla ekstra destek verilmiştir. Welcrolar plastik tokalardan dönerek çekirme yaparak atelin bileğe tam oturmasını sağlamaktadır. Kalıplarla standart şekil verilmiş alüminyum destek cep içerisine yerleştirilmiştir. El bileğini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 3 ayrı boyda üretilmiştir. Sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği burkulma ve ağrılarında, kas ve bağ zorlanmalarında, Carpal Tünel Sendromunda, Operasyon sonrasında kullanılır.

K-11A Airy El Bilek Ateli Başparmak Tespitli

Delikli özel süngerli kumaştan hem el-bileği hem de başparmağı immobilize edecek şekilde tasarlanmıştır. Başparmağı da kaplamaktadır. El bileği istirahat pozisyonunda tutmak için alttan, parmağı istirahat pozisyonunda tutmak için yandan cepler içerisine alüminyum destekler yerleştirilmiştir. Siyah renk olarak 3 ayrı boyda üretilmiştir. Sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği ve başparmak kas ve bağ zorlanmalarında, De Quervien tendinitinde, Carpal Tünel sendromunda, Operasyon sonrasında, kas zayıflığı ve spastisite nedeniyle el bileği ve başparmak kontraktürlerini önlemek amacıyla kullanılır.



M-7 Elastik El Bilek Ateli

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumaştan üretilen atelin 4 değişik noktadan welcro ile ayarlanması mümkündür. Eli istirahat pozisyonunda tutabilmek için kalıplarla gerekli şekil verilmiş alüminyum destekler atelin alt kısmındaki cebe yerleştirilmiştir. Desteklere Uzmanın isteğine bağlı olarak kolaylıkla şekil verilebilir. 5 ayrı boyu olan atelin sağ ve solu vardır.

Endikasyon: El-bilek travmalarında, burkulma, incinme ve ameliyat sonrasında eli istirahat pozisyonunda tutmak için kullanılır



M-8 Elastik El Bilekliği

8 cm. eninde özel dokunmuş hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik banttıan yapılan bilekliğiñ bir ucu üçgen şeklinde kıvrılarak dikilmiş ve ucuna welcro monte edilerek geniş bir ayar mekanizmasıyla istenilen kompresin verilmesi sağlanmıştır. 5 ayrı boyu mevcuttur.

Endikasyon: Bilek travmalarında, burkulma ve bilek ağrılarında, spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.

O-12 Ön Kol Ateli

27 cm. elastik kumaştıan yapılan ön kol ateli el bilek atellerinden yaklaşık 10 cm. daha uzun olup ön kol bölgesini de kaplar. Parmak geçmeli ve parmak geçmesiz iki ayrı modeli olan atelin 5 ayrı boyu ,sağı ve solu vardır.

Endikasyon: Ön kol ve el-bilek travmalarında, ön kol istirahatını gerektiren durumlarda kullanılır.



O-13 Dinamik Atel

2 mm. Kalınlığında sert alüminyumdan yapılan atel bilek eklemlidir. Bilek eklemine takılan sert lastikle bilek egzersizi sağlanmaktadır. Elin üst tarafına gelen bölgeye 4 adet çelik telden yaylar takılmış, yayların parmak ucuna gelecek kısmına deriden parmak kılıfları monte edilmiştir. Baş parmağına takılacak çelik tel yandan gelmektedir. Çelik teller kolaylıkla kıvrılarak hastanın parmaklarına adapte edilebilir. İçi ve dışı tamamen 3 mm. plastizotla kaplanan atelin sağ ve sol modeli, bayan ve erkek boyu vardır.



Endikasyon: Ameliyat sonrasında, felçli hastalarda ve Fizik Tedavide parmak kaslarını geliştirmek için kullanılır.



O-14 Statik Atel

Alüminyumdan ve Vitratenden iki ayrı modeli olan atelin iç yüzeyleri tamamen 3 mm. Plastizot ile kaplanmaktadır. Bağlantı üç ayrı noktadan welcro ile sağlanmaktadır. Atelin sağ ve sol modeli, bayan ve erkek boyu vardır.

Endikasyon: Felçli hastalarda, el-bilek rahatsızlıklarında, alçı sonrasında ve elin istirahat pozisyonunda kalmasının gerektiği durumlarda kullanılır.

O-21 Alüminyum Parmak Ateli

1 mm. kalınlığında 2 cm. eninde kesilmiş ve tüm kenarları yuvarlatılmış alüminyumdan yapılan atelin içi 3 mm'lik ithal plastizotla kaplanmıştır. 25 ve 33cm. olmak üzere iki farklı uzunlukta üretilmektedir.

Endikasyon: Parmak kırıkları ve deformitesinde parmağı tespit etmek için kullanılır.



O-22 Alüminyum Parmak Ateli T Tipi

1 mm. kalınlığında 2 cm. eninde kesilmiş ve tüm kenarları yuvarlatılmış alüminyumdan yapılan atelin içi 3 mm.lik ithal plastizotla kaplanmıştır. T atelinde bilekten tespit ilavesi bulunmaktadır. 33 cm. olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Parmak kırıkları ve deformitesinde parmağı tespit etmek için kullanılır.



O-23 Alüminyum Parmak Ateli Bileklikli

Alüminyum parmak atelinin bileğe kolaylıkla tespit edilebilmesi için atelin takılacağı bir cebi olan el bilekliği ilavesi vardır. Bileklik 5 boy, atel 33 cm. uzunluğundadır.

Endikasyon: Parmak kırıkları ve deformitesinde parmağı tespit etmek için kullanılır.

O-24 Mollet Finger

Özel plastikten kalıplar ile üretilmiş olup 8 değişik boyu bulunmaktadır. Atelin üzerinde hava delikleri bulunmakta olup tırnak kısmı açıktır.

Endikasyon: Parmak kırıklarında, ekstansör tendon kopukluklarında ve mollet parmak deformitesinde kullanılır.



O-41 Parmak Splintleri

Alüminyumdan presle basılarak yapılan atellerin içi süngerle kaplıdır. Bant kullanmadan kolayca tespit imkanı vardır. Her atelin 3 ayrı boyu mevcuttur.

Endikasyon: Parmak kırıkları ve deformitesinde, spor yaralanmalarında parmağı tespit etmek için kullanılır.



Beyzbol Splinti

Dörtlü Splint

Kurbağa Splinti

İkili Splint



O-50 Dinamik Parmak Splinti

Paslanmaz çelik yaydan yapılmıştır. Parmağa temas eden noktalar kenarları yuvarlanmış özel plastiktendir. 2 boy olarak üretilmektedir. Yayın orta noktası vida ile diğer uç noktaları paslanmaz rivetle plastiklere monte edilmiştir. Tendon kesilerinde, sinir yaralanmalarında kullanılır.



N-11 Uzun Opponens El Splinti

Özel olarak dokunmuş ten rengi elastik kumaştan yapılan atel el bilek-baş parmak anatomisine uygun olarak tasarlanmıştır. Avuç içine gelen kısma hakiki deriden cep dikilmiş, cebin içerisine şekil verilebilir alüminyum destek yerleştirilmiştir. Baş parmağın olduğu bölgeye kalp şeklinde dikilen cebin içerisine plastik destek koyularak baş parmağın kolaylıkla sabitlenmesi sağlanmıştır. Atelin 5 ayrı boyu, sağ ve sol modeli mevcuttur.

Endikasyon: Alçı ve ameliyat sonrasında, Dekuarven ve karpel tüneli rahatsızlıklarında, bileğin ve baş parmağın istirahata alınması gerekli durumlarda kullanılır.



X-5 El Baş Parmak Tespit Ateli

Elastik kumaşın pamuklu penyeyle kaplanmasıyla yapılan atel baş parmağın anatomik şekline göre tasarlanmıştır. Baş parmağın yan tarafına dikilen cep içine isteğe bağlı olarak yumuşak şekil verilebilir alüminyum destek koyulabilir. Bilek üzerinde welcroyla sabitlenen atel, lacivert renk olup 5 ayrı boyu mevcuttur.

Endikasyon: Baş parmak bağ zedelenmeleri ve yırtılmalarında, baş parmağın istirahata alınması gereken durumlarda kullanılır.



B-11 Yün Elastik El Bileklik

Elastik kumaştan yapılan bilekliğin takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. 5 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Bilek travmalarında, burkulma ve romatizma ağrılarında, spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.





C-1 Cervical Color

Boyun anatomisine göre presle kesilmiş sert polietilenden iki parçalı olarak yapılan boyunluğun kenarlarına yumuşak kauçuk geçirildikten sonra yumuşak, kaliteli vinyleksle kaplanmıştır. Otomatik biye kesme makinelerinde kesilen vinyleks son teknoloji özel makine ve aparatlarla dikildiğinden gerekli standardizasyon, kalite ve seri üretim sağlanmıştır. Gerekli yükseklik ayarlarının kolaylıkla yapılması için üç noktada 3 cm'lik welcro, genişlik ayarı ve sabitleme içinde 5 cm. eninde 15 cm uzunluğunda welcro kullanılmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-3 Cervical Color Çenelikli

Cervical Color'a ilaveten çenenin anatomik yapısına uygun çene pedi bulunur. Yükseklik ayarı 2 adet sürgülü metal ayar mekanizması ile yapılmaktadır. Çene desteği ve metal ayar mekanizması ile stabilize arttırılmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.



C-3A Ekonomik Çenelikli Cervical Color

Boyun anatomisine göre presle kesilmiş sert polietilenden iki parçalı olarak yapılan boyunluğun kenarlarına yumuşak kauçuk geçirildikten sonra yumuşak, kaliteli vinyleksle kaplanmıştır. Otomatik biye kesme makinelerinde kesilen vinyleks son teknoloji özel makine ve aparatlarla dikildiğinden gerekli standardizasyon, kalite ve seri üretim sağlanmıştır. Çenenin anatomik yapısına uygun çene pedi bulunur. Gerekli yükseklik ayarlarının kolaylıkla yapılması için iki noktada 3 cm.lik welcro, genişlik ayarı ve sabitleme içinde 5 cm. eninde 15 cm uzunluğunda welcro kullanılmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.



C-4 Cervical Color Çocuk İçin

Sert polietilenden tek parça olarak yapılan boyunluk 0-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Çocuklarda cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-4A Cervical Color Çocuk İçin Çenelikli

0-12 yaş çocuklar için tek parça sert polietilenden yapılan boyunlukta çene anatomisine uygun çene bedi bulunmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Çocuklarda cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır



C-5 Cervical Color Sponj (Süngerli)

3 cm. kalınlığında 32 dansite süngerin ince pamuklu dokuma (stokinet) kaplanmasıyla yapılan boyunlukta ekstra destek sağlayan polietilen bulunmaktadır. Süngerden daha dar olarak kesilen polietilen stokinete dikilerek süngerin boyuna daha stabil bir destek vermesi sağlanmıştır. 5 cm'lik welcroyla sabitlemesi yapılan sponjun 5 ayrı boyu bulunmaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.



C-5A Cervical Color Sponj Alman Modeli

3 cm. kalınlığında 32 dansite gri süngerden yapılan modelin polietilen desteği süngere sabitlendikten sonra pamuklu dokuma (stokinet) ile kaplanmıştır. 9 cm ve 11 cm. olmak üzere iki farklı yükseklikte üretilen boyunluğun 3 ayrı boyu bulunmaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-6 Cervical Traksiyon Takımı

Evde cervical omurgaya traksiyon uygulamak için üretilen atel seti; kapıya takılabilen makara tertibatı, traksiyon başlığı, ağırlık torbası, germe çubuğu, ip ve iki adet S halkadan oluşmaktadır. Set evde kapıya takılarak doktorun tavsiye ettiği süre ve ağırlığa göre kolaylıkla uygulanabilir.

Endikasyon: Kaslarda, sinir dokusunda ve boyun bölgesi omurgasında basıncı azaltmakta kullanılır.



C-7 Cervical Traksiyon Başlığı

Özel süngerli kumaştan, enseye ve çene altına gelecek şekilde iki parçadan yapılan başlık pamuklu fitil ile birleştirilmiştir. İp üzerinde hareket edebilen parçalar başı traksiyona almak için uygun pozisyona getirilerek kullanılır.

C-8 Cervical Rulo Yastık

10 cm. çapında 45 cm. boyunda silindir şeklinde, sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilmiştir. Çıkarılabilir, yıkanabilir pamuklu kumaştan kılıf içerisine yerleştirilen yastık çok yönlü kullanılabilir. Boyun yastığı olarak kullanımının yanı sıra bacakları ve diz eklemlerini dinlendirmek için yatarken dizin altına yerleştirilebilir. Cervical bölgedeki dejenerasyonlar sonucunda Cervical boyunlukların kullanılması gerektiği durumlarda yatarken tedaviyi devam ettirmek için doktor tavsiyesiyle kullanılabilir.



C-9 Cervical “U” Yastık

U şekline yakın bir şekilde (bir ucu kısa H) sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilmiştir. Pamuklu kumaştan yapılan kılıf içerisine yerleştirilen yastığın boyuna gelen kısmına ayrıca yıkanabilir pamuklu kumaştan ekstra kılıf geçirilmiştir. Cervical bölgedeki dejenerasyonlar sonucunda Cervical boyunlukların kullanılması gerektiği durumlarda yatarken tedaviyi devam ettirmek için doktor tavsiyesiyle kullanılabilir.



C-10 Nelson Color

12 mm’lik ithal İngiliz plastizotundan ten rengi olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Özel olarak tasarlanan kalıp sistemiyle boyunluğun çift yönlü olarak kullanılması mümkündür. Uzun boyunlu insanlarda uzun kısım yukarı gelecek şekilde, kısa boyunlu kişilerde uzun kısım aşağıya gelecek şekilde kullanılabilir. Plastizot üzerine açılan 4 adet delikle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi artırılmıştır. Boyunluğun sabitlenmesi ten rengi welcro ile yapılmaktadır. Welcrolar özel yapıştırıcısıyla plastizota monte edildikten sonra uçlarının kalkmasına engel olmak için plastik rivetlerle sabitlenmektedir. Çocuklar için 5 boy, büyükler için 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.





C-10B Termojelli Nelson Color

12 mm. ithal İngiliz plastizotundan ten rengi olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyunluğun açıp kapaması yandan yapılmakta olup enseye gelen kısma 14 cm. 2 cm lik sert welcro takılmıştır. 7cm. x 15 cm. ölçülerindeki cırt cırt yapışabilen süngerli kumaştan yapılmış kese içerisine yerleştirilen termojel ile boyuna soğuk veya sıcak kompres yapılması sağlanmıştır. Bu ürün Boyun rahatsızlığından dolayı Fizik tedavi gören hastaların fizik tedaviye evlerinde de devam edebilmeleri için geliştirilmiştir.

C-10C Soft Nelson Color

12 mm. ithal İngiliz plastizotundan ten rengi olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot kumaşla kaplıdır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.



C-10E Ekonomik Nelson Color

12 mm. Plastizottan yapılmış olup üzerinde 4 adet hava deliği bulunmaktadır. Standart kalıplarla 3 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.



C-10F İlk Yardım Boyunluğu

12 mm'lik ten rengi, özel olarak üretilmiş Evazottan yapılmıştır. Boyun anatomisine uygun şekilde kalıplarla kesilen Evazot üzerinde 4 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Boyunluk basit hasta naklinde ve ilkyardımda kullanılmak üzere tasarlandığından şekil verilmeden düz olarak üretilmiş, hastanın veya kazazedinin boynunun altından kolaylıkla sürülmesi düşünülmüştür. Boyunluğun açılıp kapatılması welcrolar ile yapılmaktadır. İlkyardım çantalarında kullanım için uygundur.

C-10G Eva Nelson Color

8 mm. mavi renk sert Evazottan yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyunluğun açılıp kapatılması welcrolar ile yapılmaktadır. Kısa süreli kullanımlar ve ilkyardım için uygundur.



C-10R Rijid Plastizot Boyunluk

25 mm. Düşük dansite plastizotun boyun anatomisine uygun olarak kalıplarla kesilmesi ve pamuklu kumaşla kaplanmasıyla üretilmiştir. Boyunluk üzerine dikilen ekstra kılıf yıkama kolaylığı sağlamaktadır. Boyunluğun kapanması 5 cm'lik welcro ile yapılmaktadır. 4 boy olarak 3 değişik renkte üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.



C-11 Philadelphia Color

12 mm'lik ithal ten rengi İngiliz plastizotundan iki parçalı olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi artırılmıştır. Boyunluğun sabitlenmesi uçlarına ten rengi welcro dikilmiş ten rengi özel vinyleksle yapılmaktadır. ısıyla şekillendirilmiş beyaz forexten çene ve ense desteklerine vinyleks metal rivet ile çakılmıştır. Çocuklar için 5 boy, büyükler için 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Boyun kırıklarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.

C-11A Philadelphia Color Trakea Açık

Normal philadelphia colordan farklı olarak ön kısmında bulunan boyun desteğinde delik bulunmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Trakeostomi hastalarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.



C-11B Philadelphia Color MR Uyumlu

12 mm. ithal ten rengi İngiliz plastizotundan iki parçalı olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Ön ve arka destekleri ten rengi olup polietilenden dökülmüştür. Desteklerin plastizota montesi de plastik rivetlerle yapılmaktadır. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi artırılmıştır. Boyunluğun sabitlenmesi uçlarına ten rengi welcro dikilmiş özel vinyleks ile yapılmaktadır. Welcrolar özel yapıştırıcısıyla plastizota monte edildikten sonra uçlarının kalkmasına engel olmak için plastik rivetlerle sabitlenmektedir. Boyunluğun imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Boyun kırıklarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.



C-11C Philadelphia Color Trakea Açık MR Uyumlu

MR uyumlu philadelphiadan farklı olarak ön kısmında trakeaya gelen kısma delik açılmış plastik destek bulunmaktadır. Trakeanın açık olması nabız kontrolünün ve acil trakea müdahalesinin kolaylıkla yapılmasını sağlar. Boyunluğun imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır.

Endikasyon: Trakeostomi olmuş hastalarda, kazalarda, acil hasta naklinde, özellikle MR, tomografi, röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmasına gerek olmadığından ve de gırtlığa acil müdahale imkanı olduğundan acil hekimliğinde kullanılır.

C-11E Ekonomik Cervical Philadelphia Color

12 mm. plastizottan iki parçalı olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmıştır. 3 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Boyun kırıklarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta nakillerinde kullanılır.



C-12 Cervical SOMI Brace

Ayarlanabilir çene ve ense destekleri bulunan boyunluğun gövde ve omuzdan welcrolarla sabitlenmesiyle Cervical bölgeyi tam stabil tutması sağlanır. Göğse ve sırtta gelen kısımlar özel süngerli kumaş ile kaplanmıştır.

Endikasyon: Ağır cervical dejenerasyonlarda ve ağır cervical travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.



C-13 Nelson Color Çenelikli

Nelson Colora ilaveten çeneyi içine alacak şekilde çene desteği vardır. Isıyla şekillendirilerek yapılan çene desteğinin stabilizesini arttırmak için forexten yapılan destek çene kısmına monte edilmiştir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.

C-13A Ekonomik Nelson Color Çenelikli

12 mm. Plastizottan yapılmış olup çeneyi içine alacak şekilde çene desteği vardır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.



C-14 Nelson Color Destekli

Nelson Colora ilaveten ön kısımda stabilizasyonu arttırmak için forexten yapılmış destek bulunmaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.



C-15 Extansiyon Ayarlı Boyunluk

12 mm. ithal ten rengi İngiliz plastizotundan tek parça olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyuna önden istenilen yükseklik ayarını yapabilmek için; Önde plastizot üzerine açılan deliğin üst ve alt taraflarına foreksten kalıplarla şekillendirilmiş destekler yerleştirilmiştir. Desteklere düz ve ters diş açılmış plastik silindirler monte edilmiştir. Silindirler arasına takılan çift taraflı diş açılmış metalle de ayar mekanizması tamamlanmıştır. Ayar mekanizması alt ve üst kısmı eşit aralıklarla açıp kapamaktadır. Ayar mekanizmasının 2 cm açıp kapama kapasitesi vardır. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi arttırılmıştır. 5 boy olarak üretilen boyunluğun ön kısmında bulunan ayar mekanizması kısa ve uzun boyunlara kolaylıkla uygulanmasını sağlamaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, cervical ameliyatlar sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.

C-16 Fleksiyon Ayarlı Boyunluk

12 mm'lik ithal ten rengi İngiliz plastizotundan iki parça olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyuna arkadan istenilen yükseklik ayarını yapabilmek için; Arkada plastizot üzerine açılan deliğin üst ve alt taraflarına foreksten kalıplarla şekillendirilmiş destekler yerleştirilmiştir. Desteklere düz ve ters diş açılmış plastik silindirler monte edilmiştir. Silindirler arasına takılan çift taraflı diş açılmış metalle de ayar mekanizması tamamlanmıştır. Ayar mekanizması alt ve üst kısmı eşit aralıklarla açıp kapamaktadır. Ayar mekanizmasının 2 cm. açıp kapama kapasitesi vardır. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi arttırılmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, cervical ameliyatlar sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.



C-17 Traksiyon Ayarlı Boyunluk

12 mm. ithal ten rengi İngiliz plastizotundan iki parça olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyuna önden ve arkadan istenilen yükseklik ayarını yapabilmek için; Önde ve arkada plastizot üzerine açılan deliklerin üst ve alt taraflarına foreksten kalıplarla şekillendirilmiş destekler yerleştirilmiştir. Desteklere düz ve ters diş açılmış plastik silindirler monte edilmiştir. Silindirler arasına takılan çift taraflı diş açılmış metalle de ayar mekanizması tamamlanmıştır. Ayar mekanizması alt ve üst kısmı eşit aralıklarla açıp kapamaktadır. Ayar mekanizmasının 2 cm. açıp kapama kapasitesi vardır. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi arttırılmıştır. 5 boy olarak üretilen boyunluğun ön ve arka kısmında bulunan ayar mekanizmaları kısa ve uzun boyunlara kolaylıkla uygulanmasını sağlamaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, cervical ameliyatlar sonrasında, boyunu traksiyona almada, acil hasta naklinde kullanılır.



C-18 Wireframe Boyunluk


İki parçadan oluşan boyunluğun ön kısmı çelik telin plastizot ile kaplanıp üzerine neopren kılıfın geçirilmesiyle yapılmaktadır. Enseyeye gelen kısma anatomiye uygun şekil verilmiş foreksten destek yapılmış içi de çıkarılıp takılabilir özel süngerli kumaşla kaplanmıştır. Önde bulunan çelik yaya kolaylıkla şekil verilebildiğinden yükseklik ayarlarının hastaya göre yapılması mümkündür. 2 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, cervical ameliyatlar sonrasında, boynunu traksiyona almada, acil hasta naklinde kullanılır.

T-1 Thorax Traksiyon Kemer

Korselik kumaşın iç kısmına süngerli kumaşın dikilmesiyle üretilen kemerin sırtta gelen kısmına dikilen iki adet kolon ile çekiştirme yapması sağlanmıştır. Her iki kolonun ucunda bulunan tokalardan çekilerek traksiyon sağlanır. Kemerin kapanması önden welcrobantlarla kolaylıkla yapılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Traksiyon gerektiren durumlarda, Fizik tedavide kullanılır.

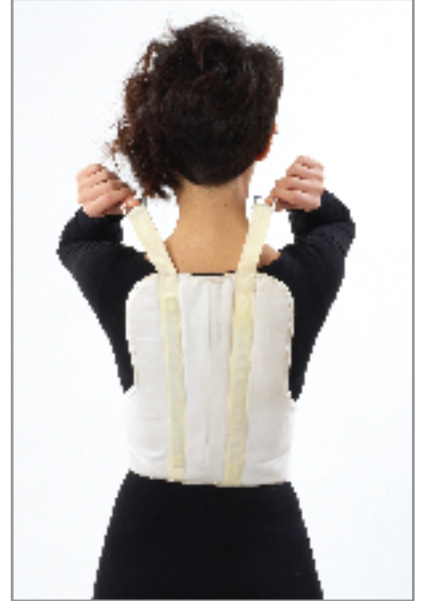

T-2 Pelvic Traksiyon Kemer

Korselik kumaşın iç kısmına süngerli kumaşın dikilmesiyle üretilen kemerin kapanması önde welcrobantlarla yapılmaktadır. Tek çekişli modelinde arkadan V şeklinde gelen kolon, Çift çekişli modelinde yanlardan W şeklinde gelen çift kolon uçlarına toka dikilerek kullanılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Lumbar, lumbosacral ve sacroiliac traksiyonunda, omurlararası basıncı azaltarak hastayı rahatlatmada kullanılır.

T-3 Pelvic Traksiyon Kemerİ Çift Çekişli

Her yönden cırt yapışabilen süngerli kumaştan üretilen kemerin kapanması önde welcrobantlarla yapılmaktadır. Çift çekişli modelinde yanlardan W şeklinde gelen çift kolon uçlarına toka dikilerek kullanılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.



Endikasyon: Lumbar, lumbosacral ve sacroiliac traksiyonunda, omurlar arası basıncı azaltarak hastayı rahatlatmada kullanılır.

T-4 Cilt Traksiyon Kiti Çocuk İçin

Beyaz renk özel olarak dokunmuş antialerjik 5 cm.lik flasterden yapılan çocuk boyunda atelin kolaylıkla kullanılması için flasterin yapışkan kısmına koruyucu bant geçirilmiştir. 6 cm eninde elastik bandaj kitin içinde bulunmaktadır. Topuğa gelen kısım sünger ve plastik takviyeli olup kuşgözü takılmış deliklerden çekirtmede kullanılacak ip geçmektedir.

Endikasyon: Tibia ve fibula kemiği kırıklarında dizaltı traksiyonu sağlamak için kullanılır.



T-5 Cilt Traksiyon Kiti - Büyükler İçin

Çocuk boyundan farklı olarak kullanılan flaster 7,5 cm. eninde,kullanılan bandaj 8 cm. enindedir.



Endikasyon: Tibia ve fibula kemiği kırıklarında dizaltı traksiyonu sağlamak için kullanılır.



H-1 Ağaç Koltuk Değneği

Fırınlanmış gürgenden, verniklenerek yapılan değneğin yüksekliğinin ve el tutma yerinin ayarı mümkündür. Değnek altına kauçuk vakumlu lastik takılmış olup koltuk altına gelen kısma kılıf takılarak koruma sağlanmıştır. Çocuk ve büyük boyu olmak üzere iki çeşittir.

H-2 Alüminyum Koltuk Değneği

Beyaz renk elektrostatik toz boyalı veya eloksalı sert alüminyum profil ve borudan yapılan değneğin yüksekliğinin ve el tutma yerinin ayarı mümkündür. Koltuk altına gelen kısma sert plastik takoz ve üzerine yumuşak kauçuk kılıf takılmış olup el tutma yerine sert plastikten elçek monte edilmiştir. Değneğin altına kauçuk vakumlu lastik takılmış olup lastiğin içine çabuk yıpranmayı engellemek için rondela koyulmuştur. Üç ayrı boyda üretilmektedir.



H-2A Alüminyum Koltuk Değneği - Ekonomik

Metal veya eloksalsız alüminyum profil ve borudan yapılmıştır. Kısa süreli değnek kullanacak hastaların daha ekonomik değnek talebi üzerine tasarlanmıştır. Gri renk olan değnek üç ayrı boyda üretilmektedir. Fırın boyalı metaller özellikle uzun süreli kullanım ve kilolu hastalar için uygundur.




H-2B Neopren Değnek Kılıfı

Koltuk altı kullanılan değneklerin koltukaltında yaptığı tahrişi ve acıyı azaltmak için neoprenden tasarlanan kılıf değneğin üst kısmına takılıp welcro ile sabitlenebilmektedir.

H-2C Alüminyum Koltuk Değneği Klipsli

Eloksallı, sert alüminyum borudan yapılan değneğin yüksekliğinin ve el tutma yerinin ayarı mümkündür. Boy ayarı sustalı sistemle kolaylıkla yapılabilmektedir. Koltuk altına gelen kısma sert plastik takoz ve üzerine yumuşak kauçuk kılıf takılmış olup el tutma yerine sert plastikten elçek monte edilmiştir. Değneğin altına kauçuk vakumlu lastik takılmış olup lastiğin içine çabuk yıpranmayı engellemek için rondela koyulmuştur.

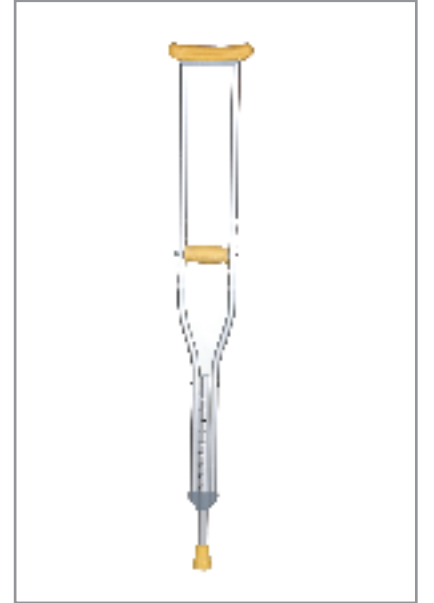

H-4 Değnek Lastiği Kauçuk

Değnek ölçülerine uygun şekilde kauçuktan dökülmüş olup lastiğin çabuk yıpranmasını engellemek için içerisinde rondela bulunmaktadır. Değneklerin kaymasını engellemek için değnek uçlarına takılmaktadır.



H-4A Değnek Lastiği PVC

Değnek ölçülerine uygun şekilde PVC den yapılmış olup lastiğin çabuk yıpranmasını engellemek için içerisinde rondela bulunmaktadır.



H-5 Asa Tipi Baston

Eloksallı alüminyum borudan yapılan bastonun el tutma yeri sert kaliteli plastikten yapılmış olup bastonun ucuna kauçuk vakumlu lastik takılmaktadır. Tek boy olarak üretilen değnek tüm boylara ayarlanabilmektedir.



H-6 Canadiyen Kol Değneği (Bütün Saplı)

İç içe geçen beyaz renk elektrostatik toz boyalı veya eloksallı alüminyum borudan yapılan bastonun boyu ayarlanabilir olup altına vakumlu kauçuk lastik takılmıştır. Anatomik yapıya uygun olarak değişik renklerde yapılan el tutma ve kol destek kısmı tek parça olup kaliteli sert plastikten yapılmıştır.





H-6A Ekonomik Canadiyen Kol Değneği

Kısa süreli kullanacak, değneğin ekonomik olmasını düşünen kişiler için geliştirilen değnek H-6'ya göre daha ince ve hafiftir. Gri renk olan değnek tek boy olarak üretilmektedir. Kılolu ve uzun zaman kullanacak kişiler için boyalı metal değnek alternatifi bulunmaktadır.

H-6B Neopren Canadiyen Kılıfı

Uzun süreli kullanımlarda dirsekte oluşan tahrişi ve acıyı azaltmak için neoprenden yapılmıştır. Değneğin dirsek kısmına takılan neopren destek arkada bulunan welcrosu ile sabitlenebilmektedir. Kolay kullanımının, rahatlığının ve yumuşaklığının yanı sıra estetik görünümde vermektedir.



H-7 Wolker Cihazı Sabit

Metal borudan kromajlı ve elektrostatik toz boyalı olarak iki modelde üretilen yürütecın bağlantıları vida ve kelebek somunla yapılmış, dört ayağa da vakumlu kauçuk lastik takılmıştır. Tek boy olarak üretilmektedir.



H-8 Wolker Cihazı Hareketli

Alüminyum borudan ve elektrostatik toz boyalı metal borudan yapılan yürütecın dört ayağının yükseklięi ayarlıdır. Eklemlı baęlantısından dolayı yürürken ileri geri hareket ettirilebilir. Kullanılmadıęı zamanda katlanarak fazla yer kaplamadan saklanabilir. Çocuk ve büyük boyu olan yürütecın dört ayağına da vakumlu kauçuk lastik takılmıştır. El tutma yerleri avuç içinin tahriş olmasını engellemek için özel süngerden yapılmıştır.

HA-8 Alüminyum Wolker Cihazı

Alüminyum borudan ve elektrostatik toz boyalı metal borudan yapılan yürütecın dört ayağının yükseklięi sustalı sistemle kolaylıkla ayarlanabilir. Hafiftir. El tutma yerleri özel süngerle kaplıdır. Eklemlı baęlantısından dolayı yürürken ileri geri hareket ettirilebilir. Kullanılmadıęı zamanda katlanarak fazla yer kaplamadan saklanabilir.



H-9A Wolker Cihazı Bükümlü

Alüminyum borudan ve elektrostatik toz boyalı metal borudan yapılan yürütecın dört ayağının yükseklięi sustalı sistemle kolaylıkla ayarlanabilir. Yürütece verilen özel bükümle hastanın oturduęu yerden kolaylıkla kalkması saęlanmışır. Üst ve alt tutma yerleri özel süngerle kaplıdır. Eklemlı baęlantısından dolayı yürürken ileri geri hareket ettirilebilir. Kullanılmadıęı zamanda katlanarak fazla yer kaplamadan saklanabilir.



H-10 Tekerlekli Wolker Cihazı

Hareketli wolker cihazından farklı olarak ön iki ayağında tekerlek bulunmaktadır.

H-11 Klozet Yükseltici

Elektrostatik toz boyalı metal borudan yapılmıştır. Oturma yerinde klozet kapağı ve lazımlık sürgü yeri ve plastik lazımlığı bulunduğu tuvalette klozet üzerine yerleştirilebileceği gibi lazımlığı takılarak tuvalet dışında hastanın tuvalet ihtiyacını gidermesi de sağlanabilir. Dört ayağa da vakumlu kauçuk lastik takılmıştır. Katlanarak yer kaplaması engellenebilir. Yükseklik ayarı yoktur.



H-12 Klozet Yükseltici Tekerlekli

Dört ayağa takılan tekerlekle taşınması daha kolay hale getirilmiştir. Tekerleklerin takılı olduğu 4 ayakta da yükseklik ayarı mümkündür. Sırta destek olması için sırt desteği takılmıştır. Katlanarak kullanılabilir.



H-13 Klozet Yükseltici - Katlanır

Normal klozet yükselticiler gibi söküp takma derdi olmayan model; kullanılmadığı zaman birbiri üzerine katlanarak yer kaplamayacak şekilde tasarlanmıştır. Açılması çok basit, kullanımı çok kolay olduğundan hastalar ve hasta yakınları tarafından tercih edilmektedir. Hastanın tercihinine göre yükseklik ayarı yapılabilmektedir. Sırt desteği ekstra konfor sağlar.

H-14 Plastik Klozet Yükseltici

Yaşlı ve yürüme, oturma güçlüğü çeken kişilerin tuvalet ihtiyacını daha rahat gidermeleri için sert plastikten yapılan klozet yükseltici aparat klozetin üzerine yerleştirilerek kullanılır. Aparatın altında bulunan yuvalarına yerleştirilen 4 adet plastik mekanizma aparat klozete yerleştirildikten sonra kilitlenerek tam oturmasını sağlar. 185 kg.'a kadar taşıma kapasitesi bulunan aparat klozeti 11 cm. yükseltmektedir.



H-15 Plastik Klozet Yükseltici - Kapaklı

Plastik yükselticiden farklı olarak aparatta açılıp kapanır klozet kapağı bulunmaktadır. Kullanılmadığı zaman kapağın kapatılarak görüntü ve koku kirliliğinin engellenmesi sağlanmıştır.





G-7 Tripot Üçlü Denge bastonu

Metal borudan kromajlı ve elektrostatik toz boyalı modellerde üretilen bastonun üç ayağı ekstra yürüme desteği vermektedir. Üç ayağa da kauçuk vakumlu lastik takılmıştır. Tek boy olarak üretilen değnek tüm boylara ayarlanabilmektedir.

G-7A Canadiyen Saplı Üçlü Denge Bastonu

Canadiyen değneğe üç ayaklı parçanın takılmasıyla üretilen değnek G-7'den farklı olarak hem el hem de dirsek desteği vermektedir. Tek boy olarak üretilen değnek tüm boylara ayarlanabilmektedir.



G-8 Quadripot Dörtlü Denge Bastonu

Metal borudan kromajlı ve elektrostatik toz boyalı modellerde üretilen bastonun dört ayağı ekstra yürüme desteği vermektedir. Dört ayağa da kauçuk vakumlu lastik takılmıştır. Tek boy olarak üretilen değnek tüm boylara ayarlanabilmektedir.



K-1 Wonrosen Cihazı

Bel ve Uyluk bantları metalden yapılan cihazın bel ve bacaklardaki ayar mekanizması polietilen kemerler üzerine dikilmiş welcrolar ile yapılmıştır. Polietilenin kenarları yumuşak vinyleks dikilerek kaplanmıştır. Çocuk bezinin üzerine uygulanabilen atelin temizliği kolaydır.

Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.

K-2 Dennis Broun (Ponsetti) Cihazı - Botlu

Botlu modelinde cihaza monte edilmiş çektirmeli, burnu açık, bağcıklı bot kullanılmaktadır. Ön kısmı tamamen açılabilen botla çocuğun ayağının ayakkabıya tam olarak oturması gözlenebilmekte, çektirme bantta bağcıktan önce takılarak ayağın ayakkabıdan çıkması önlenmektedir. Cihaz metalden yapılmış olup iki ayrı raylı parçadan oluşmaktadır. Parçaların uçlarında iç ve dış rotasyonu sağlayacak dişli sistem bulunmaktadır. Vidalı sistem ile uzunluk ayarı yapılabilir. Ayakkabının topuk kısmına vida ve çivilerle takılan dişli mekanizma ayakkabının cihaza istenilen açıda takılmasını sağlamaktadır. Cihazın kısa ve uzun iki boyu mevcuttur. Botları 14-25 numaraları arasında üretilmektedir.

Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.



K-2A Dennis Broun (Ponsetti) Cihazı - Botsuz

Cihaz metalden yapılmış olup iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Parçaların uçlarında iç ve dış rotasyonu sağlayacak dişli sistem bulunmaktadır. Vidalı sistem ile uzunluk ayarı yapılabilir. Ayakkabının topuk kısmına vida ve çivilerle takılan dişli mekanizma ayakkabının cihaza istenilen açıda takılmasını sağlamaktadır. Cihazın kısa ve uzun iki boyu mevcuttur.



Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.



K-3 Pavlik Bandajı

Omuza ve bele gelen kısımlar kolondan yapılmış olup iç kısımları yumuşak materyal ile kaplıdır. Ayakların gireceği yerlerdeki kolonlara welcro dikilmiş olup welcroyla ayar mekanizması sağlanmaktadır. Omuzdan ve ayaktan bele gelen kolonların ayarı ısırgan tokalarla kolaylıkla yapılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.

K-3A Pavlik Bandajı Welcrolu

Omuza ve bele gelen kısımlar cırt yapışabilir süngerli kumaştan yapılmış olup yumuşaktır. Omuzdan ve ayaktan bele gelen süngerli kumaşın ayarlanması welcroyla kolaylıkla yapılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır



K-4 Abdüksiyon Korse

Polietilen malzemeden yapılan korsenin kenarlarına yumuşak fitil geçirilip vinyleksle kaplanmıştır. Belden ve omuzdan sabitlemede ayarlı welcrolu kolonlar kullanılmıştır. Yıkatabilen ve silinebilen korse 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.



K-5 Frejka Ateli - Polietilen

Polietilenin içte sünger ve yumuşak su geçirmez naylonla kaplanmasıyla yapılan korsenin çocuğun her iki bacağına abduksiyona getirebileceği kadar perianal bölgede uzunluğu olup, perianal bölgeden sonra yay şeklinde bir kavis alarak karşılıklı gelen iki uç bacağın üzerinde birleştirilir. Havalandırma delikleri bulunan korsenin kenarları yumuşak sünger ile takviye edilip vinyleks ile kaplanmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır



K-5A Frejka Ateli - Muşamba

Su geçirmez kumaştan üretilen korsenin içerisine çelik balenler ve alüminyum balenler koyulup sünger ile desteklenmiştir. Isırgan tokalar ve kolonlarla kolaylıkla ayarlanabilir. Uyluğa gelen kısımlara ekstra sünger koyulmuştur. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.



K-7 Abdüksiyon Cihazı

Önde ve arkada 15 mm'lik genişliğinde nikelajlı iki parçalı metalden yapılan cihazın ön ve arka parçalarına ayarı sağlamak için yeteri kadar delik açılmış olup açılan deliklere çekilen kılavuzla vidayla parçaları birbirine tespit etme imkânı sağlanmıştır. Bel kısmına gelen plastiğin içi 3 mm. Plastazotla kaplanmıştır. Baldır kısmına gelen plastiklerin kenarına kauçuk fitil koyulup plastiğin kenarları vinyleks ile çepeçevre dikilmiştir. Bele ve baldıra gelen kısımların ayarı welcro ile yapılmaktadır. 5 boy olarak imal edilmektedir.

Kullanıldığı yerler ve kullanılışı:

Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır. Kullanımı uzman bir eleman tarafından aileye gösterilir.



X-28 Abdüksiyon Şort

12 mm. ithal İngiliz plastizotundan ten rengi olarak yapılan korsenin tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla kalça anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle korsenin stabilizesi artırılmıştır. Korsenin sabitlenmesi belde 5 cm.lik ten rengi welcro ile, uylukta ise iki taraflı gelen 2 cm'lik welcro ile yapılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır





Y-10 Muşamba Külot

Su geçirmez muşambadan külot şeklinde üretilmiş, bel ve bacak kenarlarına kıvrırma lastik dikilmiştir. Altına idrar kaçıran çocuklarda, felçli ve yatalak hastalarda idrarın dışarı çıkmasını engellemek için kullanılır.

Y-11 Muşamba Külot Welcrolu

Su geçirmez muşambadan hazır çocuk bezi şeklinde üretilen külotün kapanması sağ ve solda bulunan welcrolarla sağlanmaktadır. Altına idrar kaçıran çocuklara, felçli ve yatalak hastalarda, yoğun adet kanaması olan bayanlarda koruyucu olarak kullanılır.



Y-12 Hasta Alı Muşambası

0,5 cm. süngerin su geçirmez özel kumaşla kaplanmasıyla yapılan örtünün tüm kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır . Ölçüleri 120 cm x 90 cm dir. İdrar, kan vb. sıvılara karşı yatak koruyucu olarak kullanılır.



Y-13 Colostomi Cihazı

Colostomi yapılmış hastaların tuvalet ihtiyacını giderebilmeleri için bele takılarak kullanılan cihaz, tokalara takılmış lastik bantla hastaya göre ayarlanabilmektedir.



Cihaza takılan naylon torbalar kolay bulunduğundan ve kiloyla satıldığından ekonomiktir.

Y-14 Regl Külotu

Su geçirmez malzemeden hazır çocuk bezi şeklinde üretilen külotun kapanması sağ ve solda bulunan welcrolarla sağlanmaktadır. Yoğun adet kanaması olan bayanlarda koruyucu olarak kullanılır.



Y-15 Felç El Süngeri

Farklı dansitede poliüretandan top şeklinde üretilmektedir. El kaslarını çalıştırmada ve el egzersizlerinde kullanılmaktadır.



Y-16 Felç El Simiti

Kauçuktan 4 değişik ölçü ve sertlikte simit şeklinde üretilmektedir. El kaslarını çalıştırmada ve el egzersizlerinde kullanılmaktadır.



Y-18 Penis Klemp

Alüminyumdan iki parçanın açılıp kapanır şekilde birleştirilmesiyle yapılmaktadır. Klempin içi plastizot ile kaplanmış dışına takılan welcrolarla ayarlama imkanı verilmiştir.



Y-22 Felçli Hasta Önlüğü

Su geçirmez, silinebilir özel kumaştan yapılan önlük tek boydur. Boyuna gelen kısma dikilen welcrosuyla her kişiye ayarlanabilir. Özellikle felçli hastalara yemek vb. işleri sırasında takılarak elbiselerinin kirlenmesini engellemede kullanılır.





Y-23 Felç El Süngeri - Keseli

Top şeklinde yuvarlanmış süngerin pamuklu kumaştan yapılmış ucunda ip bulunan keseye yerleştirilmesiyle üretilmektedir. Özellikle felçli hastaların el egzersizi yaparken topu ellerinden düşürmelerini önlemek için kesenin ucunda bulunan ip boyuna veya bileğe takılabilir. Kese yıkanabilir.

Y-24 Kum Torbası

Kumun muhafaza içerisine yerleştirildikten sonra kumaştan veya brandadan dikilmiş kılıfa yerleştirilmesiyle üretilmektedir. 0,5-1-1,5-2 ve 2,5 kg. gibi 5 değişik ölçüde yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında, traksiyon apareylerinde sabit ağırlık gerektiği durumlarda, Fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.



Y-25 Ağırlık (Bağlamalı)

Eşit parçalara bölünmüş kumun kumaştan yapılmış cepler içerisine yerleştirilmesiyle üretilmektedir. Ağırlığa dikilen welcro bantlarla ağırlığın kola veya bacağı kolaylıkla sarılıp sabitlenmesi sağlanmıştır. 0,5-1-1,5-2 ve 2,5 kg. gibi 5 değişik ölçüde yapılmaktadır. Felçli ve özürlü hastaların el-kol-ayak-bacak egzersizlerinde, spor ve kas geliştirme çalışmalarında, Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılmaktadır.



Y-26 Zayıflama Tulumu

Terletici özelliği bulunan kumaştan alt ve üst iki ayrı parça olarak üretilmiştir. Çevresine takılan elastik bantlarla tek boy olarak üretilen tulumun her bedene uyması sağlanmıştır. Günlük uğraşlar sırasında, Egzersiz ve spor faaliyetlerinde kullanılarak ter atma yoluyla kilolu kişilerin zayıflaması amaçlanmıştır.

Y-29 Selülit Korsesi

Sık dokunmuş tek kat lycradan paçalı olarak dikilen korse kalça ve karın bölgesini toplamakta, elbise içine giyildiğinde belli olmadığından estetik bir görünüm vermektedir. Karın bölgesine koyulan esnemez kumaşla karın bölgesinin toplanması sağlanmış, yaptığı basınçla da selülitleri gidermesi amaçlanmıştır. Beyaz renk olarak 7 ayrı boyda üretilmektedir.



Y-30 Fototerapi Gözlüğü

Siyah renk yoğun dansite süngerin her noktadan cırt yapışabilir kumaşa laminasyonu ile elde edilen özel kumaştan yapılmıştır. Kalıplarla üç boy olarak gözlük şeklinde kesilen kumaş kafanın arkasında welcroyla birleştirilmektedir. Kafanın üst kısmından geçecek şekilde dikilen bantta welcroya yapıştırılarak gözlüğün kayması engellenmektedir. Yeni doğmuş bebeklerin fototerapiyle sarılık tedavisinde bebeğin gözüne takılarak kullanılmaktadır. Bebeğin gözünden fototerapi gözlüğünün kaymasına dikkat edilmelidir.

Y-31 Egzersiz Topu 3 kg

Deri veya nubuktan yapılan topun içerisine 3 kg. ağırlığında materyalin yerleştirilmesiyle üretilmektedir. Bacak ve gövde egzersizlerinde kullanılmaktadır.



Y-32 Uyku Bandı

Siyah renk yoğun dansite süngerin her noktadan cırt yapışabilir kumaşa laminasyonu ile elde edilen özel kumaştan yapılmıştır. Işığı geçirmeme özelliğinden dolayı yolculuk sırasında ve evde rahat uyku için kullanılmaktadır.



Y-33 Ağırlık - Bilyeli

Kum torbasından farklı olarak özgül ağırlığı fazla olan demir topraklar tartılarak yerleştirilmiştir. Böylece aynı gramajın daha az bir alan kaplaması sağlanmıştır. Kumaş kılıf yerine sağlam branda kılıf kullanılmıştır. 0,5-1-1,5-2 ve 2,5 kg. gibi 5 değişik ölçüde yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında, traksiyon apareylerinde sabit ağırlık gerektiği durumlarda, Fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.





Y-34 Tek Göz Bandı

Siyah renk yoğun dansite süngerin her noktadan cırt yapışabilir kumaşa laminasyonu ile elde edilen özel kumaştan yapılmıştır. Göz rahatsızlıklarında tek gözün dinlendirilmesi gerektiğinde kullanılır.

Y-35 Kauçuk Hasta Altı Simiti

Kauçuktan yuvarlak simit şeklinde yapılmaktadır. Kenarında bulunan sibopa ağızla veya pompayla hava üflenip kullanılmaktadır. Hemoroidde, kalça ağrılarında kullanılır. Uzun süreli oturarak çalışanlarda rahatlık sağlar.



Y-36 Kauçuk Termofor

Kauçuktan değişik modellerde yapılmaktadır. İçerisine sıcak su koyulup vidalı tıpasının kapatılmasıyla, sıcak kompres olarak kullanılmaktadır.



Y-37 Tansiyon Aleti Kılıfı



Klasik tip tansiyon aletlerinde kola sarılan, içerisine şişirilen iç lastiğin koyulduğu kumaş kılıftır. Dayanıklı özel kumaştan siyah renk olarak üretilmekte manşonun sarılması welcrolarla sağlanmaktadır.

Y-40 Trakeostomi Koruyucu

Trakeostomi ameliyatları sonrasında bölgeyi dış etkilerden korumak ve görünümü düzeltmek için lycra kumaştan veya Airtex kumaştan yapılmaktadır. Welcro ayar mekanizmasıyla kolaylıkla boyuna takılabilmektedir.



N-15 Kumaş Yüz Maskesi



Laminasyon yöntemi ile kaplanmış 0.5 mm kalınlığındaki süngerden imal edilmiş olan maskenin çeneye gelen kısmı çene kavisi verilerek birleştirilmiştir. Kaplamada kullanılan kumaş deriyi tahriş etmeyecek şekilde işlenmiş olup welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliği ayar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Ense-den ve başın üstünden welcro ile sabitlenen maskenin 5 değişik boyu vardır. Ten rengi olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Yüz ve çene ameliyatları sonrasında, kulak ameliyatları sonrasında koruyucu olarak kullanılır.



W-2 Lycra Yüz Maskesi

Lycra kumaştan imal edilmiş olan maskenin çeneye gelen kısmı çene kavisi verilerek birleştirilmiştir. Enseden ve başın üstünden welcro ile sabitlenen maskenin 5 değişik boyu vardır. Beyaz renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Yüz ve çene ameliyatları sonrasında, kulak ameliyatları sonrasında koruyucu olarak kullanılır.

N-55 Kurşun Ağırlık - 1,5 kg

Neoprenden dikilmiş, welcroyla kapanan altı adet cebin bulunduğu kılıfın çevresine boydan boya welcro dikilerek geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Kılıfın içine 6 adet 250 gr.'lık kurşun külçe yerleştirilmiştir. 250 gr.dan başlayarak 1,5 kg.a kadar 6 değişik gramajda kullanabilme imkanı vardır. Felçli ve özürlü hastaların el-kol-ayak-bacak egzersizlerinde, spor ve kas geliştirme çalışmalarında, Fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılmaktadır.



N-56 Kurşun Ağırlık - 2,5 kg

Neoprenden dikilmiş, welcroyla kapanan beş adet cebin bulunduğu kılıfın çevresine boydan boya welcro dikilerek geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Kılıfın içine 5 adet 500 gr.'lık kurşun külçe yerleştirilmiştir. 500 gr.dan başlayarak 2,5 kg.a kadar 5 değişik gramajda kullanabilme imkanı vardır. Felçli ve özürlü hastaların el-kol-ayak-bacak egzersizlerinde, spor ve kas geliştirme çalışmalarında, Fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılmaktadır.





N-56R Kurşun Ağırlık 5 kg

Neoprenden dikilmiş, welcroyla kapanan beş adet cebin bulunduğu kılıfın çevresine boydan boya welcro dikilerek geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Kılıfın içine 10 adet 500 gr.'lık kurşun külçe yerleştirilmiştir. 500 gr.dan başlayarak 5 kg.a kadar 10 değişik gramajda kullanabilme imkanı vardır. Felçli ve özürlü hastaların el-kol-ayak-bacak egzersizlerinde, spor ve kas geliştirme çalışmalarında, Fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılmaktadır.

N-18 Thermal Omuz Bandajı

Bandajların tamamı 5 mm'lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaştandır. Kumaşın tekniğiyle welcroyla her noktadan yapışabilme özelliği vardır. Çevresi overlokla kaplanan süngerli kumaş uygulanacağı bölge (omuz, bel, diz, bilek, boyun) anatomisine uygun olarak kesilmiş ve korsenin kapatılması uçlarına dikilmiş 4-5 cm.lik welcrolarla sağlanmıştır. Korsenin uygun yerlerine welcrolu cepler dikilmiş ve bu ceplerin içine Termojel yerleştirilmiştir.

Omuz bandajı: 2 adet 25 x 12 cm Termojel

Endikasyon: Romatizmal şikayetler, Fizik Tedavi, Diş hekimliği, İlk yardım, Spor kazaları, Jinekoloji ve Ameliyat sonrası bakımda soğuk veya sıcak olarak kullanılır.



N-19 Thermal Bel Bandajı

Bandajların tamamı 5 mm.lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaştandır. Kumaşın tekniğiyle welcroyla her noktadan yapışabilme özelliği vardır. Çevresi overlokla kaplanan süngerli kumaş uygulanacağı bölge (omuz, bel, diz, bilek, boyun) anatomisine uygun olarak kesilmiş ve korsenin kapatılması uçlarına dikilmiş 4-5 cm.lik welcrolarla sağlanmıştır. Korsenin uygun yerlerine welcrolu cepler dikilmiş ve bu ceplerin içine Termojel yerleştirilmiştir.

Bel bandajı: 2 adet 25 x 12 cm Termojel

Endikasyon: Romatizmal şikayetler, Fizik Tedavi, Diş hekimliği, İlk yardım, Spor kazaları, Jinekoloji ve Ameliyat sonrası bakımda soğuk veya sıcak olarak kullanılır.





N-20 Thermal Diz Bandajı

Bandajların tamamı 5 mm.lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaştandır. Kumaşın tekniğiyle welcroya her noktadan yapışabilme özelliği vardır. Çevresi overlokla kaplanan süngerli kumaş uygulanacağı bölge (omuz, bel, diz, bilek, boyun) anatomisine uygun olarak kesilmiş ve korsenin kapatılması uçlarına dikilmiş 4-5 cm.lik welcrolarla sağlanmıştır. Korsenin uygun yerlerine welcrolu cepler dikilmiş ve bu ceplerin içerisine Termojel yerleştirilmiştir.

Diz bandajı: 1 adet 25 x 12 cm Termojel

Endikasyon: Romatizmal şikayetler, Fizik Tedavi, Diş hekimliği, İlk yardım, Spor kazaları, Jinekoloji ve Ameliyat sonrası bakımda soğuk veya sıcak olarak kullanılır.

N-21 Thermal Bilek Bandajı

Bandajların tamamı 5 mm.lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaştandır. Kumaşın tekniğiyle welcroya her noktadan yapışabilme özelliği vardır. Çevresi overlokla kaplanan süngerli kumaş uygulanacağı bölge (omuz, bel, diz, bilek, boyun) anatomisine uygun olarak kesilmiş ve korsenin kapatılması uçlarına dikilmiş 4-5 cm'lik welcrolarla sağlanmıştır. Korsenin uygun yerlerine welcrolu cepler dikilmiş ve bu ceplerin içerisine Termojel yerleştirilmiştir.

Ceplere koyulan termojel ölçüleri ve adetleri aşağıdadır.

Bilek Bandajı: 1 adet 25 x 12 cm Termojel

Endikasyon: Romatizmal şikayetler, Fizik Tedavi, Diş hekimliği, İlk yardım, Spor kazaları, Jinekoloji ve Ameliyat sonrası bakımda soğuk veya sıcak olarak kullanılır.



N-22 Thermal Boyun Bandajı

Bandajların tamamı 5 mm'lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaştandır. Kumaşın tekniğiyle welcroya her noktadan yapışabilme özelliği vardır. Çevresi overlokla kaplanan süngerli kumaş uygulanacağı bölge (omuz, bel, diz, bilek, boyun) anatomisine uygun olarak kesilmiş ve korsenin kapatılması uçlarına dikilmiş 4-5 cm.lik welcrolarla sağlanmıştır. Korsenin uygun yerlerine welcrolu cepler dikilmiş ve bu ceplerin içerisine Termojel yerleştirilmiştir.

Boyun bandajı: 1 adet 25 x 12 cm Termojel

Endikasyon: Romatizmal şikayetler, Fizik Tedavi, Diş hekimliği, İlk yardım, Spor kazaları, Jinekoloji ve Ameliyat sonrası bakımda soğuk veya sıcak olarak kullanılır.





B-13 Termojelli Yün Kemer

Termojelli Kemer için 21 cm eninde elastik kumaş kullanılmış olup her iki ucuna 5 mm'lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaş dikilmiştir. Kumaşın welcroya her noktadan yapışabilme özelliği vardır. Süngerli kumaşın ucuna dikilen 5 cm'lik welcrolarla korsenin istenilen yerden kapatılması sağlanmıştır. Korseye welcrolu cep dikilmiş ve bu cebin içerisine 1 adet 25x12 cm. Termojel yerleştirilmiştir.

Endikasyon: Romatizmal şikayetler, Fizik Tedavi, Spor kazaları ve Ameliyat sonrası bakımda soğuk veya sıcak olarak kullanılır.

B-14 Termojelli Dizlik

Termojelli Dizlik için 21 cm. eninde elastik kumaş kullanılmış olup her iki ucuna 5 mm.lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaş dikilmiştir. Kumaşın welcroya her noktadan yapışabilme özelliği vardır. Süngerli kumaşın ucuna dikilen 5 cm'lik welcrolarla dizliğin istenilen yerden kapatılması sağlanmıştır. Dizliğe welcrolu cep dikilmiş ve bu cebin içerisine 1 adet 25x12 cm. Termojel yerleştirilmiştir.

Endikasyon: Romatizmal şikayetler, Fizik Tedavi, Spor kazaları ve Ameliyat sonrası bakımda soğuk veya sıcak olarak kullanılır.



B-15 Termojelli Boyunluk

Termojelli boyunluk için 21 cm. eninde elastik kumaş kullanılmış olup her iki ucuna 5 mm.lik süngerin laminasyon ile kumaşla kaplanması ile elde edilmiş özel süngerli kumaş dikilmiştir. Boyunluğa welcrolu cep dikilmiş ve bu cebin içerisine 1 adet 9x12 cm. Termojel yerleştirilmiştir.

Endikasyon: Romatizmal şikayetler, Fizik Tedavi, Spor kazaları ve Ameliyat sonrası bakımda soğuk veya sıcak olarak kullanılır.



B-16 Termojel 25cm x 12cm

B-17 Termojel 9cmx12cm



İki boy olarak üretilen Termojel içerisine konduğu plastik torbayla kullanılır.


Plastik torbayı açmayınız, delmeyiniz.

Soğuk kompres için: Deepfreeze'de ya da buzdolabının buzluk kısmında 2 saat bekletildikten sonra cebe yerleştirip uygun bölgeye uygulayınız.

Sıcak kompres için: 60 derece-max. 80 derecedeki suda 10 dakika veya mikrodalga fırında 300 w'da 5 dk. bekleterek cebe yerleştirip uygun bölgeye uygulayınız.

KEM-01 Kemoterapi Peruğu

Sentetik malzemeden yapılan peruğun farklı modelleri mevcut olup kemoterapi sonrasında saç dökülen hastalara moral destek sağlamaktadır.

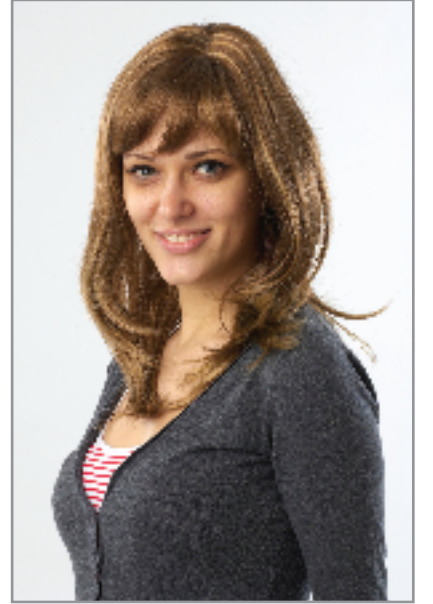

DY-01 Diyabet Ayakkabısı



Özel yumuşak deriden yapılan ayakkabının tabanı da yumuşak tabandan seçilmiştir. Ayakkabının iç tabanına da yumuşak tabanlılık koyulmuştur. Özellikle diyabet hastalarında ayakta yara açılmasını engellemek için ve yaşlılarda rahat ayakkabı ihtiyacını sağlamak için kullanılır.



N-29 Üiversal Korse - Pedsiz

Vücudun anatomik şekline uygun olarak kesilmiş 4 mm. Neoprenden yapılan korse- nin kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Önde çapraz dikilmiş 3'er sıra welcro- larla geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Bel fıtığı, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalarında tedavi edici olarak, Sporcularda, ağır işlerde çalışanlarda ve fizik tedavi sonrasında koruyucu olarak kul- lanılır.



N-30 Üiversal Korse - Pedli

Vücudun anatomik şekline uygun olarak kesilmiş 4 mm. Neoprenden yapılan korse- nin kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Arkada 4 adet spiral yay desteği bulun- makta olup destekler kolonların içerisine yerleştirilmiştir. Ayar mekanizması önde welcro ile sağlanmakta olup ilaveten arkadan gelen kemer takviyesiyle bele tam des- tek sağlanmaktadır. 5 boydur.

Endikasyon: Bel fıtığı, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalarında tedavi edici olarak, Sporcularda, ağır işlerde çalışanlarda ve fizik tedavi sonrasında koruyucu olarak kul- lanılır. Lumbar ve sacral vertebranın stabilizesini sağlar.



N-30A Üiversal Korse Alman Modeli

Vücudun anatomik şekline uygun olarak kesilmiş 4 mm. Neoprenden yapılan korse- nin kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Arkada ucu açık dikilmiş 4 kolona 2 plastik balen, 2 çelik balen yerleştirilmiş olup isteğe bağlı değişiklik yapılabilir. Kor- senin ayar mekanizması önde iki toka ve welcrolu kolonlarla yapılmıştır. Korseyle birlikte verilen çıkarılabilir, yıkanabilir kumaş kılıf içerisine yerleştirilmiş ped çift yönlü kullanılabilir. Lumbar ve sacral bölgeye yapılması istenilen baskıya göre pe- din yönü ayarlanabilir.

Endikasyon: Bel fıtığı, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalarında tedavi edici olarak, Sporcularda, ağır işlerde çalışanlarda ve fizik tedavi sonrasında koruyucu olarak kul- lanılır. Lumbar ve sacral vertebranın stabilizesini sağlar.





N-31 Neopren Dizlik

4mm. Neoprenden yapılan dizliğe diz anatomisine uygun 5° şekil verilmiştir. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma bant ile kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Diz travmalarında, Operasyon sonrasında ve Spor aktivitelerinde kullanılır.

N-31W Neopren Dizlik Welcrolu

N-31'e göre uzunluğu daha kısa olan dizliğin kolay giyilmesini sağlamak için üst kısmında welcroyla kapanan açıklık bırakılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Diz travmalarında, Operasyon sonrasında ve Spor aktivitelerinde kullanılır.



N-32 Neopren Dizlik Patella Açık

N-31'den farklı olarak patellaya gelen kısmı kalıpla yuvarlak olarak kesilerek dizliğin patellayı kavraması sağlanmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Diz travmalarında, Operasyon sonrasında, Patellanın sabitlenmesinde ve Spor aktivitelerinde kullanılır.



N-32W Dizlik Patella Açık Welcrolu

N-32'ye göre uzunluğu daha kısa olan dizliğin kolay giyilmesini sağlamak için üst kısmında welcroyla kapanan açıklık bırakılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Diz travmalarında, Operasyon sonrasında, Patellanın sabitlenmesinde ve Spor aktivitelerinde kullanılır.

N-33 Dizlik Patella Destekli

4mm. Neoprenden yapılan dizliğe diz anatomisine uygun 5° şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmiştir. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma bant ile kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Diz travmalarında, diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Spor aktivitelerinde kullanılır.



N-33W Dizlik Patella Destekli Welcrolu

N-33'e göre uzunluğu daha kısa olan dizliğin kolay giyilmesini sağlamak için üst kısmında welcroyla kapanan açıklık bırakılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Diz travmalarında, Operasyon sonrasında, Patellanın sabitlenmesinde ve Spor aktivitelerinde kullanılır.



N-34 Neopren Patella ve Ligament Destekli Dizlik

4mm. Neoprenden yapılan dizliğe diz anatomisine uygun 5° şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmiş, dizliğin yanlarına dikilen kolonlar içerisine balenler yerleştirilerek lateral ve medial ligamente destek sağlanmıştır. Üstte ve altta olmak üzere iki adet welcroband dizi boydan boya saracak şekilde yerleştirilmiştir. Avrupa'da yapılan klinik araştırmalar neticesinde dizliğin dizden kaymasını engellemek hedefiyle welcrobandlar için en uygun noktalar bulunmuştur. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma bant ile kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır.

N-34W Dizlik Patella ve Ligament Destekli Welcrolu

N-34'e göre uzunluğu daha kısa olan dizliğin kolay giyilmesini sağlamak için üst kısmında welcroyla kapanan açıklık bırakılmıştır. Yandaki ceplere yerleştirilen destekler iç ve dıştan dize ekstra destek sağlar. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır



N-35 Neopren Dizlik Menteşeli

4mm. Neoprenden yapılan dizliğe diz anatomisine uygun 5° şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmiş, dizliğin yanlarına kolondan cepler dikilmiştir. Cepler içerisine presle standart olarak basılmış metal menteşeler yerleştirilmiştir. Üstte ve altta olmak üzere iki adet welcroband dizi boydan boya saracak şekilde dikilmiştir. Avrupa'da yapılan klinik araştırmalar neticesinde dizliğin dizden kaymasını engellemek hedefiyle welcrobandlar için en uygun noktalar bulunmuştur. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma bant ile kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, diz travmalarında, diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, diz Osteoartritinde, diz instabilitesinde (genu valgus ve varus deformitesinde), Artroskopi sonrasında kullanılır.



N-35A Neopren Dizlik Menteşeli Önü Açılabilir

4 mm. Neoprenden önü tamamen açık olarak yapılan dizliğin patella kısmı oyularak patellanın boşta kalması sağlanmıştır. Dizliğin yanlarına dikilen ceplerin içerisine presle standart olarak basılmış metal menteşeler yerleştirilmiştir. Patellanın üstünden 2 altından 2 olmak üzere toplam 4 noktadan welcrolarla ve tokalarla dizin tam sabitlenmesi sağlanmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir

Endikasyon: Operasyon ve Artroskopi ameliyatı sonrasında özellikle şiş ve sargılı dizlerin sabitlenmesinde kullanılır.

N-36 Neopren Dizlik Menteşeli ve Çapraz Bantlı

N-35 Menteşeli dizliğe ilave olarak diz çapraz bağlarına baskı uygulayacak şekilde çapraz elastik bantlar yerleştirilmiştir.

Endikasyon: Çapraz ve yan bağ zorlanmalarında, diz travmalarında, diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, diz Osteoartritinde, diz instabilitesinde (genu valgus ve varus deformitesinde), bağ ameliyatları sonrasında kullanılır.



N-37 Neopren Dizlik Açı Ayarlı

4mm. Neoprenden yapılan dizliğe diz anatomisine uygun 5° şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmiştir. Açı ayar mekanizması dizin 10, 20, 30, 60 ve 75 derecelik açılar arasında oynaması için ayarlanabilmektedir. Üstte ve altta ikişerden dört adet welcrobant dizi boydan boya saracak şekilde yerleştirilmiştir. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma bant ile kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: İç, dış ve çapraz bağ lezyonlarında, patella ve femur travmalarında, diz ekleminin yükünün azaltılması gerektiği durumlarda kullanılır.





N-38 Neopren Üst Baldırılık

4mm. Neoprenden yapılan baldırılığa üst baldırın anatomik şekli verilmiştir. Baldırılığın tüm kenarları kıvrıma bant ile kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Siyah renk olarak ve 6 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Üst baldır zorlanmalarında, Basit lif kopmalarında, uyluk kaslarının spazm ve güçsüzlüğünde, ameliyat sonrasında, fizik tedavide, spor aktivitelerinde kullanılır.

N-39 Neopren Alt Baldırılık

4mm. Neoprenden yapılan baldırılığa alt baldırın anatomik şekli verilmiştir. Baldırılığın tüm kenarları kıvrıma bant ile kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Üstte tek welco ile kapanan açıklık baldırılığın kolay giyimini sağlamaktadır. Siyah renk olarak ve 6 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Alt baldır zorlanmalarında, Basit lif kopmalarında, kas ezilmelerinde, ameliyat sonrasında, fizik tedavide, spor aktivitelerinde kullanılır.



N-40 Neopren El Bilekliği

3 mm. kalınlığında neoprenden dikdörtgen şeklinde kesilen bilekliğin çevresi ince kıvrıma lastik ile kaplanmıştır. Bir ucuna üçgen şekli verilmiş üçgenin ucuna dikilen welcro ile geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Siyah renk ve tek boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Bilek burkulmasında, travma sonrası ağrılarda, bileğin gücünü arttırmak için, ameliyat sonrasında ve spor aktivitelerinde kullanılır.



N-41 Metecarpial El Bilekliği

3 mm. neoprenden baş parmak geçecek yeri kalıpla delinmiş olarak yapılan bilekliğiğin çevresi ince kıvrıma ile kaplanmıştır. Dikilen welcrolarla geniş bir ayar mekanizması bulunduğuundan tek boy olarak ve siyah renkte üretilmiştir.

Endikasyon: Bilekte ve carpusta sabitlemeyi sağlar. Bilek ve carpustaki travma sonrasında, ağrılarda, ameliyat sonrasında, Carpal tünel sendromunda kullanılır.

N-42 El Baş Parmak Tespit Ateli

3 mm neoprenden baş parmağı kaplayıp bilekte birleştirilecek şekilde üretilen atelin baş parmak bölgesinde alüminyum balenin takıldığı cebi vardır. Diğer parmakları etkilemeden baş parmağı nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder.

Endikasyon: Baş parmak kas ve bağ zorlanmalarında, operasyon sonrasında kullanılır.



N-43 El Bilek Ateli

3 mm. neoprenden baş parmağı açıkta bırakacak şekilde üretilen atelin kapanması üstte 4 ayrı noktadan dikilmiş welcrolarla yapılmaktadır. Kalıplarla standart şekil verilmiş alüminyum destekler cep içerisine yerleştirilmiştir. Cepler her iki yönde dikildiğinden alüminyum desteğin takılacağı cebe göre sağ veya sol olarak kullanılabilir. El bileğini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 5 ayrı boyda üretilmiştir.

Endikasyon: El bileği burkulma ve ağrılarında, kas ve bağ zorlanmalarında, Carpal Tünel Sendromunda, Operasyon sonrasında kullanılır.





N-43A Neopren El Bilek Ateli Anatomik

3 mm. neoprenden üretilen atelin baş parmak kısmı açıktır. 4 ayrı noktadan welcroyla birleştirilen atelin kesiminde ve dikiminde bileğin anatomik şekli verilerek bileğe tam oturması sağlanmıştır. Kalıplarla standart şekil verilmiş alüminyum destekler cep içerisine yerleştirilmiştir. El bileğini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 5 ayrı boyda üretilmiştir. Sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği burkulma ve ağrılarında, kas ve bağ zorlanmalarında, Carpal Tünel Sendromunda, Operasyon sonrasında kullanılır.

N-43B Neopren El Bilek Ateli Bilek Destekli

3 mm. neoprenden baş parmak geçecek kısmı kalıpla yuvarlak olarak delinerek üretilen atelin kapanması üstte boydan boyda dikilmiş welcrolarla yapılmaktadır. Bileği boydan boyda saran welcro bant ekstra destek sağlamaktadır. Kalıplarla standart şekil verilmiş alüminyum destek cep içerisine yerleştirilmiştir. El bileğini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 5 ayrı boyda üretilmiştir. Sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği burkulma ve ağrılarında, kas ve bağ zorlanmalarında, Carpal Tünel Sendromunda, Operasyon sonrasında kullanılır.



N-43C Neopren El Bilek Ateli Alman Modeli

El bilek anatomisine uygun olarak 3 mm. neoprenden kesilen ateli kapanması iki noktadan welcro ile yapılmaktadır. Atele bilek kısmından boydan boyda saran welcro bantla ekstra destek verilmiştir. Welcrolar plastik tokalardan dönerek çektirme yaparak atelin bileğe tam oturmasını sağlamaktadır. Kalıplarla standart şekil verilmiş alüminyum destek cep içerisine yerleştirilmiştir. El bileğini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 4 ayrı boyda üretilmiştir. Sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği burkulma ve ağrılarında, kas ve bağ zorlanmalarında, Carpal Tünel Sendromunda, Operasyon sonrasında kullanılır.

N-43D Ön Kol Ateli



El bilek ateline göre daha uzun olarak 3 mm. neoprenden üretilen atel ön kol bölgesini kaplar. 5 ayrı noktadan welcrolarla kapanması yapılmaktadır. Kalıplarla standart şekil verilmiş alüminyum destek cep içerisine yerleştirilmiştir. Ön kolu nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 5 ayrı boyda üretilmiştir. Sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: Ön kol ve el-bilek travmalarında, ön kol istirahatını gerektiren durumlarda kullanılır.

N-44 El Bilek Ateli Başparmak Tespitli

3 mm. neoprenden uçları açık, baş parmak ayrı eldiven gibi dikilen atelin çevresi ince kıvrırma lastikle kaplanmıştır. Baş parmağın kenarına ince kolonla cep dikilmiş ve bu cebe alüminyum destek yerleştirilmiştir. Siyah renk olarak 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Baş parmaktaki romatizmadan dolayı gelişen ağrılarda, baş parmağı dengelemek ve sabitlemek gerektiği durumlarda kullanılır.



N-44A El Bilek Ateli Başparmak Tespitli - Uzun



3 mm. Neoprenden hem el-bileği hem de baş parmağı immobilize edecek şekilde tasarlanmıştır. Baş parmağı da kaplamaktadır. El bileği istirahat pozisyonunda tutmak için alttan, parmağı istirahat pozisyonunda tutmak için yandan cepler içerisine alüminyum destekler yerleştirilmiştir. Siyah renk olarak 5 ayrı boyda üretilmiştir. Sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği ve baş parmak kas ve bağ zorlanmalarında, De Quervien tendinitinde, Carpal Tünel sendromunda, Operasyon sonrasında, kas zayıflığı ve spastisite nedeniyle el bileği ve baş parmak kontraktürlerini önlemek amacıyla kullanılır.



N-45 Neopren Epicondylit Bandaj

3 mm. Neoprenden üretilen bandajın medial ve lateral epikondilite gelen bölgesinde özel ped bulunmaktadır. Welcro ile bireysel basınç ayarı kolaylıkla yapılan atelin 5 ayrı boyu mevcuttur. Siyah renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Epikondilit iltihaplanmasında, Tenisçi / Golfçü dirseğinde ve spor aktivitelerinde kullanılır.

N-46 Neopren Dirseklik

3 mm. Neoprenden dirsek anatomisine uygun olarak dikilen dirsekliğin tüm kenarları ince kıvrırma bantla kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü arttırılmıştır. Siyah renk olarak ve 5 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Dirsek travmalarında, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonrası iyileşme sürecinde ve spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.



N-47 Neopren Tennis Elbow Dirsekliği

3 mm. Neoprenden dirsek anatomisine uygun olarak dikilen dirsekliğin tüm kenarları ince kıvrırma bantla kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü arttırılmıştır. Epikondilite gelen bölgeye boydan boya dikilen welcro bant ile bireysel basınç ayarı kolaylıkla yapılabilir. Siyah renk olarak ve 5 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Dirsek travmalarında, Dirsek Epikondilit ve Bursitinde, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonrası iyileşme sürecinde ve spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.



N-48 Epicondylit Destekli Dirseklik

3 mm. Neoprenden dirsek anatomisine uygun olarak dikilen dirsekliğin tüm kenarları ince kıvrırma bantla kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü arttırılmıştır. Lateral ve medial epikondilite gelen bölgeye diki- len iki adet ped ekstra kompresyon sağlamaktadır. Siyah renk olarak ve 5 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Dirsek travmalarında, Dirsek Lateral ve Medial Epikondilitinde, Bur- sitinde, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonra- sı iyileşme sürecinde ve Artroskopi sonrasında kullanılır.

N-48A Menteşeli Dirseklik

3 mm. Neoprenden dirsek anatomisine uygun olarak dikilen dirsekliğin tüm kenarları ince kıvrırma bantla kaplanmış, birleştirmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü arttırılmıştır. Dirseğin lateral ve medial bölgelerine dikilen kı- lıflar içerisine özel kalıplarla basılmış metal menteşeler takılarak dirseğin immobili- zasyonu sağlanmıştır. Siyah renk olarak ve 5 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Dirsek travmalarında, Dirsek Lateral ve Medial Epikondilitinde, Bur- sitinde, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonra- sı iyileşme sürecinde ve Artroskopi sonrasında kullanılır.



N-48B Dirsek Rom Ortezi (Dirsek Kontraktür Ortezi)

Plastikten dirsek altı ve dirsek üstü bölge için basılmış destekler ve bağlantının aç- ı ayarlı eklemlerle yapılmasıyla üretilmiştir. Atelin içi kısımları süngerli kumaş ile kap- lıdır. Eklem 10 derecelik değişebilen açılarla 0-120 derece arasında ayarlanması mümkündür. Kilitler sayesinde dirseği istenen açıda tespit edebilir. Atel dirsek üs- tünden 2 dirsek altından 2 olmak üzere 4 noktadan 5 cm'lik welcro ile sabitlenebil- mektedir.

Endikasyon: Dirsek ameliyatı sonrasında, dirsek kontraktürünü önlemede, dirseğin ekstansiyon ve fleksiyon kontrolünde Uzman Doktor tavsiyesiyle kullanılır.



N-49 Neopren Ayak Bilekliği 8 Tipi

3 mm. Neoprenden bandaj şeklinde üretilen bilekliğin her iki ucuna welcro dikilerek sabitlenmesi sağlanmıştır. Topuğu açıkta bırakacak şekilde 8 tipinde bileğe sarılan bandajın ayakkabıyla birlikte kullanılması mümkündür. Siyah renk ve 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında bileği desteklemek ve ağrıyı hafifletmek için kullanılır.

N-50 Neopren Ayak Bilekliği

3 mm. Neoprenden “topuk açıkta kalacak şekilde üretilen bileklik ayakkabı içinde kullanılabilir. Siyah renk ve 3 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında bileği desteklemek ve ağrıyı hafifletmek için kullanılır.



N-51 Neopren Ayak Bilekliği Welcrolu

3 mm. neoprenden üretilen bilekliğin kapanması önde 5 ayrı noktadan dikilen welcrolarla yapılmaktadır. Bileklik siyah renk ve 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında bileği desteklemek ve ağrıyı hafifletmek için kullanılır.

N-51A Neopren Ayak Bilekliği Welcrolu 8 Bandajlı

3 mm. Neoprenden üretilen bilekliğin kapanması önde 5 ayrı noktadan dikilen welcrolarla yapılmaktadır. Bileklik takıldıktan sonra ayağı sekiz şeklinde saran elastik bandajın bulunduğu bileklik siyah renk ve 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında bileği desteklemek ve ağrıyı hafifletmek için kullanılır.



N-52 Neopren Ayak Bilekliği Balenli

3 mm. Neoprenden üretilen bilekliğin kapanması önde 5 ayrı noktadan dikilen welcrolarla yapılmaktadır. Ayak bileğini lateral ve medialden destekleyen, cepler içerisine yerleştirilmiş balenleri mevcuttur. Bileklik siyah renk ve 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Akut ve kronik ayak bileği burkulmalarında, ligament instabilitesinde, alçı sonrası destekleyici olarak, operasyon öncesi ve sonrasında kullanılır.



N-52A Neopren Ayak Bilekliği Balenli + 8 Bandajlı

3 mm. Neoprenden üretilen bilekliğin kapanması önde 5 ayrı noktadan dikilen welcrolarla yapılmaktadır. Ayak bileğini lateral ve medialden destekleyen, cepler içerisine yerleştirilmiş balenleri mevcuttur. Bileklik takıldıktan sonra ayağı sekiz şeklinde saran elastik bandajın bulunduğu bileklik siyah renk ve 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Akut ve kronik ayak bileği burkulmalarında, ligament instabilitesinde, alçı sonrası destekleyici olarak, operasyon öncesi ve sonrasında kullanılır.





N-53 Neopren Ayak Bilekliği Silikon Destekli

3 mm. Neoprenden üretilen bileklik çorap şeklinde giyilmektedir. Medial ve lateralde bulunan özel anatomik pedlerle ayak bileğine destek sağlar, ödemi çözer, dolaşımı hızlandırır, ayak bileğine koruma sağlar. Siyah renk ve 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Akut ve kronik ayak bileği burkulmalarında, ligament instabilitesinde, yumuşak doku travmalarında, spor aktiviteleri sırasında kullanılır.

N-53A Neopren Ayak Bilek Stabilizörü (Plastik Destekli)

3 mm. Neoprenden üretilen bilekliğin kapanması önde 4 ayrı noktadan dikilen welcrolarla yapılmaktadır. Medial ve lateralde bulunan cepler içerisine yerleştirilen özel anatomik destekler ile tam stabilite sağlar. Siyah renk ve 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Akut ve kronik ayak bileği burkulmalarında, ligament instabilitesinde, alçı sonrası destekleyici olarak, operasyon öncesi ve sonrasında kullanılır.



N-53B Neopren Bağcıklı Ayak Bilekliği

Neoprenden yapılan bilekliğin sağ ve sol yanlarına koyulan plastik balenlerle bileği tam kavraması tasarlanmıştır. Önde açılan deliklere kapsül takılmış, kapsüllerden geçirilen bağcıkla geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Siyah renk olarak 5 değişik boyda üretilmiştir.

Endikasyon: Ayak bileği burkulmalarında, ameliyat ve alçı sonrasında kullanılır.



N-54 Neopren Omuz Bandajı

3 mm. Neoprenden humerusa geçecek şekilde dikilen bandaj koltuk altından vücuda sabitlenmektedir. Welcrolu geniş bir ayar mekanizması mevcut olan omuz bandajının 5 ayrı boyu ve sağ sol ayrımı vardır. Siyah renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Omuz travmaları sonrasında, operasyon öncesi ve sonrasında, omuz bursitlerinde, omuz yaralanmalarında kullanılır.

N-57 Neopren Stable Açık Ayarlı Dizlik

4mm. Neoprenden yapılan dizliğe diz anatomisine uygun 5° şekil verilmiştir. Açık ayar mekanizması ile diz 10, 20, 30 derecelik ekstansiyon 60 ve 75 derecelik fleksiyon aralıklarında ayarlanabilmektedir. Üstte ve altta ikiye bölünmüş dört adet welcrobant diz boyundan boyuna saracak şekilde yerleştirilmiştir. Patellanın üst kısmı önde tamamen açık bırakılarak dizliğin kolaylıkla giyilmesi sağlanmıştır. Dizliğin tüm kenarları kıvrıma bant ile kaplanmış, birleştirilmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: İç, dış ve çapraz bağ lezyonlarında, patella ve femur travmalarında, diz ekleminin yükünün azaltılması gerektiği durumlarda kullanılır.



N-59 Neopren Yüzme Maskesi

3 mm. Neoprenden kulakları kapatacak şekilde 3 boy olarak kesilen maskenin her iki ucuna dikilen welcro ile ayar mekanizması sağlanmıştır.

Kullanıldığı Yerler: Kulak ameliyatları sonrasında, banyoda, havuzda kulağa su kaçmasının istenmediği durumlarda ve kulakları sıcak tutmak için kullanılır.



N-60 Neopren Göz Maskesi (Uyku Bandı)

3 mm. neoprenden gözlük şeklinde kesilen maskenin iki ucuna dikilen welcro ile bağlantı sağlanmıştır. Siyah renk olarak üretilmiştir.

Kullanıldığı Yerler: Uyku problemlerinde, gözün dinlendirilmesi için, göz torbalarının giderilmesi için kullanılır

N-61 Neopren Boyunluk

3 mm. neoprenden yapılan boyunluğun kapanması önde welcroyla yapılmaktadır. Siyah renk ve 5 boy olarak üretilmiştir.

Kullanıldığı Yerler: Boyun tutulmalarında kullanılan boyunluk ağrıyı azaltır, boyunu sıcak tutar.



Neopren Ürünler



N-62 Neopren Yüz Maskesi

3 mm. Neoprenden enseyi ve kulaklar ile birlikte başı kaplayacak şekilde kesilen maskenin çeneye gelen kısmı çene kavisi verilerek birleştirilmiştir. Enseden ve başın üstünden welcro ile sabitlenen maskenin 5 değişik boyu vardır. Siyah renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Yüz ve çene ameliyatları sonrasında, kulak ameliyatları sonrasında koruyucu olarak kullanılır.

N-63 Patellar Tendon Brace

3 mm. Neoprenden patellayı alttan desteklemek amacıyla üretilmiştir. Küçük bir bölgede kullanıldığından dizin hareketini kısıtlamaz. Patellanın altına gelen kısmına hilal şeklinde dikilen ekstra destek diz kapağı tendonunun yükünü azaltır. Siyah renk olarak ve 5 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Diz eklemi instabilitesinde, Patello-femoral ağrılarda, Mb Schlatter ve Jumper's knee'de kullanılır.



N-63A Patellar Dizlik

3 mm. Neoprenden yapılan dizlik kısa olduğundan dizin hareketini fazla kısıtlamaz. Diz kapağını yana sabitleyici pedi welcro ile kolaylıkla ayarlanır.

Endikasyon: Dizin yükünü azaltır ve destekler. Patello-femoral problemlerde ve ön diz ağrılarında kullanılır.



N-64 Termal Şort

Bel ve kalçanın anatomik yapısına göre 2 mm neoprenden kesilen şort, 5 ayrı parçadan oluşmaktadır. Ağ kısmında, yan kısımlarda ve bel kısmında yapılan birleştirme-ler Mauser lock birleştirme makinesiyle yapıldığından potluk ve üst üste binme görülmez. Dizlere gelen kısımlar ve bele gelen kısmın kenarları ince kıvrıma lastik ile kaplanmıştır. Şortun kolay giyilmesini sağlamak için bele fermuar dikilmiş, fermuarın üstüne gelen kısımda 4 cm'lik welcro dikilmiş kapak koyulmuştur. Siyah renk olarak ve 7 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Adduktor kas zorlanmalarında ve çekmelerinde, enflamasyon durumlarında kalça, kasık yırtıklarında ve hassasiyetlerinde, fizyoterapide kullanılır. Ayrıca karın, bel, kalça bölgesinin zayıflamasında terleme yoluyla, selülitlerin giderilmesinde de uyguladığı basınçla etkili olur.





N-64A Neopren Termal Yelek

2mm. Neoprenden yelek şeklinde üretilmektedir, kolsuzdur. Önde boydan boya koyulan fermuar ile kolaylıkla giyilebilir. Vücudun üst kısmını sıcak tutarak kas esnekliğini sağlar.

Kullanıldığı Yerler: Soğuk yerlerde yapılan sportif faaliyetlerde ısı kaybından dolayı sakatlık oluşumunu engeller. Ayrıca vücudun üst bölgesinin zayıflatılmasında terleme yoluyla etkili olur.



N-65 Neopren Motocros Maskesi (Kar Maskesi)

3 mm. Neoprenden yüz ve boyun anatomisine uygun olarak kesilen maskenin burun üstüne gelen kısmına burun delikleri açık kalacak şekilde boşluk bırakılmış, ağza gelen kısma küçük delikler açılarak nefes alma imkanı sağlanmıştır. Arkadan kapanma iki uca boydan boya dikilen 4cm'lik erkek ve dişi welcrolar ile sağlanır.

Kullanıldığı yerler: Özellikle soğuk havalarda ve soğuk bölgelerde yüzü ve boynu soğuktan korumak amacıyla kullanılır. Motosiklet kullanıcıları, kayakçılar, askeri birlikler, motorlu polisler gözlük altına veya kask altına bu maskeyi takarak soğuktan, rüzgardan, kar ve yağmurdan korunurlar.



N-68 Kulak Ameliyat Bandı

3 mm. Neoprenden kulakları kapatacak şekilde 3 boy olarak kesilen maskenin her iki ucuna dikilen welcro ile ayar mekanizması sağlanmıştır. Kulağa gelen kısma kulak kavisi verilerek birleştirilmiştir. Siyah renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Kulak ve parotis ameliyatları sonrasında koruyucu olarak kullanılır.



N-70 Neopren Kol Askısı

Neoprenden yapılan askı üçgen şeklinde olup kolun tamamını içine alacak şekilde dizayn edilmiştir. Askının tamamını kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sağlamaktadır. Tek boy olarak üretilmekte olup sağ sol ayırımı yoktur.



V-6 K lotlu Varis  orab 

Varis  orapları lycradan trikotaj imalat  olup diki sizdir.  effaftır.  oraplara doku-
ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz  st nde bacağın anatomik  ekli veril-
mi tir. Esnekliğı bozulmayacak  ekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı doku-
nan  orapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg ba-
sın  saėlamaktadır. Ayak bileğinde y ksek olan basın  azalarak  st b lgelerde d  e-
cek  ekilde bilgisayar kontroll  makinelerde  retilmi tir. İnceliğıyle rahat, hareket-
leri kısıtlamadan kullanılan  orap, g  lendirilmi  topuk ve u   zelliklerine sahiptir.
Ten rengidir. K lotlu,  oraplar d nya standartlarına g re 5 boy olarak  retilmekte-
dir.

V-7 Diz st  Varis  orab 

Varis  orapları lycradan trikotaj imalat  olup diki sizdir.  effaftır.  oraplara doku-
ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz  st nde bacağın anatomik  ekli veril-
mi tir. Esnekliğı bozulmayacak  ekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı doku-
nan  orapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mmHg ba-
sın  saėlamaktadır. Ayak bileğinde y ksek olan basın  azalarak  st b lgelerde d  e-
cek  ekilde bilgisayar kontroll  makinelerde  retilmi tir. İnceliğıyle rahat, hareket-
leri kısıtlamadan kullanılan  orap, g  lendirilmi  topuk ve u   zelliklerine sahiptir.
Ten rengidir. Diz  st   oraplar d nya standartlarına g re 5 boy olarak  retilmekte-
dir.



V-7A Diz st  Varis  orab  Silikonlu

Varis  orapları lycradan trikotaj imalat  olup diki sizdir.  effaftır.  oraplara doku-
ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz  st nde bacağın anatomik  ekli veril-
mi tir. Esnekliğı bozulmayacak  ekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı doku-
nan  orapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mmHg ba-
sın  saėlamaktadır. Ayak bileğinde y ksek olan basın  azalarak  st b lgelerde d  e-
cek  ekilde bilgisayar kontroll  makinelerde  retilmi tir. İnceliğıyle rahat, hareket-
leri kısıtlamadan kullanılan  orap, g  lendirilmi  topuk ve u   zelliklerine sahiptir.
Ten rengidir. Ağız kısmındaki silikon sayesinde  orabın a ağıya kayması engellenir.
 oraplar d nya standartlarına g re 5 boy olarak  retilmektedir.





V-8 Dizaltı Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek ve baldırın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.

V-9 Light Külotlu Varis Çorabı

Külotlu light modeli daha şeffaf ve daha ince olup 40 den 8/11 mm Hg basınç sağlamaktadır. %84 polyamid %16 elastan içermektedir. 5 değişik boyu mevcuttur.



Varis Çorapları



V-10 Unisex Dizaltı Varis Çorabı

Erkek diz altı modeli 14/18 mmHg basınç uygulamakta olup %84 polyamid %16 elastan içermektedir. Siyah-gri-lacivert renk alternatifleri erkekler için sunulmaktadır. 5 değişik boyu mevcuttur.



V-11 Hamile Varis Çorabı - Light

Hamile modeli 140 den 18 / 22 mm Hg basınç sağlamaktadır. %77 polyamid %23 elastan içermektedir. Karın bölgesinde hamilelik dönemi ilerledikçe uyum sağlayacak esnek bölüm mevcuttur.

Kullanıldığı Yerler: Varis ameliyatlarından sonra koruyucu olarak,thrombosis, varisli venler ve kompresyon gerektiren durumlarda kullanılır. Doktorlar damarları variskostan korumak, diğer damar problemlerini önlemek, sıkıntıyı hafifletip rahatlatmak için ve ağrıyan bacaklar için giyilmesini önermektedirler.

Kullanılışı: Çorap parmak ucundan başlayarak giyilir. Bacaklara doğru hafifçe kaydırılarak fazla sert çekmeden ve zorlamadan giyilir.

Yıkama Talimatı: Azami 30 derecelik ılık su ile çitilemeden hafif bastırmalar ile yıkanır. Bol soğuk su ile durulanır, bükülmeden el ile bastırılarak suyu sıkılır. Çamaşır suyu beyazlatıcı kullanılmaz. Ütülenmez. Kuru temizleme yapılmaz.

Uyarı: Varis çoraplarının uzun ömürlü olması, daima giyerken ve çıkarırken gösterilen itina ya bağlıdır. Uzun el ve ayak tırnakları ve sivri maddeler varis çorapları için tehlikelidir

V-12 Antiemboli Çorabı Uzun

Pamuklu Elastan iplikten dizüstü olarak üretilmiş olup burun kısmı açıktır. Dizüstüne gelmektedir. 18 mm Hg basınç uygulayan çorap beyaz renktir. Özellikle kalp damar ameliyatları sonrasında kullanılmaktadır. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.



V-12A Antiemboli Çorabı Belden Bağlamalı

Pamuklu Elastan iplikten külotlu olarak üretilmiş olup burun kısmı açıktır. 18 mmHg basınç uygulayan çorap beyaz renktir. Özellikle kalp damar ameliyatları sonrasında kullanılmaktadır. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Sağ sol ayırımı vardır.





V-13 280 Den Dizeden Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku-
ma esnasında ayak, bilek ve baldırın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulma-
yacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulun-
makta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan
basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üre-
tilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş
topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy ola-
rak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.

V-14 280 Den Dizüstü Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku-
ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli veril-
miştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polya-
mid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak
bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kon-
trollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan
çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya stan-
dartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri
vardır.



V-15 280 Den Külötlü Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku-
ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli veril-
miştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı doku-
nan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg ba-
sınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düş-
cek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareket-
leri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir.
Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.





V-16 280 Den Silikonlu Dizüstü Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku- ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli veril- miştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polya- mid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kon- trollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Ağız kısımın- daki silikon sayesinde çorabın aşağıya kayması engellenir. Çoraplar dünya standart- larına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.

V-17 Class 3 Külotlu Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku- ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli veril- miştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polya- mid %23 Elastan bulunmakta ve Class 3 26-32 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kon- trollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya stan- dartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.



V-18 Class 3 Dizüstü Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku- ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli veril- miştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. Burun kısmı kapalıdır.İtalyan tarzı doku- nan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve Class 3 26-32 mmHg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısı- tlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve bur- nu kapalı modelleri vardır.



V-19 Class 3 Dizaftı Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek ve baldırın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliğı bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve Class 3 26-32 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğıyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Kùlotlu, diz üstü ve diz altı modeli olan çoraplar dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.

V-20 280 Den Burnu Açık Kùlotlu Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliğı bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğıyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk özelliklerine sahiptir. Burnu açık olarak üretilmiştir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.



V-21 Kol Varis Çorabı

Bilekten başlayıp omuza kadar uzanan çorap elastik ve yumuşak dokumasından dolayı gün boyu rahatlıkla kullanılabilir. Ödem tedavisinde kullanılan çorabın 5 farklı boyu bulunmaktadır.

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça)

Boyunluklar 4 değişik ölçüde boyun anatomisine uygun olarak ve boyunu sabitleyecek şekilde 8 mm evadan üretilmiştir. Gırtlığa gelen kısım acil müdahaleye imkan verecek şekilde açık olup çeneye gelen kısma ısı ile şekil verilmiştir. Boyun-

luğun ön kısmına dayanıklılığı arttırmak için ısıyla şekillendirilmiş destek yerleştirilmiştir. MR, Tomografi ve röntgen çekimlerine engel olmamak için madeni materyal kullanılmayan boyunlukların takılıp çıkarılması welcro ile ve ayarlanabilecek şekilde olup boyunlukta havalandırma delikleri bulunmaktadır. 4 adet boyunluğu alabilecek şekilde fermuarlı muhafaza çantasına yerleştirilmiştir. Çanta turuncu renk, su geçirmeyen ve kolaylıkla yıkanıp, silinebilen materyalden yapılmıştır. Acil durumlarda ve hasta naklinde geçici boyun immobilizasyonu için kullanılır.



ALP-02 KED Acil Kurtarma Yeleği

Turuncu renk muşamba brandadan yapılan yelek içine açılan ceplere 22 adet preslenmiş deniz kontrplağının yerleştirilmesiyle yapılmıştır. Kaza ve doğal afet sonrasında omurgası zarar görmüş hastayı tamamen saracak şekilde tasarlanmıştır. Boyun desteği de yeleğe monte edilebilecek şekilde ürünle birlikte bulunmaktadır. Yelek kolaylıkla silinip yıkanabilmektedir.



ALP-03 Omurga Tahtası Büyük

Preslenmiş 16 mm. dayanıklı su geçirmez deniz kontrplağından yapılan omurga tahtasının boyu 185 cm'dir. Tahtanın kenarlarına 22 adet el girebilecek büyüklükte delikler açılmış olup ayrıca başın geldiği kısımda halat bağlanabilmesi için yuvarlak delik bulunmaktadır. Tahta içindeki çelik tellerin üstüne oynar başlıklı tokalar monteli 4 adet emniyet kemeri takılı olup tahta kolaylıkla yıkanıp silinebilecek şekilde boyanmıştır. Kaza ve doğal afetler sonrasında hasta naklinde kullanılır.






ALP-04 Omurga Tahtası Küçük

Preslenmiş 16 mm. dayanıklı su geçirmez deniz kontrplağından yapılan pediatrik omurga tahtasının boyu 69 cm dir. Tahtanın kenarlarında 6 adet el girebilecek büyüklükte delikler açılmış olup ayrıca üst kismada bir adet delik açılmıştır. Tahta içindeki çelik tellerin üstüne oynar başlıklı tokalar monteli 2 adet emniyet kemeri takılıdır. Tahta kolaylıkla yıkanıp silinebilecek şekilde boyanmıştır.

ALP-05 Omurga Tahtası Tekerlekli

Preslenmiş 16 mm. dayanıklı su geçirmez deniz kontrplağından yapılan omurga tahtasının boyu 185 cm'dir. Tahtanın kenarlarına 22 adet el girebilecek büyüklükte delikler açılmış olup ayrıca başın geldiği kısımda halat bağlanabilmesi için yuvarlak delik bulunmaktadır. Tahta içindeki çelik tellerin üstüne oynar başlıklı tokalar monteli 4 adet emniyet kemeri takılı olup tahta kolaylıkla yıkanıp silinebilecek şekilde boyanmıştır. 11x43 cm ebadında, üzerinde marka ve ürünün Acil Yardım Ürünü olduğu basılı yumuşak vinyllex kafa koyulacak yere yerleştirilmiştir. Omurga Tahtasının düz zeminde tek kişi tarafından taşınmasını sağlamak için 4 adet plastik teker tahtanın altına yerleştirilmiştir. Firmamız tarafından geliştirilen bu ürünümüzün taklitlerini engellemek için Türk Patent Enstitüsüne başvurularak Faydalı Model belgesi alınmıştır.

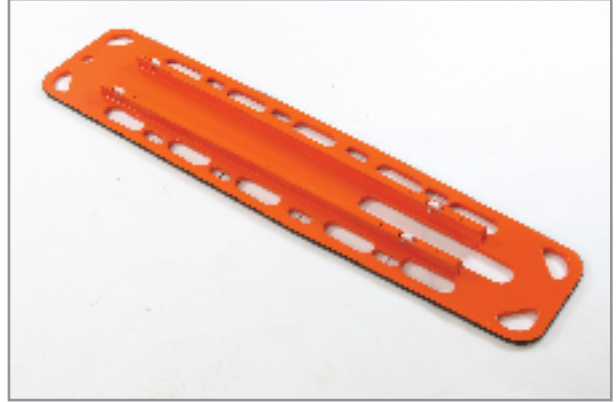

ALP-06 Muşamba Taşıma Sedyesi

220x75 cm ebadında turuncu renk muşamba brandadan çift kat olarak yapılmıştır. Branda üzerine yerleştirilen 5 adet boydan boya kemerle sağlamlığı artırılmış, 6 kişinin tutabileceği şekilde bağlantılar yapılmıştır. Özellikle apartman katlarından hasta naklinde ve sedyelerin kullanılmadığı dar ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.



ALP-07 Şişme Atel Seti (6 Parçalı)

Set içerisinde bacak ve kolun muhtelif bölgelerine uygulanabilecek şekilde tasarlanmış 6 adet süboplu dayanıklı plastikten yapılmış şişme atel bulunmaktadır. Ateller fermuarlı olduklarından kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ateller yıkanabilir, silinebilir çanta içerisindeki ceplere yerleştirilmiştir. Çanta içinde bir adet pompa veya şişirme hortumu bulunmaktadır. Acil durumlarda sabitleme amacıyla kullanılır.



ALP-08 Otopsi Önlüğü

Turuncu renk muşamba brandadan yapılan önlüğü boyuna geçirmek için kolon dikilmiş, bele takılan kolon ve ayarlı plastik tokayla da geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Otopsi gibi, gıda maddeleri üretimi gibi kanla ve sıvıyla iç içe bulunan durumlarda koruyucu önlük olarak kullanılır.



EX-01 Ceset Torbası

Siyah renk muşamba brandadan yapılan torbanın kapanması fermuarla yapılmaktadır. Boydan boya 3 ayrı noktadan saran kalın kolonlar ekstra taşıma emniyeti vermektedir. Sağ ve sol taraftan toplam 6 kişinin ceset torbasını taşıyabileceği şekilde el tutma yerleri ayarlanmıştır.



Kullanılan branda içinden geçen ipliklerle güçlendirildiğinden naylon ceset torbalarına göre daha sağlam daha dayanıklıdır.

O-47 Alüminyum Hazır Atel Büyük

Kolaylıkla şekil verilebilen iyi cins alüminyumun her iki yüzeyinin 3 mm ten rengi plastizot ile kaplanmasıyla üretilmiştir. 10,5 cm x 98 cm ölçülerindedir. Tüm vücut bölgelerinin sabitlenmesinde kullanılır. Makasla kesilebilir olduğundan kesilip parmak sabitlemelerinde de kullanılabilir.



O-47B Alüminyum Hazır Atel Küçük

Kolaylıkla şekil verilebilen iyi cins alüminyumun her iki yüzeyinin 3 mm ten rengi plastizot ile kaplanmasıyla üretilmiştir. 10,5 cm x 70 cm ölçülerindedir. Makasla kesilebilir olduğundan kesilip parmak sabitlemelerinde de kullanılabilir.



O-49 Alüminyum Kaburga Ateli



Kaburga Ateli hafif, rahat ve röntgende görünmezdir. Yüzeyi non-alerjik plasterle kaplanmış olup cilde zararsızdır. Atel kırık kaburganın yerinin tam olarak belirlenmesinden sonra kullanılmalıdır. Atel üzerinde yapılacak ayarlamalar sadece incinmemiş tarafta yapılmalıdır. Sadece bükülerek ayarlanmalı, kesilmemelidir. Kaburga ateli 10 günlük tedavi için tek kullanımlıktır. Daha uzun süreli tedavide yenisi kullanılmalıdır.

Endikasyon: Kaburga kırıkları





XX-580

Yaralı Taşıma Ateli Seti

5 mm'lik evadan yapılan ateller vücudun 8 ayrı bölgesine (Boyun, bel, dirsek altı, dirsek üstü, diz altı, diz üstü, el bilek ve tüm bacak) uygulanabilecek şekilde yapılmış, atellerin üzerine boydan boya yapıştırılan 2 cm'lik welcrolar ile tek boy atelin küçük-büyük herkese uyması sağlanmıştır. Atel üzerine yeteri kadar havalandırma deliği açılmış, atel setinin kolay kullanılması ve saklanması için tüm set fermuarlı çanta içerisine yerleştirilmiştir. MR, Tomografi ve röntgen çekimlerine engel olmamak için atel üzerinde madeni materyal bulunmamaktadır. Kazalarda ve doğal afetlerde hasar gören bölgeyi sabitlemek için kullanılır.

Y-51 Üçgen Sargı Bandajı (Triangular Bandaj)

Dayanıklı beyaz renk pamuklu kumaştan üçgen şeklinde yapılan bandajın ölçüleri 93cm x 93cm x 133 cm dir. Bandajın üç kenarı da içe kıvrılıp dikilerek dayanıklılığı arttırılmıştır.

İlk yardım çantalarında ve tüm ilkyardım olaylarında kullanılmaktadır. Kullanım alanı çok geniştir.





S-1 Silikon Tabanlık 3/4

Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanlık ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kişiler ve ağırlı ayaklar için ayakkabı içine kolaylıkla takılması için yarım tabanlık şeklinde tasarlanmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir. Su ile kolaylıkla yıkanabilir. Kadın ve erkek modeli mevcuttur.



S-2 Silikon Tabanlık 4/4 İnce

Yüksek kaliteli silikondan ince olarak üretilen tabanlık ayakkabı içinde az yer kapladığından özellikle bayan ayakkabıları için idealdir. Diz, bacak ve kalça ağrılarının azaltılmasında ve rahat yürüyüş sağlamada kullanılır. 4 boy olarak üretilmektedir. Su ile kolaylıkla yıkanabilir.



S-3 Silikon Tabanlık 4/4 Mavi Noktalı

Yüksek kaliteli yumuşak ve sert olmak üzere iki farklı silikondan üretilmiştir. Mavi renkli bölgeler ekstra yumuşak olarak hazırlanmış olup kalça, metatarsal bölge ve topuk ağrıları olanlarda idealdir. 6 boy olarak üretilmektedir. Su ile kolaylıkla yıkanabilir.



S-3A Ekonomik Silikon Tabanlılık

S-3 kodlu silikon tabanlıktan farklı olarak daha az dayanıklı 2. kalite silikondan üretilerek kısa süreli kullanımlarda hastanın daha ekonomik ürün kullanması sağlanmıştır. Kalça, metatarsal bölge ve topuk ağrıları olanlarda idealdir. 4 boy olarak üretilmektedir. Su ile kolaylıkla yıkanabilir.



S-4 Silikon Epin Yastığı Oluklu

Yüksek kaliteli silikondan üretilen topukluk Epin Calcaneus bölgesi boşluk olarak tasarlanmıştır. Epin yastığı veya topukluk olarak kullanmak mümkündür. 3 boy olarak üretilmektedir. Su ile kolaylıkla yıkanabilir.



S-5 Silikon Topukluk Mavi Noktalı

Yüksek kaliteli yumuşak ve sert olmak üzere iki farklı silikondan üretilmiştir. Mavi renkli bölgeler ekstra yumuşak olarak hazırlanmış olup özellikle topuk dikenini tedavisinde etkilidir. 3 boy olarak üretilen topukluk ağrıyı hafifletir, rahat yürüyüş sağlar. Su ile kolaylıkla yıkanabilir.



S-5A Ekonomik Silikon Topukluk

S-5 kodlu silikon topukluktan farklı olarak daha az dayanıklı 2. kalite silikondan üretilerek kısa süreli kullanımlarda hastanın daha ekonomik ürün kullanması sağlanmıştır. 3 boy olarak üretilen topukluk ağrıyı hafifletir, rahat yürüyüş sağlar. Su ile kolaylıkla yıkanabilir.



S-8 Silikon Hallux Walgus Makarası

Yüksek kaliteli silikondan üretilen parmak arası makarası baş parmak ile ikinci parmak arasına takılarak parmağın duruş bozukluğunu düzeltmekte kullanılır. 3 boy olarak üretilir. Su ile kolaylıkla yıkanabilir.



S-9 Silikon Göğüs Protezi

Yüksek kaliteli silikondan üretilen göğüs protezi her iki tarafa da uygulanabilir. Sutyen bedenine göre 14 farklı boyu vardır. Ten rengi olarak üretilmektedir.



S-10 Protez Sütyeni

Silikon göğüs protezi kullanımı için özel olarak üretilmiştir. Sütyenin sağ ve sol tarafına pamuklu kumaştan dikilen ceplere göğüs protezi kolaylıkla yerleştirilebilir. Omuz bantları dayanıklı lastikten yapılan sütyenin beyaz ve ten rengi olmak üzere iki rengi mevcuttur.



S-21 Silikon Parmak Arası Seperatör

Parmak arası ayırıcısı %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Ayak parmakları arasına mükemmel bir şekilde oturur ve parmak arasındaki nasırların oluşturduğu sıkıntıyı giderir. 2 boy olarak üretilir.

Endikasyon:

Üst üste binmiş ayak parmaklarından korunma.
Parmak arası nasırlarında.



S-22 Silikon Metatars Pedi

Metatars pedi %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Metatarsal bölgeye mükemmel bir şekilde oturur ve ayakta oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlayarak Metatarsal bölgenin baskıya uğramasını engeller.



Endikasyon:

Ön ayak çöküklükleri ve zedelenmelerinde.
Metatarsal bölge nasırlarında.

S-23 Silikon Nasır Bandı - Büyük

Silikon Nasır bandı %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. Nasırlı bölgeyi açıkta bırakarak nasırlı kısma baskı uygulanmasını engeller. Hallux Valgus kemiği üzerine yerleştirilerek oluşan acıyı ve sürtünmeyi azaltır.



Endikasyonlar: Hallux Valgus Ayak nasırlarında.

S-24 Silikon Nasır Bandı Küçük

Silikon Nasır bandı %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. Nasırlı bölgeyi açıkta bırakarak nasırlı kısma baskı uygulanmasını engeller. Nasırların üzerine yerleştirilerek oluşan acıyı ve sürtünmeyi azaltır.

Endikasyonlar: Ayak nasırlarında.



S-25 Silikon Topuk Bandı

Silikon Topuk bandı %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. Topuk bölgesine yerleştirilerek oluşan acıyı ve sürtünmeyi azaltır.



Endikasyonlar: Topuk ve Ayakkabı vurmasında.

S-26 Silikon Bunion Koruyucu

Silikon Bunion Koruyucu %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. Birinci metatars-başparmak mafsalında meydana gelen ağrılı şişkinliği basınç ve sürtünmeden korur.



Endikasyon:
Hallux Valgus
Bunion

S-27 Silikon Metatars Pedi Ayağa Yapışan

Silikon Metatars Pedi %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. Metatarsal bölgeye mükemmel bir şekilde oturur ve ayakta oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlayarak Metatarsal bölgenin baskıya uğramasını engeller.

Endikasyon:

Ön ayak çöküklükleri ve zedelenmelerinde.
Metatarsal bölge nasırlarında.



Silikon Ürünler

S-28 Silikon Metatars Pedi Oval Yapışkanlı

Silikon Metatars Pedi %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. Metatarsal bölgeye mükemmel bir şekilde oturur ve ayakta oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlayarak Metatarsal bölgenin baskıya uğramasını engeller.



Endikasyon:

Ön ayak çöküklükleri ve zedelenmelerinde.
Metatarsal bölge nasırlarında.

S-29 Silikon El Terapi Topu

Silikon El Terapi topu %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. El kaslarını çalıştırmada ve el egzersizlerinde kullanılmaktadır. Çağımızda klavye ve mouse kullanımıyla artan sendromlarda kasları güçlendirip forma sokar.



Yumurta ve top şeklinde iki modeli mevcuttur.

Renklere göre sertlikleri değişmektedir.

Mavi-Yumuşak

Yeşil- Orta

Kırmızı- Sert

Endikasyonlar:

Felç sonrası rehabilitasyonda

El kasları zayıflığında

S-30 Silikon Metatars Padi Delikli

Metatars padi %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Metatarsal bölgeye mükemmel bir şekilde oturur ve ayakta oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlayarak Metatarsal bölgenin baskıya uğramasını engeller.

Endikasyonlar:

Ön ayak çöküklükleri ve zedelenmelerinde.

Metatarsal bölge nasırlarında.



S-31 Silikon Parmak Koruyucu Yüzük

Koruyucu yüzük %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Ayak parmaklarının üst üste binmesini engeller. Parmak ve tırnak lezyonlarını iyileştirir. Nasır oluşumunu engeller.



Endikasyonlar:

Parmak ve Tırnak yaralanmaları

Nasır.



S-32 Silikon Bunion Yastığı

Hallux Valgus Koruyucu yastık %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Hallux Valgus şişkinliğinin sürtünme ve basınçtan korunmasına yardım eder. Deri lezyonlarını engeller,acıları dindirir.

Endikasyon:

Hallux Valgus
Bunion

S-33 Silikon Parmak Desteği

Parmak desteği %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. Parmakların altına destek verir. Nasır oluşumunu engeller,acıları dindirir. Tek parçadan oluşan destek kolaylıkla takılıp çıkarılmasını sağlar. Plastizot ve deriden yapılmış muadillerine göre daha dayanıklı ve takılması kolaydır.

Endikasyon:

Çekiç parmak
Nasır



S-34 Yapışkanlı Silikon Ark Desteği

Silikon Ark Desteği yüksek kaliteli silikondan üretilmiştir. Ayağa gelen kısmı kumaşla kaplanmıştır. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. Ayak iç kavisine mükemmel bir şekilde oturur ve ayakta oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlar.

S-35 Yapışkanlı Silikon Metatars Desteği

Silikon Metatars Pedi yüksek kaliteli silikondan üretilmiştir. Ayağa gelen kısmı kumaşla kaplanmıştır. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. Metatarsal bölgeye mükemmel bir şekilde oturur ve ayakta oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlayarak Metatarsal bölgenin baskıya uğramasını engeller.





S-36 Yapışkanlı Silikon Boy İç-Dış Kama

Silikon Boy iç-dış kama yüksek kaliteli silikondan üretilmiştir. Ayağa gelen kısmı kumaşla kaplanmıştır. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. İsteğe bağlı olarak ayak iç veya dış kavisine koyulup ayakta oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlar.

S-37 Yapışkanlı Silikon Epin Yastığı

Silikon Epin yastığı yüksek kaliteli silikondan üretilmiştir. Topuğa gelen kısmı kumaşla kaplanmıştır. Epin Calcanien kemiğine denk gelen kısmında boşluk bulunmaktadır. Yapışkan bandajlar hipoallerjik yapışkan maddeden üretilmiştir. 3 boy olarak üretilen topukluk ağrısı hafifletir, rahat yürüyüş sağlar.



S-38 Kumaşlı Silikon Tabanlık

Silikon Ark Desteği yüksek kaliteli silikondan üretilmiştir. Ayağa gelen kısmı kumaşla kaplanmıştır. Ayak tabanına mükemmel bir şekilde oturur ve ayakta oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlar.

S-39 Delikli Silikon Tabanlık

Yüksek kaliteli yumuşak ve sert olmak üzere iki farklı silikondan üretilmiştir. Mavi renkli bölgeler ekstra yumuşak olarak hazırlanmış olup kalça, metatarsal bölge ve topuk ağrıları olanlarda idealdir. Taban düşüklüğü için ark takviyesi yüksek olarak üretilmiş olup silikon üzerindeki deliklerle ayağın havalandırması sağlanmıştır. Su ile kolaylıkla yıkanabilir.







P-1 Anatomik Boyun Yastığı Büyük

Sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yastık özel tasarlanan ergonomik şekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevşemesini sağlar. Fermuarlı, kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, yıkanabilen pamuklu kılıf cilde nefes aldırır ve yumuşaktır. Anatomik olarak yanlış bir uyuma pozisyonu baş ve boyun ağrılarına sebep olur. Yastık servikal omurgayı destekleyerek olası ağrı sebeplerini ortadan kaldırır. Yanlış yatmadan kaynaklanan horlamayı önler.

P-2 Anatomik Boyun Yastığı Küçük

Sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yastık anatomik şekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevşemesini sağlar. Fermuarlı, kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, yıkanabilen pamuklu kılıf cilde nefes aldırır ve yumuşaktır. Anatomik olarak yanlış bir uyuma pozisyonu baş ve boyun ağrılarının sebep olur. Yastık servikal omurgayı destekler ve kaslardaki acıyı omuz-boyun bölgesini gevşeterek hafifletir.



P-3 Anatomik Boyun Yastığı Çocuk

Çocukların ve minyon yapılı büyüklerin kullanması için tasarlanan yastığın tüm özellikleri Anatomik boyun yastığı ile aynı olup ebatları küçüktür.



P-4 Bel Yastığı Büyük

Sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yastık özel tasarlanan anatomik şekliyle doğru pozisyonda oturmayı sağlar. Fermuarlı, kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, yıkanabilen kılıf içerisine yerleştirilmiştir. Arkasında bulunan elastik bantla her türlü koltuğa sabitlenebilir. Evde, işte, seyahat sırasında doğru oturma pozisyonuyla ve doğru vücut duruşuyla bel ve sırt ağrılarını engeller veya hafifletir.

P-5 Bel Yastığı Küçük

Büyük bel yastığıyla aynı özelliklere sahip olan yastığın küçültülmüş ebatları özellikle arabada kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Arkasında bulunan elastik bantla her türlü koltuğa sabitlenebilir. Evde, işte, seyahat sırasında doğru oturma pozisyonuyla ve doğru vücut duruşuyla bel ve sırt ağrılarını engeller veya hafifletir.



P-6 Oturma Yastığı

Sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yastık ortası açık halka şeklinde üretilmiştir. Halkanın iç ve dış uçlarına eğim verilerek yere tam oturması sağlanmıştır. Lastikli, kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, yıkanabilen pamuklu kılıfla üstü kaplanmıştır. Hemoroidde(basur), dekubitüs yaralarında, kalça ağrılarında ve koksiks dejenerasyonlarında kullanılır. Uzun süreli oturarak çalışanlarda rahatlık sağlar.



P-7 Seyahat Yastığı

Sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten boyun anatomisine uygun olarak üretilen yastık boyuna geçirilip saracak şekilde tasarlanmıştır. Fermuarlı, çıkarılabilen, yıkanabilen elastik kumaştan yapılmış kılıf içerisine yerleştirilmiştir. Yolculuk esnasında boyna takılarak rahat bir seyahat sağlamakta ve uyku sırasında boynun savrulmasını engellemektedir. Şişme yastıklara karşı yumuşaklık ve dayanıklılığıyla üstünlük sağlamakta, patlama, delinme riski olmadığından ömür boyu kullanılabilir.

P-8 Ağırlıklı Bel Yastığı

Özellikle araçlarda bele destek verecek şekilde tasarlanmış olup ucundaki ağırlıkla istenilen noktadan omurgaya destek olması sağlanabilir. Doğru oturma pozisyonuyla bel ve sırt ağrılarını engeller veya hafifletir.



P-9 Visco Boyun Yastığı - Küçük

Su bazlı poliüretan malzemeden üretilen Visco yastık vücut ısıyla vücudun doğal hatlarına uygun şekil alır. Doğru uyuma pozisyonuyla rahat bir uyku sağlar. Fermuarlı, kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, yıkanabilen pamuklu kılıf cilde nefes aldırır ve yumuşaktır.



P-10 Visco Boyun Yastığı Büyük

Su bazlı poliüretan malzemeden üretilen Visco yastık vücut ısıyla vücudun doğal hatlarına uygun şekil alır. Büyük yastıklarda rahat eden kişiler için tasarlanmıştır. Doğru uyuma pozisyonuyla rahat bir uyku sağlar. Fermuarlı, kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, yıkanabilen pamuklu kılıf cilde nefes aldırır ve yumuşaktır.

P-11 Visco Tv Yastığı

Su bazlı poliüretan malzemeden üretilen Visco Tv yastığı boyuna geçirilip saracak şekilde tasarlanmıştır. Önündeki cırt bantla sabitlenmektedir. Fermuarlı, çıkarılabilen ve yıkanabilen kumaştan kılıf içerisine yerleştirilmiştir. Tv veya Bilgisayar ekranı karşısında boyuna takılarak rahatlık sağlamak, evde ve işyerinde cervical bölgeye ekstra destek vermektedir.



P-13 Visco Bel Yastığı

Su bazlı poliüretan malzemeden bele destek verecek şekilde üretilmiş olan Visco yastık vücutun doğal ısına göre vücudun şeklini alır. Fermuarlı, kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, yıkanabilen pamuklu kılıf cilde nefes aldırır ve yumuşaktır.



P-14 Visko Reflü Yastığı

Su bazlı poliüretan malzemeden üçgen şeklinde üretilen yastık başı yukarıda tutarak reflünün tedavisinde kullanılmaktadır. Üçgen prizmanın yüksek kısmı 25 cm. dir. Yaklaşık 45 derecelik açı sağlamaktadır. Yastığın eni 59 cm. Uzunluğu 68 cm. dir.

P-20 Visko Yatak Tek Kişilik 90x200x7cm

Su bazlı poliüretan malzemeden 90 cm. x 200 cm. x 7 cm. ölçülerinde üretilmekte olup yatağın üzerine serilerek kullanılmaktadır.

P-21 Visko Yatak Çift Kişilik 160x220x4cm

Su bazlı poliüretan malzemeden 160 cm x 220 cm x 4 cm ölçülerinde üretilmekte olup çift kişilik yatağın üzerine serilerek kullanılmaktadır.



P-22 Visko Oturma Yastığı

Visco'dan üretilen yastık ortası açık halka şeklindedir. Halkanın iç ve dış uçlarına eğim verilerek yere tam oturması sağlanmıştır. Lastikli,kolaylıkla çıkarılıp takılabilen, yıkanabilen pamuklu kılıfla üstü kaplanmıştır. Hemoroidde(basur),dekibitüs yaralarında,kalça ağrılarında ve koksiks dejenerasyonlarında kullanılır.Uzun süreli oturarak çalışanlarda rahatlık sağlar.

Genel Yıkama Talimatı:

Kılıflar 30 derecede (86 Fahrenheit) yumuşak bir deterjan kullanılarak yıkanabilir. Güneş ışığından, radyatör ısısından, elektrikli ütü ve benzerlerinden kaçının. Çamaşır suyu ve kuru temizleme kullanmayın.





Y-42 Muayene Masa Örtüsü (70x190cm)

Sıvı geçirmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 70x190 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla muayene masasında sabitlenmesi sağlanmıştır. Beyaz renk olarak üretilmektedir. Hasta Muayene masalarında koruyucu örtü olarak kullanılmaktadır.

Y-43 Yatak Koruyucusu (90x190cm)

Sıvı geçirmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 90x190 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla yatağa sabitlenmesi sağlanmıştır. Hasta karyolasının üzerine serilerek kan, idrar vb. sıvıların yatağa geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-44 Yastık Koruyucusu (45x65cm)

Sıvı geçirmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 45x65 cm. ebadında dikilen kılıfın çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Yastığın bir ucu kılıfın içine yerleştirildikten sonra diğer uç cebe yerleştirilerek yastığın tamamen kaplanması sağlanmaktadır. Yastığın kan, kusuk vb. sıvılarla kirlenmesini önlemek için kullanılır. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-45 Kuvöz Örtüsü (60x90cm)

Sıvı geçirmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 60x90 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Bebek kuvözlerinde sıvı koruyucu olarak kullanılmakta, beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-46 Sedye Örtüsü (60x120cm)

Sıvı geçirmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 60x120 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla sedyeye sabitlenmesi sağlanmıştır. Sedyelerde koruyucu örtü olarak kullanılır. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-47 Alez Önlük

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan kesilen önlüğün çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-48 Süngerli Yatak Koruyucusu (40x65cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 40X65 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. İçerisine yerleştirilen süngerle daha yumuşak olması sağlanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla yatağa sabitlenmesi sağlanmıştır. Hasta karyolasının üzerine serilerek kan, idrar vb. Sıvıların yatağa geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-52 Alez Muşamba Külot

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan külot şeklinde üretilmiş, bel ve bacak kenarlarına kıvrıma lastik dikilmiştir. Altına idrar kaçıran çocuklarda ve büyüklerde, felçli ve yatalak hastalarda idrarın dışarı çıkmasını engellemek için kullanılır.

Y-53 Alez Muşamba Külot Welcrolu

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan hazır çocuk bezi şeklinde üretilen külotün kapanması sağ ve solda bulunan welcrolarla sağlanmaktadır. Altına idrar kaçıran çocuklarda ve yaşlılarda, felçli ve yatalak hastalarda, yoğun adet kanaması olan bayanlarda koruyucu olarak kullanılır.



Y-54 Yatak Koruyucusu Çift Kişilik (170x190cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 170x190 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla yatağa sabitlenmesi sağlanmıştır. Hasta karyolasının üzerine serilerek kan, idrar vb. sıvıların yatağa geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



KA-1C KIDS Üiversal Korse

Çocuk anatomisine uygun olarak üretilmiştir. Arkada 2 adet flexible baleni bulunan korsenin tamamı özel dokunmuş elastik korse kumaşından yapılmıştır. Her iki uca enine ve boyuna dikilen 2'şer adet 5 cm'lik welcrolarla kolay kapama ve ayar yapma imkanı sağlanmıştır. Korse vücut ölçülerine göre 3 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Akut ve kronik lumbagoda, siyatikte, bel fıtıklarında, bel operasyonları ve diğer cerrahi operasyonlar sonrasında bel ve karın desteği olarak kullanılır.

KC-5 KIDS Cervical Color Sponj (Süngerli)

3 cm. kalınlığında 32 dansite süngerin ince pamuklu kumaşla kaplanmasıyla yapılan boyunlukta ekstra destek sağlayan polietilen bulunmaktadır. Süngerden daha dar olarak kesilen polietilen renkli kumaşa dikilerek süngerin boyuna daha stabil bir destek vermesi sağlanmıştır. Sponjun 5 cm'lik welcroyla sabitlemesi yapılır. 3 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.



KC-10 KIDS Nelson Color

Çocuklar için özel olarak şekillendirilmiş 12 mm ithal İngiliz plastizotundan renkli olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Özel olarak tasarlanan kalıp sistemiyle boyunluğun çift yönlü olarak kullanılması mümkündür. Uzun boyunlu çocuklarda uzun kısım yukarı gelecek şekilde, kısa boyunlu çocuklarda uzun kısım aşağıya gelecek şekilde kullanılabilir. Plastizot üzerine açılan 4 adet delikle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi artırılmıştır. Boyunluğun sabitlenmesi renkli welcro ile yapılmaktadır. Welcrolar özel yapıştırıcısıyla plastizota monte edildikten sonra uçlarının kalkmasına engel olmak için plastik rivetlerle sabitlenmektedir. 4 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.





KC-11 KIDS Philadelphia Color

Çocuklar için özel olarak şekillendirilmiş 12 mm. ithal renkli İngiliz plastizotundan iki parçalı olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi arttırılmıştır. Boyunluğun sabitlenmesi uçlarına renkli welcro dikilmiş renkli özel vinyleksle yapılmaktadır. Isıyla şekillendirilmiş renkli forexten çene ve ense desteklerine vinyleks metal rivet ile çakılmıştır. 4 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Boyun kırıklarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.

KC-11A KIDS Philadelphia Color Trakea Açık

Çocuklar için özel olarak şekillendirilmiş 12 mm. ithal renkli İngiliz plastizotundan iki parçalı olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Normal philadelphia colordan farklı olarak ön kısmında bulunan boyun desteğinde delik bulunmaktadır. 4 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Boyun kırıklarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.



KD-8 KIDS Polietilen Mold (PAFO)

Renkli Polipropilenden yapılan atelin iki ayrı modeli vardır. Ayakkabı içerisine giyilebilecek modelinin içi plastizot ile kaplanmamış ve üstten tek welcro ile sabitlenmesi sağlanmıştır. Normal moldların içi 3 mm. plastizot ile kaplanmış üç noktadan welcro ile ayarlı kapama sağlanmıştır. Tüm modeller ısı tabancasıyla şekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

Endikasyon: Peroneal zayıflıkta, Düşük ayak tedavisinde kullanılır.



KF-6 KIDS Plastizot Kaplı Mantar Tabanlık

Mantar tabanlıktan farklı olarak tabanlığın üst kısmı deri yerine daha yumuşak olan ve antibakteriyel özelliği bulunan 3 mm.'lik resimli renkli plastizot ile kaplanmıştır. Yumuşak tabanı dolayısıyla düztabanlığın yanı sıra nasır vb. ayak rahatsızlıklarında da kullanılabilir. 25 ile 34 numara arasında değişik boyları mevcut olup tam tabanlık olması ayakkabı içinde kaymayı engellemektedir.

KN-3 KIDS Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

Laminasyon tekniği ile kaplanmış 0.5cm'lik özel renkli süngerli kumaştan yapılan dizliğin sağ ve sol yanlarında arkada ise 1 adet cep içine yerleştirilmiş sert alüminyum balenler bulunmaktadır. Balenlere dizin anatomik şekli verilmiş olup isteğe göre ayar yapılması mümkündür. Patella altından 2 patella üstünden 2 olmak üzere toplam 4 noktadan welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilmektedir. Geniş ayar mekanizması sebebiyle her kalınlıktaki bacağa uyum sağlayabilir. 30-35-40cm'lik olarak üretilmektedir.



Endikasyon: Bacak ve diz için değişebilen derecelerde destek ve düzeltme imkanı sağlar.

Bacağın ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullanılır.

KN-13 KIDS Alçı Terliği

Alçılı ayakla yürümeyi kolaylaştırmak, alçı tabanının kirlenmesini ve kaymasını önlemek için kullanılabilen terlik 3 katlı evadan çocuk anatomisine uygun olarak yapılmıştır. Taban bölümünde kaymayı engelleyici şekilli eva kullanılmıştır. Welcro bantların takılı olduğu lastik bantlarla alçı üzerine kolaylıkla giyilebilir. 3 değişik boyda üretilmektedir.



KN-14 KIDS Alçı Botu

Alçı terliğine ilaveten üst kısımda renkli süngerli kumaş kullanarak alçılı ayağın soğuktan korunması sağlanmıştır. Üstte bulunan iki adet welcrobantla kolaylıkla alçı üzerine giyilip ayarlanabilir. Tek boy olarak arkası ve yanları kapalı bot şeklinde üretilmektedir.





KN-34 KIDS Neopren Dizlik Patella ve Ligament Destekli

3mm. Neoprenden yapılan dizliğe diz anatomisine uygun 5° şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmiş, dizliğin yanlarına dikilen kolonlar içerisine balenler yerleştirilerek lateral ve medial ligamente destek sağlanmıştır. Üstte ve altta olmak üzere iki adet welcrobant dizi boydan boya saracak şekilde yerleştirilmiştir. Avrupa'da yapılan klinik araştırmalar neticesinde dizliğin dizden kaymasını engellemek hedefiyle welcrobantlar için en uygun noktalar bulunmuştur. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma bant ile kaplanmış, birleştirilmesi özel makinelerle yapılarak sağlamlığı ve estetik görünümü artırılmıştır. Renkli neoprenden 3 boy olarak üretilmektedir.



KO-11 KIDS El Bilek Ateli

Çocuk anatomisine uygun olarak elastik kumaştan üretilen atelin 4 değişik noktadan welcro ile ayarlanması mümkündür. Eli istirahat pozisyonunda tutabilmek için kalıplarla gerekli şekil verilmiş alüminyum destekler atelin alt kısmındaki cebe yerleştirilmiştir. Desteklere Uzmanın isteğine bağlı olarak kolaylıkla şekil verilebilir. 3 boy olarak üretilen atelin sağ ve solu vardır.

Endikasyon: El-bilek travmalarında, burkulma, incinme ve ameliyat sonrasında eli istirahat pozisyonunda tutmak için kullanılır.



KO-16 KIDS Kol Askısı

Çocuklar için özel olarak hazırlanan renkli kumaştan yapılan askı üçgen şeklinde olup kolun tamamını içine alacak şekilde dizayn edilmiştir. Askının tamamını kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sağlamaktadır. Askının tüm çevresi yıpranmayı engellemek için pamuklu dokuma ile kaplanmıştır. Isırğan tokalarla kolaylıkla ayarlanan askının enseye gelen kısmına hareketli süngerli kumaştan kılıf takılmıştır. 3 değişik boyda üretilmektedir.



KO-35 KIDS Welpo Omuz Bandajı

Laminasyon yöntemi ile kaplanmış 0,5 mm kalınlığındaki süngerden imal edilmiş olan bandaj omuzun ve humerusun tam stabilizasyonunu sağlar. Kaplamada kullanılan kumaş deriyi tahriş etmeyecek şekilde işlenmiş olup welcronun kumaşın her noktasına yapışabilme özelliği ayar ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Göğse sarılan bantla ekstra stabilizasyon sağlar. Tek boy olarak üretilen bandajın Lacivert, Gri ve Ten rengi bulunmaktadır. Madeni materyal içermediğinden MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilir.

Endikasyon: Omuz immobilizasyonunda, ameliyat sonrasında, Kolun ve omuzun tespitinin gerektiği durumlarda kullanılır.



N-29S Abdominal Korse

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Korsenin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Bele ve abdominal bölgeye destek olmaktadır.

Endikasyon: Bel fıtığı, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalarında tedavi edici olarak, Sporcularda, ağır işlerde çalışanlarda, fizik tedavi ve ameliyat sonrasında koruyucu olarak kullanılır.



N-30S Lumbosacral Korse

Vücudun anatomik şekline uygun olarak kesilmiş her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Korsenin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Sırt kısmında bulunan dört cebe yerleştirilen flexible balenler omurgaya destek sağlamaktadır. Arkadan gelen kemer takviyesiyle bele ekstra destek verilmektedir.

Endikasyon: Bel fıtığı, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalarında tedavi edici olarak, Sporcularda, ağır işlerde çalışanlarda ve fizik tedavi sonrasında koruyucu olarak kullanılır. Lumbar ve sacral vertebranın stabilizesini sağlar.



N-31S Neopren Dizlik

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır.

Endikasyon: Diz travmalarında, Operasyon sonrasında ve spor aktivitelerinde kullanılır.



N-33S Dizlik Patella Destekli Welcrolu

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Patella çevresinde ekstra destek bulunmaktadır.

Endikasyon: Diz travmalarında, Operasyon sonrasında, Patellanın sabitlenmesinde ve Spor aktivitelerinde kullanılır.



N-34S Flexible Balenli Dizlik

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Patella çevresinde ekstra destek bulunmaktadır. Lateral ve medial ligamentlere destek sağlamak için dizliğin sağ ve sol yanlarında dikilmiş ceplere ikişer adet yay balen takılmıştır. Yay balenler dizin destek ihtiyacına göre ceplerde yer değiştirebilecek şekilde seyyar yapılmıştır.



N-35S Menteşeli Dizlik

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dizliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Patella çevresinde ekstra destek bulunmaktadır. Dizliğin yanlarına cepler dikilmiş, cepler içerisine presle standart olarak basılmış metal menteşeler yerleştirilmiştir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Diz instabilitesinde (genu valgus ve varus deformitesinde), Artroskopi sonrasında kullanılır.



N-38S Üst Baldırlık

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Baldırlığın tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır.

Endikasyon: Üst baldır zorlanmalarında, Basit lif kopmalarında, uyluk kaslarının spazm ve güçsüzlüğünde, ameliyat sonrasında, fizik tedavide, spor aktivitelerinde kullanılır.



N-39S Alt Baldırlık

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Baldırlığın tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır.

Endikasyon: Alt baldır zorlanmalarında, Basit lif kopmalarında, kas ezilmelerinde, ameliyat sonrasında, fizik tedavide, spor aktivitelerinde kullanılır.



N-40S El Bilekliği

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden dikdörtgen şeklinde kesilen bilekliğin çevresi ince kıvrırma lastik ile kaplanmıştır, Welcro ile geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır.

Endikasyon: Bilek burkulmasında, travma sonrası ağrılarda, bileğin gücünü arttırmak için, ameliyat sonrasında ve spor aktivitelerinde kullanılır.



N-41S Parmak Geçmeli El Bilekliği

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden başparmak geçecek yeri kalıpla delinmiş olarak yapılan bilekliğin çevresi ince kıvrırma ile kaplanmıştır. Welcrolarla geniş bir ayar mekanizması bulunduğuundan tek boy olarak üretilmiştir.

Endikasyon: Bilekte ve carpusta sabitlemeyi sağlar. Bilek ve carpustaki travma sonrasında, ağrılarda, ameliyat sonrasında, Carpal tünel sendromunda kullanılır.



N-42S Başparmak Tespitli El Bilekliği

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden başparmağı kaplayıp bilekte birleştirecek şekilde üretilen atelin başparmak bölgesinde alüminyum balenin takıldığı cebi vardır. Diğer parmakları etkilemeden başparmağı nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Welcrolarla geniş bir ayar mekanizması bulunduğuundan tek boy olarak üretilmiştir.

Endikasyon: Başparmak kas ve bağ zorlanmalarında, operasyon sonrasında kullanılır.



N-43S El Bilek Ateli

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretilen atelin baş parmak kısmı açıktır. 4 ayrı noktadan welcroyla birleştirilen atelin kesiminde ve dikiminde bileğin anatomik şekli verilerek bileğe tam oturması sağlanmıştır. Kalıplarla standart şekil verilmiş alüminyum destekler cep içerisine yerleştirilmiştir. El bileğini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Tek boy olarak üretilmiş olup sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği burkulma ve ağrılarında, kas ve bağ zorlanmalarında, Carpal Tünel Sendromunda, Operasyon sonrasında kullanılır.



N-44S Başparmak Tespitli El Bilek Ateli

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden hem el-bileği hem de başparmağı immobilize edecek şekilde tasarlanmıştır. Başparmağı da kaplamaktadır. El bileğini istirahat pozisyonunda tutmak için alttan, parmağı istirahat pozisyonunda tutmak için yandan cepler içerisine alüminyum destekler yerleştirilmiştir. Tek boy üretilmiş olup sağ ve sol modeli vardır.

Endikasyon: El bileği ve başparmak kas ve bağ zorlanmalarında, De Quervain tendinitinde, Carpal Tünel sendromunda, Operasyon sonrasında, kas zayıflığı ve spastisite nedeniyle el bileği ve baş parmak kontraktürlerini önlemek amacıyla kullanılır.



N-45S Epicodylit Bandajı

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Bandajın tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Epikondilit bölgesinde ped desteği bulunmaktadır.

Endikasyon: Epikondilit iltihaplanmasında, Tenisçi/Golfçu dirseğinde ve spor aktivitelerinde kullanılır.



N-46S Neopren Dirseklik

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dirsekliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Dirseği saran bandaj ekstra destek sağlamaktadır.

Endikasyon: Dirsek travmalarında, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonrası iyileşme sürecinde ve spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.



N-48S Epicondylit Destekli Dirseklik

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Bandajın tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Lateral ve Medial Epikondilit bölgesinde seyyar ped desteği bulunmaktadır. Dirseği saran bandaj ekstra destek sağlamaktadır.

Endikasyon: Dirsek travmalarında, Dirsek Lateral ve Medial Epikondilitinde, Bursitinde, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonrası iyileşme sürecinde ve Artroskopisi sonrasında kullanılır.



N-50S Ayak Bilekliği

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Bilekliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Bileği saran bandaj ekstra destek sağlamaktadır.

Endikasyon: Ayak bileği travmalarında bileği desteklemek ve ağrıyı hafifletmek için kullanılır.



N-54S Neopren Omuz Bandajı

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden üretildiğinden geniş ayar imkânı bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Omuzluğun tüm kenarları kıvrırma lastik ile kapatılmıştır. Sağ ve sol modeli vardır.



N-63S Patellar Tendon Bandı

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden patellayı alttan desteklemek amacıyla üretilmiştir. Küçük bir bölgede kullanıldığından dizin hareketini kısıtlamaz. Patella'nın altına gelen kısmına hilal şeklinde dikilen ekstra destek diz kapağı tendonunun yükünü azaltır. Tek boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Diz eklemi instabilitesinde, Patello-femoral ağrılarda, Mb Schlatter ve Jumper's knee'de kullanılır.



N-63M Magnetik Patellar Tendon Bandı

Her noktadan welcro yapışabilen neoprenden patellayı alttan desteklemek amacıyla üretilmiştir. Küçük bir bölgede kullanıldığından dizin hareketini kısıtlamaz. Patella'nın altına gelen kısmına hilal şeklinde dikilen mıknatıslar diz kapağı tendonunun yükünü azaltır. Tek boy olarak üretilmektedir.

KORSELER	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	XXL (6)	XXXL (7)	(8)	(9)
A-1, A-1G, A-1L, A-1A, A1B, A-1C, A-2, B-12, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, N-4, N-5, B-1	BEL	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130		
B-2, B-3, B-4	BEL	50-60	60-75	75-90	90-110	110-130				
A-3, A-4, A-5, A-7, A-13, X-17	BEL	60-65	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125		
A-4A, A-4B, A-4C, A-6, A-8, A-9, A-10, Y-29, N-64	BEL	70-75	75-80	80-85	85-90	90-100	100-110	110-125		
D-2A, Y-10, Y-52, Y-53	BEL	60-65	65-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125		
A-1W, A-2W, N-9, N-9A, N-26, N-26A, N-27, N-30A, BİO-02, N-4A	BEL		60-75	75-100	100-130					
E-2, E-3, E-8, N-29, N-30, M-6	BEL	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110				
N-2, N-8, N-17	BEL		60-75	75-90	90-110	110-130				
MB-2A, M-2A	BEL									
MB-10	BEL	12-16-	16-21	21-28	28-36	36-44				
ES-01, ES-02, ES-03, ES-04, ES-05, ES-06, ES-07, ES-08,	Beden	38	40	42	44	46	48	50	52	54
K-1,	BEL	38-40	40-42	42-44	44-48	48-52				
K-3, K-3A	BEL	32-38	38-44	44-50	50-56	56-62				
E-7, E-7A	BEL	32-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58		

DİZLİKLER	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	XXL (6)	XXXL (7)
V-4A	DİZ		26-32	32-37	37-42	42-46		
R-1, R-2	DİZ		28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	
R-3, R-4	DİZ		28-30	30-33	33-36	36-39		
N-31, N-31W, N-32, N-32W, N-33, N-34, N-35, N-35A, N-36, N-37, B-5, X-22, X-23, X-24, X-25, X-45	DİZ	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	45-48
N-57, N-63, N-63A	DİZ	24-27	27-30	30-34	34-39	39-45		

BOYUNLUKLAR	CM.	XXS (0)	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	
C-1, C-5	BOYUN		22-27	27-32	32-38	38-44	44-50	
C-10, C-13, C-13A, C-14, C-15, C-16, C-17	BOYUN	23-26	26-29	29-32	32-36	36-41	41-46	
C-3, C-3A, C-11, C-11B, C-11C	BOYUN		26-29	29-32	32-36	36-41	41-46	
C-11E, C-10E, C-5A	BOYUN			26-32	32-38	38-46		
C-10R	BOYUN		22-26	26-32	32-40	40-48		
B-9	BOYUN		32-36	36-38	38-40	40-43	43-46	

EL BİLEK BANDAHLARI	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	
O-6, B-11, X-5, N-42, N-43, N-44, M-8	EL BİLEK	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	
O-11, O-11A, O-11E, O-11C, O-12, N-11, N-43A, N-43B, N-43C, N-43D, N-44A, M-7	EL BİLEK	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	SAĞ/ SOL
O-11R	EL BİLEK	13-14	14-16	16-18	18-20		SAĞ/ SOL
K-11, K-11A, K-11E	EL BİLEK		13-17	17-21	21-25		SAĞ/ SOL



DİRSEKLİKLER	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)		
N-45, N-46, N-47, N-48, N-48A								
B-6, O-7, W-3, R-6	DİRSEK	21-23	23-25	25-28	28-31	31-35		
V-5E	DİRSEK		21-24	24-28	28-31	31-35		
V-21	DİRSEK		22-25	25-27	27-29	29-31		



AYAK BİLEK BANDAHLARI	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)		
B-10, O-10, V-5B, V-5C, V-5D, N-49, N-50, N-51, N-52, N-53, N53A N-53D	AYAK BİL	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28		
V-5A, R-5	AYAK BİL.		18-20	20-23	23-25	25-28		
N-53W, N-53T, D-8E	AYAK NO.		33-37	37-40	40-45			



GÖĞÜS BANDAHLARI	CM.	XXS (0)	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	
O-25, O-37, O-38	GÖĞÜS	55-65	65-75	70-85	80-95	90-105	100-120	
N-1, N-54	GÖĞÜS		60-75	75-90	90-105	105-120	SAĞ/ SOL	
A-12, A-12A, B-8	GÖĞÜS			60-80	80-100	100-120		



BALDIRLIKLAR	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	XXL (6)	
N-38, B-7	ÜST BALDIR	46-48	48-50	50-52	52-54	54-56	56-60	
N-39	ALT BALDIR	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	



VARİS ÇORAPLARI	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)		
V-6... V-19 arası tüm Varis Çorapları	ALT BALDIR	30-32	32-34	34-36	36-40	40-44		

GENEL YIKAMA TALİMATI

Tüm ürünleri 30 C derecede elde yıkamanız tavsiye edilir. Welcro'ları yıkamadan önce kapatınız ve balenleri cephelerinden çıkartınız. Sabun köpürtülmüş 30 derecelik ılık su ile çitilemeden hafif bastırmalar ile yıkanır. Bol soğuk su ile durulanır, bükülmeden el ile bastırılarak suyu sıkılır. Güneşte, soba kenarında ve ütü ile kurutulmaz. Çamaşır suyu, beyazlatıcı kullanılmaz. Ütülenmez. Kuru temizleme yapılmaz.



ORSA ORTOPEDİ SANAYİ
Sağlık için sağlıklı seçim

Fabrika: KOBİ Organize Sanayi Bölgesi 102. Cad. No: 1 26110 Eskişehir / TÜRKİYE
Tel: +90 222. 236 90 90 (pbx) Fax: +90 222. 236 90 28
web: www.orsaortopedi.com e-mail: orsa@tapagrup.com



ORSA ORTOPEDİ SANAYİ
1976'dan beri



Sağlık için sağlıklı seçim

Çapa Grubunun bir kuruluşu olan ORSA ORTOPEDİ SANAYİ 1976 yılından beri, Tıbbi Korseler-Ortopedik Cihazlar-Felç Yürüme Cihazları-Rehabilitasyon Malzemeleri-Protez ve Ortezler dalında üretim yapmaktadır. Orsa'nın Türkiye genelinde 580 satış noktası bulunmakta, üretilen malzemeler yurtdışında 35 ayrı ülkede satılmaktadır. Üretiminin büyük kısmını yurtdışına gönderen firmamız sektöründe dünyanın en büyükleri arasına girmiştir.

“Sağlık için sağlıklı seçim” sloganıyla yola çıkan firmamız bu sloganı kalite politikasının temelinde yerleştirmiştir. Hasta insanlara hizmet sunduğumuzu hiçbir zaman unutmamak, üretimlerimizi her zaman hastaların yerine kendimizi koyarak kalite kontrolünden geçirmek ve bu bilinci tüm personelimize aşılamak firmamızın başarısının en büyük etkenlerindendir. Dünyada aranan marka olmamızı sağlayan diğer önemli etkenlerde; eğitime önem vermek, nitelikli personel kullanmak, Ar-Ge'nin önemi kavramak, kaliteyi hayat felsefesi olarak benimsemektir.

Ürünlerimizin muadillerinden en büyük üstünlüğü; Ürünlerimizde kullanılan hammaddelerin testlerinin ISO 10993 standartlarına göre Akredite kuruluşlarca yapılmış olması, Avrupa'da yapılmış Klinik Araştırma sonuçlarının bulunması ve gene Avrupa'da Akredite laboratuvarlarca yapılmış Mikro klima test sonuçlarının olmasıdır. Ürünlerimizin zehirsizliği, klinik yeterliliği, vücuda takıldığında zarar verecek kadar terleme ve ısı artışı yapmadığı belgelerle gösterilmektedir. Tabidir ki bu duruma 2001 yılından beri yaptığımız çalışmalarla gelinmiştir. Testlerde uygun çıkmayan malzemelerimizde olmuş bunlar en kısa sürede daha uygun materyallerle değiştirilerek bugünkü uygun hale gelinmiştir. Klinik araştırmalar sırasında bazı ürünler üzerinde 20-25 defa değişiklikler yapılmış ve ideale ulaşana kadar klinik araştırmalar devam etmiştir ve hala da devam etmektedir.

Şu an geldiğimiz noktaya gelince; Doktor ORSA markalı ürünü hastaya tavsiye ettiğinde bu ürünün vücuda toksikolojik etkisi var mıdır? Alerji yapar mı? Yeterli tedavi değerliğine ve standardına sahip midir? Mikroklimat uygunsuzluğu var mıdır? diye düşünmez.

Firmamızda 2002 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi mevcut olup 2010 yılında ISO 13485 belgesini Türkiye'de ilk alan da firmamız olmuştur. Ürünlerimizi Avrupa Birliği Ülkelerine gönderdiğimiz için 2001 yılından beri CE işaretini ürünlerimize koymaktayız. Firmamızın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi mevcuttur. Ürettiğimiz ürünlerinin hammaddelerinin zararsızlığına dair test raporlarımız, mikroklimat, kompresyon vb. test belgelerimiz bulunmaktadır. Branşında yukarıda sayılan belgelerin tümünde ilk olma ve halen birçoğunda da ilk ve tek olma özelliği olan ORSA kalite ve kalite belgeleri konusunda sektörünün öncüsü olmaktan gurur duymaktadır.

Saygılarımızla

Dr. Vildan ÇAPA
Kalite Yönetim Müdürü

Ecz. Necdet ÇAPA
Genel Müdür

Branşında Türkiye'nin ilk ve tek ISO 13485 belgeli kuruluşu,



Sağlık için sağlıklı seçim

ORSA®
ORSA ORTOPEDİ SANAYİ
1976'dan beri

ORSA®

ISO 9001
TSE
HYGIEN
CE
TS 13485
TS 13181